

Data Management Software CS-S10w Professional

Ver.1.8

Bedienungsanleitung



KONICA MINOLTA

Offizielle Bezeichnungen der Anwendungs-Software in diesem Handbuch

(Bezeichnung in diesem Handbuch) (Offizielle Bezeichnung)

Windows, Windows 7	Microsoft® Windows® 7 Professional Operating System
Windows, Windows 8.1	Microsoft® Windows® 8.1 Pro Operating System
Windows, Windows 10	Microsoft® Windows® 10 Pro Operating System

Warenzeichen

- „Microsoft“, „Windows“, „Windows 7“, „Windows 8.1“ und „Windows 10“ sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
 - „Intel“ und „Pentium“ sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Andere Firmennamen und Produktbezeichnungen in diesem Handbuch sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Anmerkungen zu diesem Handbuch

- Dieses Handbuch oder Teile davon dürfen auf gar keinen Fall in irgendeiner Form ohne die ausdrückliche Erlaubnis von Konica Minolta, Inc. nachgedruckt oder vervielfältigt werden.
- Änderungen des Inhalts dieses Handbuchs sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
- Größtes Augenmerk wurde auf die Genauigkeit der Inhalte dieses Handbuchs gelegt. Sollten Sie jedoch Fragen oder Anmerkungen dazu haben, bzw. einen Fehler oder einen fehlenden Abschnitt entdecken, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung.
- Konica Minolta übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die sich ungeachtet der vorhergegangenen Bedingungen durch die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen ergeben.

Einleitung

Die Software CS-S10w ist eine Farbdatensoftware für den Anschluss des CS-200 oder von anderen Chroma-Metern bzw. des CS-2000 oder von anderen Spektralradiometern an einen PC. Sie ermöglicht die Messung und grafische Darstellung der Messdaten sowie weitere Operationen. (Dazu muss der Schutzschlüssel an Ihren PC angesteckt sein.) Die Bezeichnung „CS-1000“ in diesem Handbuch bezieht sich auf jedes Modell der Modellreihe CS-1000.



Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie die CS-S10w Software in Betrieb nehmen, empfehlen wir, dieses Handbuch sowie die Bedienungsanleitung Ihres Computers und des Messgeräts aufmerksam durchzulesen.

Die Screenshots wurden mit der englischen Version der CS-S10w-Software auf einem englischen Betriebssystem erstellt.

Packungsinhalt

- Installations-CD-ROM mit CS-S10w (1 Stk.)
- Schutzschlüssel (USB-Schnittstelle)

Bei der Software-Installation wird im Startmenü auch die Bedienungsanleitung als PDF mit einem Shortcut installiert.

Die Bedienungsanleitung ist auf der Installations-CD-ROM auch in anderen Sprachen verfügbar.

Software-Lizenzvertrag

Die Bedingungen des Lizenzvertrages für die CS-S10w Software finden Sie in der Dialogbox Software-Lizenzvertrag, die während der Installation am Bildschirm erscheint. Diese Software kann nur dann installiert werden, wenn Sie allen Bedingungen dieses Vertrages zustimmen.

Anmerkungen zum Gebrauch

- Die CS-S10w-Anwendungs-Software ist verwendbar mit den Betriebssystemen Windows 7, Windows 8.1 oder Windows 10. Beachten Sie jedoch, dass keines dieser Betriebssysteme im Lieferumfang dieser Software enthalten ist.
- Eines dieser Betriebssysteme muss bereits am PC installiert sein, bevor diese Software installiert werden kann.
- Achten Sie beim Einlegen der CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk auf die richtige Ausrichtung der CD. Legen Sie die CD behutsam ein.
- Halten Sie die CD-ROM sauber und vermeiden Sie Kratzer. Ist die beschriebene Seite verschmutzt oder die Etikettenoberfläche zerkratzt, kann dies zu Lesefehlern führen.
- Setzen Sie die CD-ROM keinen raschen Temperaturschwankungen aus und vermeiden Sie ein Beschlagen der CD.
- Lassen Sie sie an keinem Ort liegen, an dem sie hohen Temperaturen durch direkte Sonneneinstrahlung oder durch Heizgeräte ausgesetzt ist.
- Lassen Sie die CD-ROM nicht fallen und vermeiden Sie starke Stöße.
- Schützen Sie die CD-ROM vor Wasser, Alkohol, Verdünnern und ähnlichen Substanzen.
- Entfernen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk, solange der Computer eingeschaltet ist.

Hinweise zur Aufbewahrung

- Geben Sie die CD-ROM nach Gebrauch wieder in die Kassette zurück und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
- Lassen Sie die CD-ROM an keinem Ort liegen, an dem sie hohen Temperaturen durch direkte Sonneneinstrahlung oder durch Heizgeräte ausgesetzt ist.
- Bewahren Sie die CD-ROM nie an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.

Größtes Augenmerk wurde auf die Genauigkeit der Arbeitsabläufe dieser Software gelegt. Sollten Sie jedoch Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte KONICA MINOLTA Servicevertretung in Ihrer Nähe.

INHALTSVERZEICHNIS

KAPITEL 1	ÜBERBLICK	3
1.1	Hauptfunktionen	4
1.2	Arbeitsablauf	6
1.3	Konfiguration der Fenster	7
KAPITEL 2	ARBEITSLEITFADEN	19
2.1	Starten der CS-S10w-Software	21
2.2	Erstellung einer neuen Datei	31
2.3	Vorbereitung für die Messung	32
2.4	Messung	44
2.5	Festlegung der Bezugsdaten/Toleranz	64
2.6	Arbeiten im Listenfenster	81
2.7	Arbeiten im Entwurf-Fenster	91
2.8	Drucken	96
2.9	Datei Sichern	99
2.10	Andere Funktionen	100
KAPITEL 3	EIGENSCHAFTEN GRAFISCHE OBJEKTE.....	146
3.1	xy -Farbtafel und u'v'-Farbtafelobjekt	148
3.2	Spektralkurve	154
3.3	L*a*b*-Grafik	162
3.4	Trend-Darstellung/Histogramm	169
3.5	Bild	177
3.6	Data Label	180
3.7	String Label	183
3.8	Liniengrafik-Objekt	184
3.9	Linie	191
3.10	Rechteck	192
3.11	Arbeiten im Entwurf-Fenster im Modus Bearbeiten	193
INDEX		196

KAPITEL 1

ÜBERBLICK

1.1 Hauptfunktionen	4
1.2 Arbeitsablauf	6
1.3 Konfiguration der Fenster.....	7
1.3.1 Arbeitsfenster	7
1.3.2 Menüleiste	8
1.3.3 Standard-Symboleiste	10
1.3.4 Tastaturkürzel	13
1.3.5 Listenfenster	14
1.3.6 Entwurf-Fenster.....	15
1.3.7 Werkzeugleiste	16
1.3.8 Status-Fenster	17
1.3.9 Statusleiste	18


1.1 Hauptfunktionen

Betriebsart Farbsystem	(Betriebsart Lichtquellenfarbe) L_{vxy} , $L_vu'v'$, $L_vT\Delta uv$, XYZ, $L^*a^*b^*$, JND, Dominant Wavelength, Excitation Purity, Contrast, Square ratio
	(Betriebsart Objektfarbe) $L^*a^*b^*$, L^*C^*h , XYZ, Yxy, Hunter Lab, $L^*u'v'$, $L^*u^*v^*$, Dominant Wavelength, Excitation Purity
	Anmerkungen zu den angezeigten Werten: Die CS-S10w-Software verbessert die Rechengenauigkeit, da interne Berechnungen mit größeren Zahlen durchgeführt werden als tatsächlich angezeigt. Durch Rundung oder Farbsystemkonversion kann die am wenigsten signifikante angezeigte Ziffer folglich um eine Ziffer von der am Gerät angezeigten abweichen. Da die Toleranzberechnung und die grafisch dargestellten Punkte ebenfalls mit größeren Zahlen verarbeitet werden als tatsächlich angezeigt, kann das Ergebnis der Berechnung oder die dargestellten Punkte von jenen abweichen, die mit den am Gerät angezeigten Werten ermittelt werden.
	Jeder Farbmesswert der mit einem Spektralradiometer gemessenen Daten oder der durch manuelle Eingabe von Spektraldaten erhaltenen Daten wird anhand von Spektraldaten berechnet. Jeder Farbmesswert der mit einem Chroma-Meter gemessenen Daten oder der durch manuelle Eingabe von Farbmessdaten erhaltenen Daten wird anhand von XYZ-Daten berechnet. Aus diesem Grund kann der Farbmesswert jenes Mittelwertes, der durch die manuelle Mittelwertmessung oder durch die Mittelung der Listendaten erhalten wurde, von dem in der Liste angezeigten Mittelwert der kolorimetrischen Werte abweichen.
Beobachter	2 Grad, 10 Grad
Lichtarten (Betriebsart Objektfarbe)	A, B, C, D50, D55, D65, D75, D95, E, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 Bis zu drei Lichtarten können gleichzeitig angezeigt werden.
Messablauf	Light-source Color-Normal Mode, Light-source Color-Contrast Mode, Light-source Color-RGB Mode, Light-source Color-RGB & Contrast Mode und Object Color (variiert je nach ausgewähltem Dokumenttyp) Mehrpunkt-Messung
Grafische Darstellung	xy-Farbtafel, $u'v'$ -Farbtafel, Spektralkurve, $L^*a^*b^*$ Absolutwert, Trend-Darstellung und Histogramm, Liniengrafik
Darstellung von Bildern	Messdaten können mit Bildern (im Format JPEG oder BMP) verknüpft werden.
Messgerät Kontroll Funktionen	Messung/Kalibrierung Mittelwertbildung: 2 bis 1000 Messungen Intervallmessung: 2 bis 1000 Messungen/0 bis 12 Stunden-Intervall (in 10-Sekunden-Stufen) Messung mittels Taste am Messgerät (nur CS-2000/2000A oder CS-200) Download der Konfigurationsdaten in das Gerät Upload der im Speicher des Messgeräts abgespeicherten Daten Benutzerkalibrierung

Bezug	Zwei oder mehr Bezugsdaten können eingetragen werden. Bezugsdaten können in das Messgerät überspielt werden.
Datenliste	Auflistung der Bezugs- und Proben-Daten Bearbeiten (Löschen, Sortieren, Mittelwertermittlung, Kopieren & Einfügen)
Externe E/A	Upload/Speichern der Datei(en) in den Originalformaten (mit der Dateierweiterung „.ces“). Upload/Speichern der Vorlagendatei(en) im Originalformat (mit den Dateierweiterungen „.mtp“ (CM-S100w) und „.ctp“ (CS-S10w)). Speicherung der Daten im Textformat. Kopieren der Liste in Zwischenablage.

1.2 Arbeitsablauf

Arbeits-
ablauf

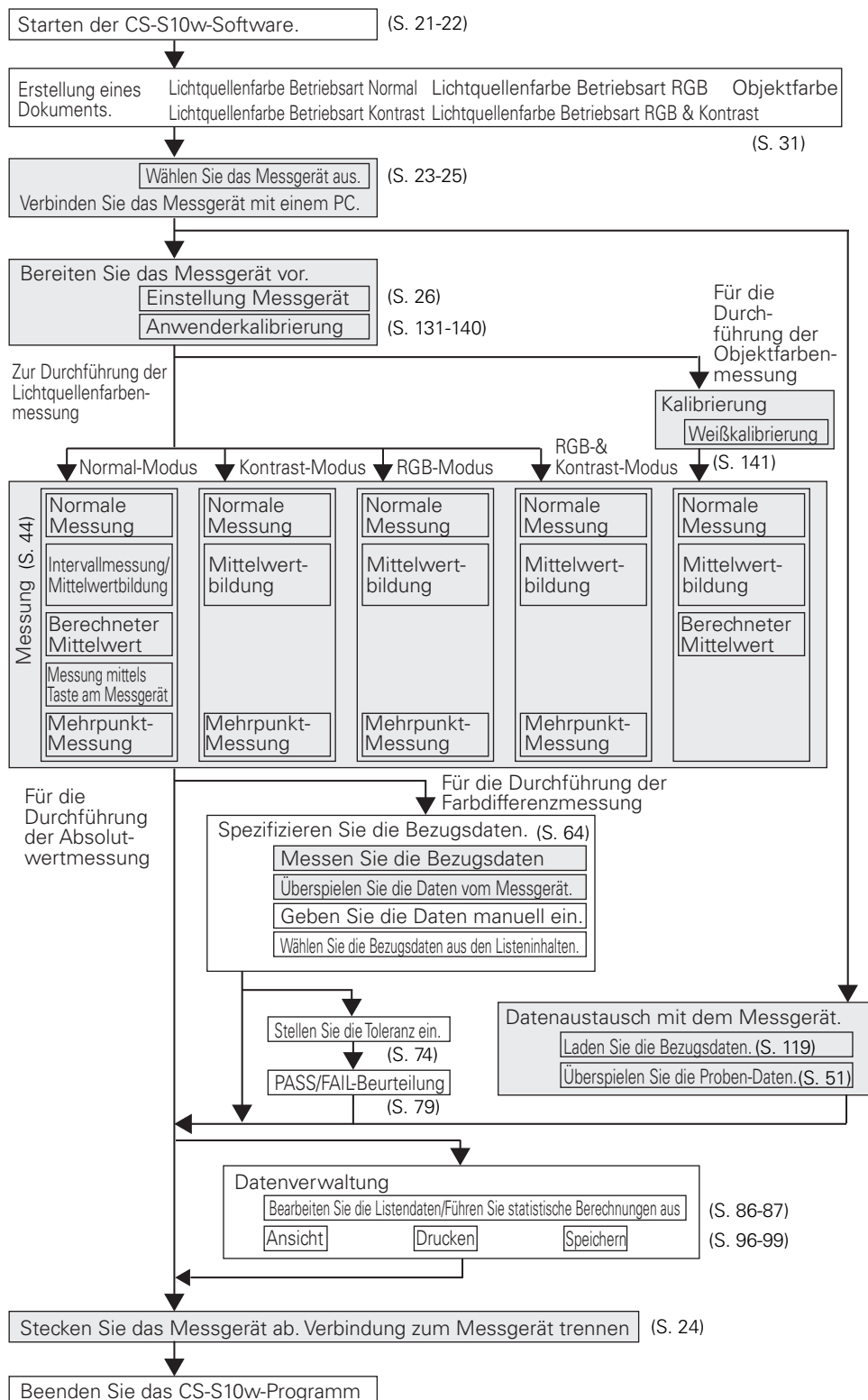

Die schattierten Abschnitte zeigen Funktionen an, die nur verfügbar sind, wenn das Gerät angeschlossen ist.

1.3 Konfiguration der Fenster

1.3.1 Arbeitsfenster

Die CS-S10w-Software sieht folgende Fenster und Leisten vor.

The screenshot shows the CS-S10w software interface. The main window is titled 'CS-S10w - [New Document1]'. It features a menu bar (File, Edit, View, Instrument, Data, Object, Tool, Window, Help) and a toolbar with icons for file operations, measurement, and viewing. The interface is divided into several panes:

- Menüleiste (S. 8):** Located at the top, it contains the menu bar.
- Standard-Symbolleiste (S. 10):** Located below the menu bar, it contains icons for frequently used functions.
- Listenfenster (S. 14):** Located on the right side, it displays a table of measurement data with columns for Data Name, L*, a*, b*, dL*, da*, db*, Target No., x, and y.
- Status-Fenster (S. 17):** Located on the left side, it displays the status of the instrument, including measurement options, communication status, and instrument settings.
- Werkzeugleiste (S. 16):** Located at the bottom, it contains icons for graphical objects that can be inserted into the design window.
- Statusleiste (S. 18):** Located at the bottom, it displays details or status for the selected function.
- Entwurf-Fenster (S. 15):** The main central area, which is currently empty and displays a blue grid.

Callouts point to each of these elements, providing a brief description of their function.

1.3.2 Menüleiste

Wird die CS-S10w-Software gestartet, erscheint ähnlich wie bei einer anderen Windows-basierten Software eine Menüleiste am oberen Rand des Fensters. In diesem Kapitel werden die in der Menüleiste verfügbaren Funktionen sowie die jeweiligen Seiten im Handbuch aufgelistet, auf denen diese Funktionen beschrieben werden.

File

 New	Ctrl+N	31
 Open	Ctrl+O	104
Close		
 Save	Ctrl+S	
 Save As		99
Save Selection As Text		87
Template		
Load Template		101
Save as Template		100
Page Setup		96
 Print Preview		98
 Print	Ctrl+P	98
Startup Options		102
Send Mail		111
Documents recently opened with the CS-S10w software.		9
(Bis zu fünf werden angezeigt.)		
 Exit	Shift+X	

Edit

 Cut	Ctrl+X	86, 94, 193
 Copy	Ctrl+C	86, 94, 193
 Paste	Ctrl+V	86, 94, 193
Delete	Del	87
Bring Forward		193
Send Backward		193
Bring to Front		193
Send to Back		193

View

☒ Standard Toolbar		7, 10
☒ Status Bar		7, 18
 List Window		7, 14, 81
☒ Status Window		7, 17
 Zoom In List		90
 Zoom Out List		90
 Restore List Size		90
Welcome to CS-S10w		22
Toolbar setup		10
Edit Shortcuts		13

Instrument

 Connect/Disconnect	F5/Shift+F5	24
Communication Setup		23
 Instrument Settings		26
 Calibration	F2	141
 Measure	F4	45
Re-measure		89
Measurement Options		42, 46
 Averaged Measurement		
 Measurement With Instrument Key	F7	50
Upload/Download		48
Upload Samples		51
Upload Target		70
Download Target		119
Clear Stored Data		
User Calibration		114, 123, 134
Standalone Konfiguration		127

Die Befehle im Menü *Instrument* sind nur verfügbar, wenn das Messgerät mit dem Computer verbunden ist.

Data

 Create Folder	72
Change Folder Name	
Delete Folder	
Tolerance Setting	74
Judgement Format.....	79
Default Tolerance Setting	74
Auto Naming	43
Input Spectral Target.....	65
Input Colorimetric Target.....	68
Edit Spectral Data	144
Observer and Illuminant.....	32
List Items	35
Decimal Places	41
 Next Data	95
 Previous Data	95
Data Property	53

Object

Select	92
Line	191
Rectangle	192
xy u'v'	148
L*a*b*	162
Spectral Graph	154
Trend/Histogram	169
Image	177
Data Label	180
String Label	183
Line Graph	184
Property	

Tool

Change Target	73
Move to Target	
Average	88
Sort	87
View Settings	82,83,91,106
☒ Edit Mode	91
Option	109


Window

Cascade	105
Tile	105
☒ Documents currently open	

Help

About CS-S10w	22
---------------------	----

In der Standard-Symbolleiste stellt dieses Symbol den Befehl dar. Für Details siehe Seite 10.

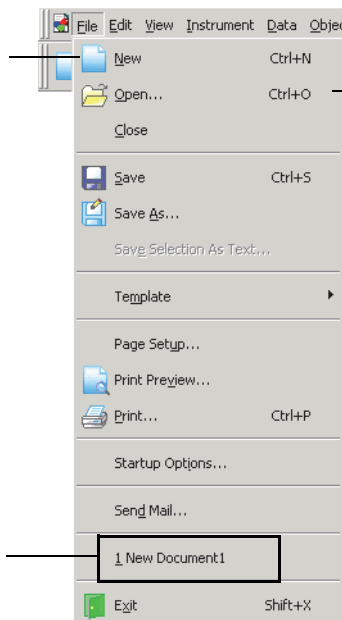

Tastenkombination für diesen Befehl. Für Details siehe Seite 13.

Zuletzt mit der CS-S10w-Software geöffnete Dokumente. (Bis zu fünf werden angezeigt.)

1.3.3 Standard-Symbolleiste


Die Standard-Symbolleiste enthält Schaltflächen für häufig verwendete Funktionen. Um den Befehl aufzurufen, klicken Sie einfach mit der Maus auf die Schaltfläche.



- Stellen Sie den Mauszeiger auf eine Schaltfläche, um eine kurze Beschreibung der jeweiligen Funktion anzuzeigen.
- Die Schaltflächen können in zwei verschiedenen Größen dargestellt und in einer beliebigen Reihenfolge angeordnet werden.

Einblenden/Ausblenden der Standard-Symbolleiste


Klicken Sie auf *View - Standard Toolbar* in der Menüleiste, um die Standard-Symbolleiste ein- bzw. auszublenden.

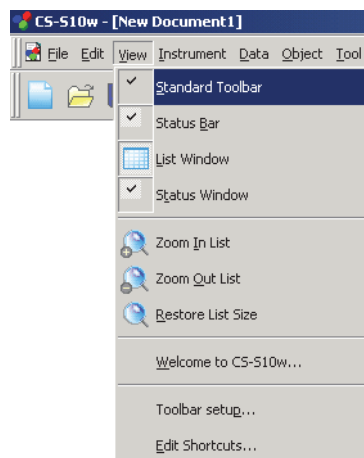

Anpassen der Standard-Symbolleiste


Um die gewünschten Symbol-Kombinationen in Ihre Symbolleiste zu holen, wählen Sie *View - Toolbar setup* in der Menüleiste.

1. Klicken Sie auf New.
2. Geben Sie den Namen für die Symbolleiste ein und klicken sie auf OK.

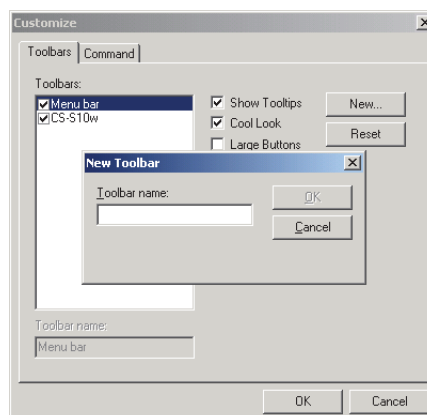


3. Klicken Sie auf die Registerkarte Command und wählen Sie die Symbol-Kategorie aus, die Sie aus der unter Categories angezeigten Liste in der neuen Symbolleiste anfügen wollen.

Die Schaltflächen-Symbole für die ausgewählte Kategorie werden im Bereich Symbole angezeigt.

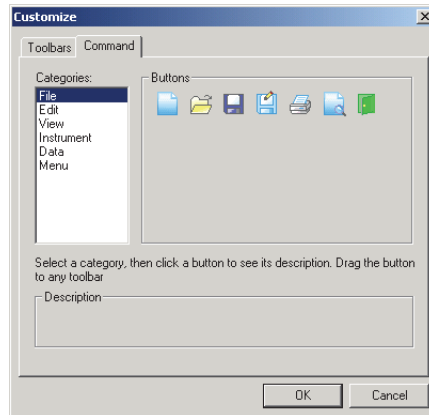


4. Klicken Sie auf das Schaltflächensymbol und ziehen Sie es in die neue Symbolleiste.

Die Schaltfläche erscheint nun in der Symbolleiste.

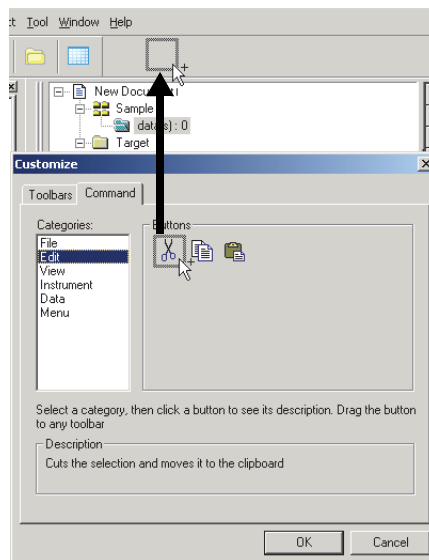

■ Einstellungen in der Dialogbox Customize

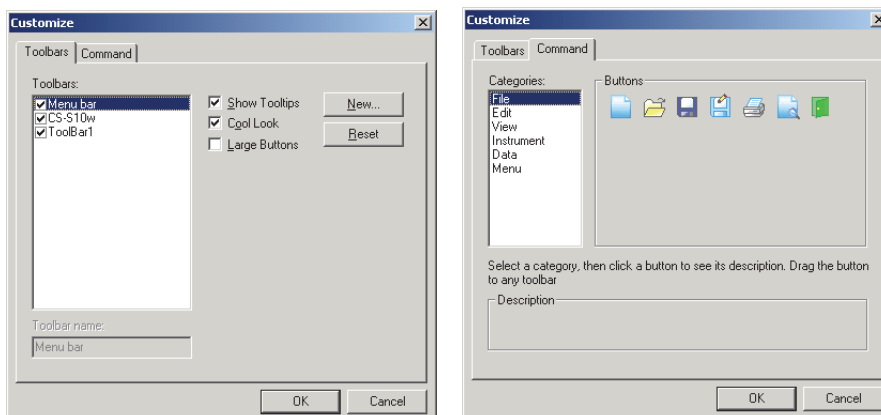

Registerkarte Toolbars


CS-S10w

Hierbei handelt es sich um die Standard-Symbolleiste. Wird dieser Punkt aktiviert, erscheint die Standard-Symbolleiste. Deaktivieren Sie diesen Punkt, um die Symbolleiste zu verbergen. Um die Grundeinstellungen wieder herzustellen, klicken Sie auf Reset.

Show Tooltips

Stellen Sie den Mauszeiger auf eine Schaltfläche, um eine kurze Erklärung der Funktion des als Tooltip dargestellten Symbols anzuzeigen.

Aktivieren Sie diese Option, um ein Tooltip anzuzeigen. Deaktivieren Sie diesen Punkt, wenn kein Tooltip angezeigt werden soll.

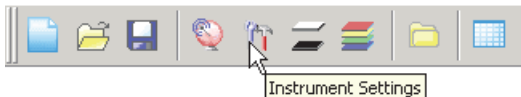

Cool Look

Das Erscheinungsbild der in der Symbolleiste angezeigten Symbole kann geändert werden.

Ist diese Option aktiviert, erscheinen die Symbole normalerweise flach, wirken aber dreidimensional, sobald der Mauszeiger auf die Schaltfläche gestellt wird.




Anzeige mit randlosen Symbolen



Anzeige der Schaltflächen

Large Buttons

Die Standardgröße der Symbole in der Symbolleiste kann auf größere Symbole umgestellt werden, wobei unter dem Symbol eine Textbeschreibung der jeweiligen Schaltfläche angezeigt wird.

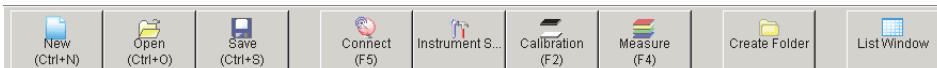

Registerkarte Command


Wählen Sie diese Registerkarte, um Schaltflächen an die Symbolleiste anzufügen oder von dort zu entfernen.

1.3.4 Tastaturkürzel

Die Eingabe von Menübefehlen der CS-S10w-Software ist auch einfach über verschiedene Tastenkombinationen möglich.

Tastaturkürzel bearbeiten


Für die Anpassung der Tastenkombinationen wählen Sie *View - Edit Shortcuts* in der Menüleiste.

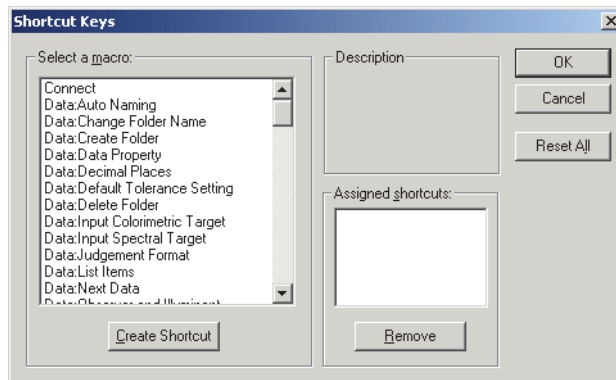

1. Für die Erstellung eines Tastaturkürzels oder die Bearbeitung einer bereits bestehenden Tastaturkombination wählen Sie den gewünschten Prozess unter „Select a macro“.
2. Klicken Sie auf Create Shortcut.
3. Die Dialogbox Assign Shortcut erscheint. Drücken Sie die Taste(n), die Sie dem Tastaturkürzel zuweisen möchten.

Im Feld unter „Press new shortcut key:“ werden „Strg“ und die Taste(n), die Sie gedrückt haben, angezeigt. Wenn Sie eine beliebige Taste zusammen mit der Umschalt- oder Alt-Taste gedrückt haben oder wenn Sie eine Funktionstaste gedrückt haben, wird angezeigt, welche Taste(n) Sie gedrückt haben.

Wurde(n) die gedrückte(n) Taste(n) bereits für ein anderes Makro vergeben, wird das jeweilige Makro unter „Current Assignment“ angezeigt. Wurde die Taste noch keinem anderen Makro zugewiesen, wird „(Unassigned)“ angezeigt.

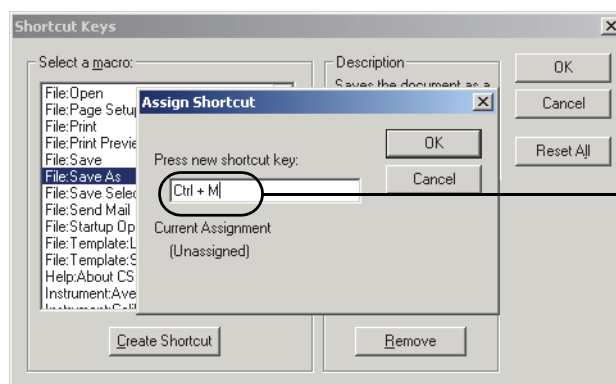

Beispiel:
Wenn die Tasten Strg
und M gedrückt
werden

4. Klicken Sie auf OK.

■ Dialogbox Shortcut Keys

Create Shortcut

Drücken Sie diese Schaltfläche, um ein neues Tastaturkürzel zu erstellen.

Reset All

Drücken Sie diese Schaltfläche, um alle erstellten Tastaturkürzel zurückzusetzen. Die CS-S10w-Software stellt die auf S. 8 und 9 angezeigten Grundeinstellungen wieder her.

Remove

Wählen Sie ein Makro, dessen Tastaturkürzel Sie ersetzen wollen. Wählen Sie das zugehörige Tastaturkürzel und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um es zu löschen.


1.3.5 Listenfenster

Im Listenfenster werden Proben-Daten aufgelistet.

Jede Dokumentendatei hat ihr eigenes Listenfenster. Wird das Entwurf-Fenster geschlossen, schließt sich auch das Listenfenster.

Zur einfacheren Verwaltung von Daten können diese in Ordnern organisiert werden. Die Liste zeigt die im ausgewählten Ordner gespeicherten Daten.

Für die Listenanzeige können Sie aus zwei Anzeigearten auswählen: Nach Reihen - ein Wert wird pro Reihe angezeigt - oder nach Spalten - ein Wert wird pro Spalte angezeigt. Für nähere Informationen zur Auswahl der Listenanzeige siehe Seite 102. Die Abbildung unten zeigt ein Beispiel für die Listenanzeige von Daten in einer Reihe.

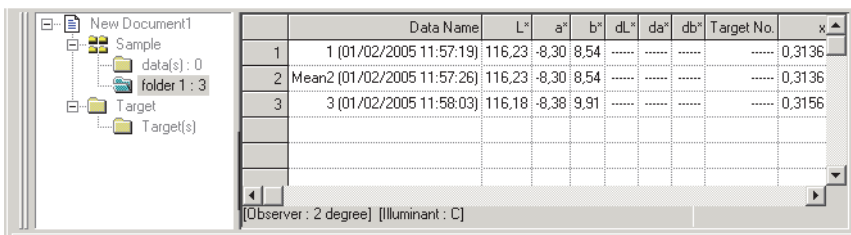


	Data Name	L*	a*	b*	dL*	da*	db*	Target No.	x
1	1 (01/02/2005 11:57:19)	116,23	-8,30	8,54	-----	-----	-----	-----	0,3136
2	Mean2 (01/02/2005 11:57:26)	116,23	-8,30	8,54	-----	-----	-----	-----	0,3136
3	3 (01/02/2005 11:58:03)	116,18	-8,38	9,91	-----	-----	-----	-----	0,3156

[Observer : 2 degree] [Illuminant : C]

1.3.6 Entwurf-Fenster


Im Entwurf-Fenster werden grafische Objekte eingefügt.

Zwei Ansichten des Entwurf-Fensters sind für jede Dokumentendatei verfügbar: Display-Ansicht und Druckansicht. Im Modus Edit können grafische Objekte beliebig in jedes Fenster gestellt werden.

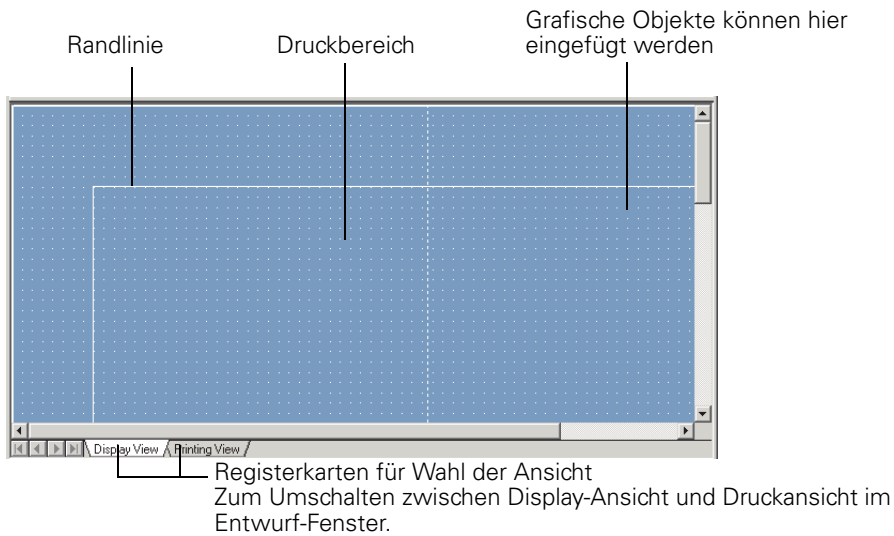

1.3.7 Werkzeugleiste

In dieser Leiste können Sie grafische Objekte auswählen und im Entwurf-Fenster einfügen. Diese Leiste erscheint im Fenster, wenn sich die CS-S10w-Software im Modus Edit befindet.

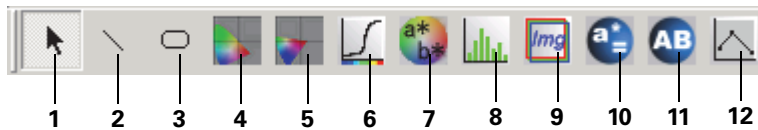


- 1) Auswahlwerkzeug
- 2) Linie
- 3) Rechteck
- 4) xy-Farbtafel
- 5) u'v'-Farbtafel
- 6) Spektralkurve
- 7) Absolut-Grafik ($L^*a^*b^*$)
- 8) Trend-Darstellung/Histogramm
- 9) Bild
- 10) Data Label
- 11) String Label
- 12) Liniengrafik-Objekt

Für Details über grafische Objekte siehe „Eigenschaften Grafische Objekte“ auf Seite 146.

1.3.8 Status-Fenster

Im Status-Fenster werden der Betriebs- und Kommunikationsstatus des Messgeräts angezeigt.

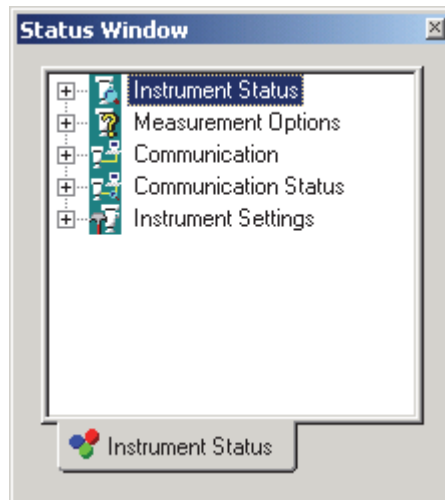

Angezeigte Anmerkungen lauten z.B. wie folgt:

Instrument Status

- └ Measurement available/ Not connected/ White Calibration is required.
- └ Measuring/ Calibrating/ Configuring/ Uploading/ Downloading
- └ Low Battery/ Low Luminance

Measurement Options

- └ Multi-Point
- └ Interval
- └ Auto Averaging
- └ Measurement With Instrument Key

Communication

- └ USB/RS-232C (mit spezifizierten Parametern, wie etwa COM und bps)

Communication Status


- └ OK/ Communicating/ Not connected/ Error

Instrument Settings

- └ Instrument Name
- └ Serial No.
- └ Firmware Version
- └ Measurement Type
- └

■ Einblenden/Ausblenden des Status-Fensters

Wählen Sie *View - Status Window* aus der Menüleiste, um das Status-Fenster anzuzeigen.

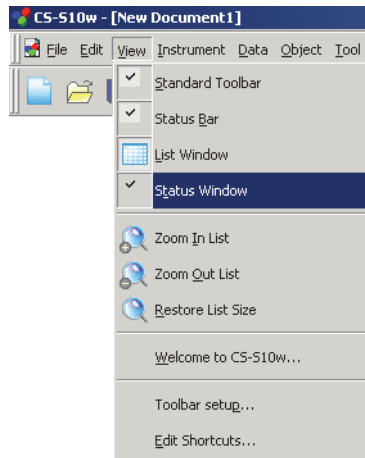

1.3.9 Statusleiste

Zeigt Details oder den Status jeder CS-S10w-Funktion.

Wird der Mausfeil über ein Menü, eine Schaltfläche oder ein Werkzeug-Symbol gestellt, wird die Beschreibung der jeweiligen Funktion angezeigt.

Zeigt den Dokumenttyp (sowie die Anzahl der Punkte, wenn Mehrpunkt-Messung ausgewählt wurde).

Es erscheint ein Symbol, das den Status des Messgeräts anzeigt. Verbunden Getrennt

Zeigt die Bezeichnung des angeschlossenen Messgeräts



Zeigt die Leuchtdichte-Einheit an.

Zeigt an, welche Betriebsart gerade aktiv ist (Demo oder Messgerät). In Betriebsart Demo kann die CS-S10w-Software so betrieben werden, als wäre das Messgerät angeschlossen, auch wenn dieses im Augenblick nicht angeschlossen ist. Wenn Sie versuchen, eine Messung durchzuführen, wird ein beliebiges Messwtergebnis angezeigt.

Zeigt den Produkttyp der CS-S10w

KAPITEL 2

ARBEITSLEITFADEN

2.1	Starten der CS-S10w-Software	21
2.1.1	Erstmaliger Start der CS-S10w-Software	22
2.1.2	Auswahl des anzuschließenden Messgeräts	23
2.1.3	Verbindung mit dem Messgerät	24
2.1.4	Einstellung des Messgeräts	26
2.2	Erstellung einer neuen Datei	31
2.2.1	Erstellung einer neuen Datei	31
2.3	Vorbereitung für die Messung	32
2.3.1	Beobachter und Lichtart einstellen	32
2.3.2	Einstellung von Listen Merkmal	35
2.3.3	Einstellung der Dezimalstellen für die Liste	41
2.3.4	Einstellung der Messoptionen	42
2.3.5	Einstellung Automatische Bezeichnung	43
2.4	Messung	44
2.4.1	Durchführung einer Normalen Messung	45
2.4.2	Durchführung einer Intervallmessung/Mittelwertbildung	46
2.4.3	Berechneter Mittelwert	48
2.4.4	Messung mittels Taste am Messgerät	50
2.4.5	Überspielen der Probanddaten vom Messgerät	51
2.4.6	Anzeige der Dateneigenschaften	53
2.4.7	Verknüpfung eines Bilds mit den Daten	55
2.4.8	Messung in Betriebsart Lichtquellenfarbe - Kontrast	56
2.4.9	Messung in Betriebsart Lichtquellenfarbe - RGB	58
2.4.10	Messung in Betriebsart Lichtquellenfarbe – RGB & Kontrast	60
2.4.11	Mehrpunkt-Messung	62
2.5	Festlegung der Bezugsdaten/Toleranz	64
2.5.1	Eintragen von Bezugsdaten	64
2.5.1-a	Durchführung einer Bezugsmessung	65
2.5.1-b	Eintragen des Bezugs durch Manuelle Dateneingabe	65
2.5.1-c	Überspielen der Bezugsdaten vom Messgerät	70
2.5.1-d	Bezugsdaten von den bestehenden Daten kopieren	71
2.5.2	Festlegung der Bezugsdaten	72
2.5.2-a	Erstellen eines Bezug-Ordners	72
2.5.3	Einstellung der Toleranz	74
2.5.3-a	Einstellung der Anfangstoleranz	74
2.5.3-b	Einstellung der Toleranz für jeden Bezug	77
2.5.3-c	Einstellung des Bewertungsformats im Listenfenster	79
2.6	Arbeiten im Listenfenster	81
2.6.1	Baumdiagramm	81
2.6.2	Liste	82
2.6.3	Bearbeitung der Listendaten	86
2.6.4	Hinzufügen von Mittelwertdaten	88
2.6.5	Listendaten neu messen	89
2.6.6	Liste vergrößern/verkleinern	90

Starten der
CS-S10w-
Software

Erstellung
einer neuen
Datei

Vorbereitung
für die
Messung

Messung

Festlegung der
Bezugsdaten/
Toleranz

Arbeiten im
Listenfenster

Arbeiten im
Entwurf-
Fenster

Drucken

Datei sichern

Andere
Funktionen

2.7 Arbeiten im Entwurf-Fenster.....	91
2.7.1 Bearbeitung des Entwurf-Fensters	91
2.7.2 Einfügen eines Grafischen Objekts.....	92
2.7.3 Auswahl eines Grafischen Objekts	92
2.7.4 Auswahl eines Grafischen Objekts aufheben	93
2.7.5 Änderung der Größe eines Grafischen Objekts	93
2.7.6 Verschieben eines Grafischen Objekts	93
2.7.7 Kopieren eines Grafischen Objekts	94
2.7.8 Ausschneiden eines Grafischen Objekts	94
2.7.9 Einfügen eines Grafischen Objekts.....	94
2.7.10 Löschen eines Grafischen Objekts.....	94
2.7.11 Entwurf-Fenster im Modus Run.....	94
2.7.12 Arbeiten im Fenster, wenn das Listenfenster verborgen ist	95
2.8 Drucken.....	96
2.8.1 Seiteneinstellung	96
2.8.2 Druckvorschau.....	98
2.8.3 Drucken Starten.....	98
2.9 Datei Sichern	99
2.9.1 Datei Sichern	99
2.10 Andere Funktionen	100
2.10.1 Vorlagendatei	100
2.10.2 Verwendung einer Vorlagendatei	101
2.10.3 Einstellung von Programmstart Optionen	102
2.10.4 Datei öffnen	104
2.10.5 Anordnen von Fenstern überlappend/nebeneinander	105
2.10.6 Ansicht der Einstellungen in jedem Fenster	105
2.10.7 Color Setting	108
2.10.8 Einstelloptionen	109
2.10.9 Übermittlung von Dateien per E-Mail	111
2.10.10 Einstellung Benutzerkalibrierung	112
2.10.11 Laden von Bezugsdaten in das Messgerät	119
2.10.12 Hinzufügen eines Objektivtyps/ND-Korrektur.....	122
2.10.13 Laden von Konfigurationsdaten in das Messgerät	127
2.10.14 Durchführung der Benutzerkalibrierung	131
2.10.15 Weißkalibrierung für Objektfarbenmessung	141
2.10.16 Berechnung von Spektraldaten	144

2.1 Starten der CS-S10w-Software

Nähere Informationen zur Installation der CS-S10w-Software finden Sie im Installations-Leitfaden.

Wählen Sie das CS-S10w-Symbol im Start-Menü. Sie können das Programm auch durch Auswahl der jeweiligen Datei starten. Wenn das CS-S10w-Programm startet, erscheint der folgende Eingangsbildschirm.

■ Eingangsbildschirm




■ Information zur Version

Der Eingangsbildschirm kann auch durch Auswahl von *Help - About CS-S10w* in der Menüleiste aufgerufen werden. Die aktuelle Version der CS-S10w-Software wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt.

2.1.1 Erstmaliger Start der CS-S10w-Software

Wird das CS-S10w-Programm zum ersten Mal gestartet, erscheint die Dialogbox „Welcome to CS-S10w“.

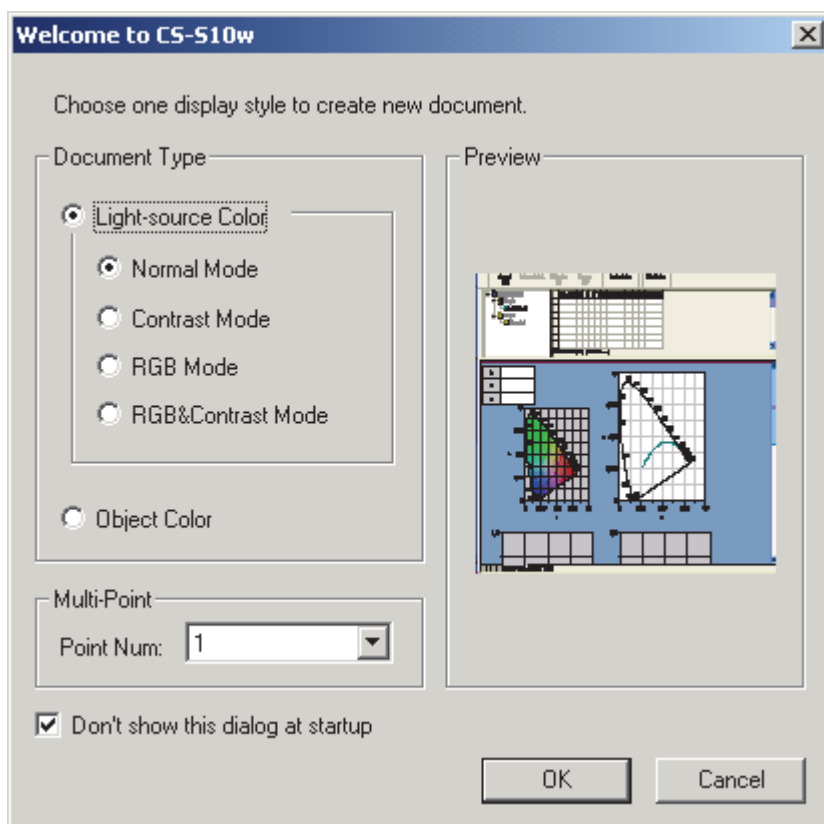

■ Dialogbox Welcome to CS-S10w

Document Type

Light-source Color - Normal Mode, Light-source Color - Contrast Mode, Light-source Color - RGB Mode, Light-source Color - RGB&Contrast Mode, Object Color

Wählen Sie aus, ob eine Lichtquellenfarbenmessung oder eine Objektfarbenmessung durchgeführt werden soll. Für eine Lichtquellenfarbenmessung stehen die Betriebsarten Normal, Kontrast, RGB oder RGB & Kontrast zur Verfügung. Messablauf, Listenmerkmale und Datenverwaltungsmethode hängen von der Betriebsart ab. Für Details, siehe Seite 44.

Mit einem Klick auf die Optionsschaltflächen kann das Vorschauenfenster rechts angezeigt werden.

Multi-Point

Point Num

Ist der Dokumenttyp auf Modus Lichtquellenfarbe eingestellt, können Sie hier die Anzahl der für Mehrpunkt-Messung verwendeten Punkte auswählen. Für Details zur Mehrpunkt-Messung siehe Seite 62.

Don't show this dialog at startup


Wenn Sie dieses Feld nicht aktivieren, wird die Dialogbox Welcome to CS-S10w beim nächsten Start der CS-S10w-Software wieder angezeigt. Diese Dialogbox kann auch durch Auswahl von *View - Welcome to CS-S10w* in der Menüleiste aufgerufen werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Dialogbox zu schließen.


2.1.2 Auswahl des anzuschließenden Messgeräts

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Messgerät angeschlossen ist.

1. Wählen Sie *Instrument - Communication Setup* in der Menüleiste.

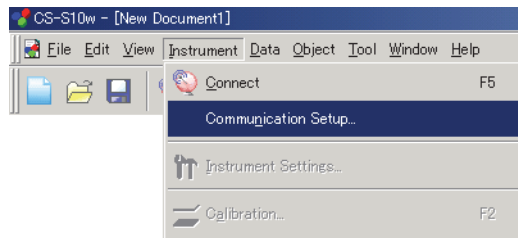


Die Dialogbox Select Instrument erscheint.

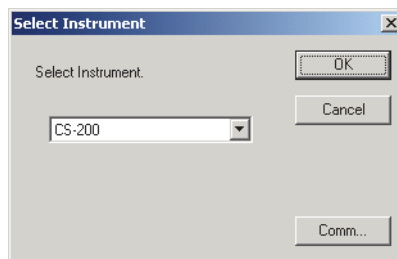

2. Wählen Sie das Messgerätmodell.
Wenn das CS-2000A angeschlossen ist, wählen Sie CS 2000.
3. Wurde das CS-2000, das CS-100A oder das CS-1000 ausgewählt, klicken Sie auf die Schaltfläche Comm... (Verbindung).

Die Dialogbox Serial Port Settings erscheint.

Wurde in Punkt 2 das CS-200 ausgewählt, wird die Verbindung über den USB-Anschluss hergestellt. Die Einstellung der seriellen Schnittstelle ist daher nicht erforderlich. Gehen Sie zu Punkt 5.

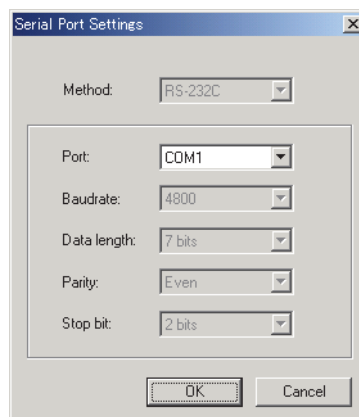

4. Stellen Sie die Parameter ein und klicken Sie auf OK.

Wenn Sie unter Schritt 2 CS-2000 ausgewählt haben, wird als Methode USB (CDC) angezeigt. [Auswahl nicht möglich] Wählen Sie als Port den COM-Anschluss, dem das CS-2000/2000A zugewiesen ist. Die Anleitung zum Ermitteln der COM-Anschlussnummer finden Sie in der Installationsanleitung.

Wählen Sie einen COM-Anschluss aus, der momentan nicht von einem anderen System oder einer anderen Anwendung verwendet wird. Wird ein COM-Anschluss ausgewählt, der bereits von einem

anderen System oder einer anderen Anwendung verwendet wird, kann dies zu einer Fehlfunktion führen.

Damit die Parameter mit den Einstellungen des Messgeräts übereinstimmen, schlagen Sie bitte für die Parametereinstellung in der Bedienungsanleitung Ihres Messgeräts nach.

5. Klicken Sie auf OK.

2.1.3 Verbindung mit dem Messgerät



Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Messgerät angeschlossen ist.

Um eine Verbindung mit dem Messgerät herzustellen, wählen Sie *Instrument-Connect* in der Menüleiste und klicken Sie auf das Symbol in der Symbolleiste. Alle Details zur Verbindung werden im Status-Fenster angezeigt.

Verbindung mit dem Messgerät

1. Wählen Sie *Instrument - Connect* in der Menüleiste.



Die CS-S10w-Software stellt eine Verbindung zum Messgerät her und der Status des Messgeräts wird im Status-Fenster angezeigt. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, erscheint im *Instrument*-Menü statt *Disconnect Connect*.

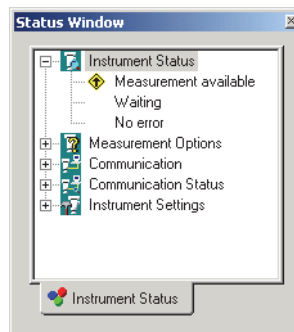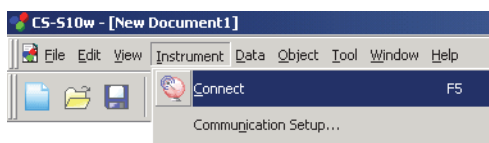

Verbindung zum Messgerät trennen

1. Wählen Sie *Instrument - Disconnect* in der Menüleiste.

Die CS-S10w-Software trennt die Verbindung zum Messgerät und der Status des Messgeräts wird im Status-Fenster angezeigt. Sobald die Verbindung zum Messgerät getrennt wurde, erscheint im *Instrument*-Menü statt *Connect Disconnect*.

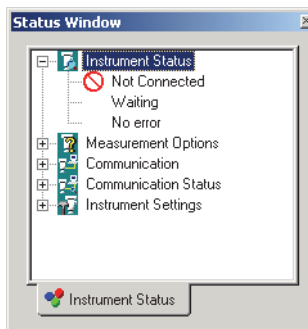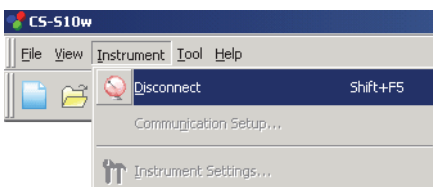

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann

Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, erscheint eine Dialogbox mit der Meldung „No response from instrument“.

Vergewissern Sie sich, dass das USB- oder RS-232C-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist, dass das Messgerät eingeschaltet ist, und dass der Schutzschlüssel korrekt am PC angesteckt ist. Handelt es sich beim angeschlossenen Messinstrument um das CS-2000/2000A, das CS-100A oder das CS-1000, dann überprüfen Sie auch, ob die in der Dialogbox Serial Port Settings (Einstellung der seriellen Schnittstelle) festgelegten Kommunikationseinstellungen mit den am Messgerät getroffenen Einstellungen übereinstimmen. Nachdem Sie diese Punkte überprüft haben, wählen Sie erneut *Connect*.

Während der Verbindung auftretende Probleme

Verbindungsprobleme können auftreten, auch nachdem die CS-S10w-Software erfolgreich mit dem Messgerät verbunden und eine korrekte Kommunikation hergestellt wurde. In diesem Fall erscheint eine Dialogbox mit der Mitteilung „No response from instrument.“ Erscheint diese Meldung, klicken Sie auf OK und überprüfen Sie das USB oder RS-232C-Kabel auf festen Sitz bzw. ob das Messgerät eingeschaltet ist, bevor Sie wieder *Connect* wählen.

Wenn das Messgerät mit Batterien betrieben wird

Wenn Sie versuchen, eine Verbindung zum Messgerät herzustellen und die Versorgungsspannung des Messgeräts niedrig ist, kann das CS-S10w den Betrieb unterbrechen, solange es auf eine Rückmeldung vom Messgerät wartet. Schalten Sie in diesem Fall das Messgerät ab. Wenn eine Dialogbox mit der Meldung „No response from instrument“ erscheint, klicken Sie auf OK. Ersetzen Sie die Batterien durch neue oder schließen Sie den AC-Adapter an, bevor Sie wieder *Connect* wählen.

Wenn der PC mit Energiespareinstellungen, Standby-Einstellungen o. ä. betrieben wird


Wenn der PC während einer Verbindung zum Messgerät in den Energiesparmodus geht, ist nach dem Wiederherstellen des Normalbetriebs manchmal keine Kommunikation mehr möglich. Sollte dieser Fall eintreten, trennen Sie als erstes mit der Software CS-S10w die Verbindung zum Messgerät. Ziehen Sie dann das Kabel ab und stecken Sie es wieder an. Wählen Sie schließlich erneut *Connect* (Verbinden).

2.1.4 Einstellung des Messgeräts

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Messgerät angeschlossen ist.

1. Wählen Sie *Instrument - Instrument Settings* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Instrument Settings erscheint.

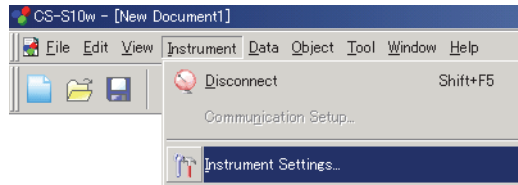


2. Spezifizieren Sie die Einstellungen des Messgeräts.


Nur jene Punkte werden angezeigt, die für das Messgerät spezifiziert werden können.

Nach Eingabe der Einstellungen werden die neuen Einstellungen im Status-Fenster angezeigt.

Details zu den Einstellungen des Messgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.

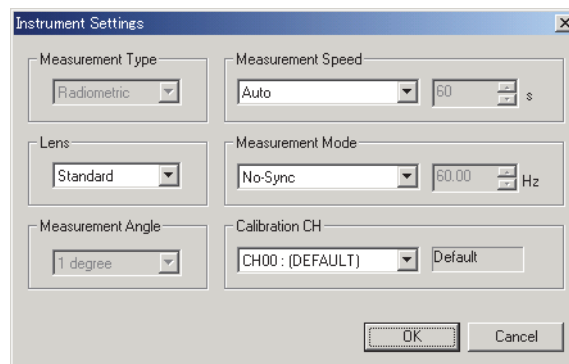

■ Dialogbox Instrument Settings (Wenn das CS-2000/2000A angeschlossen ist)

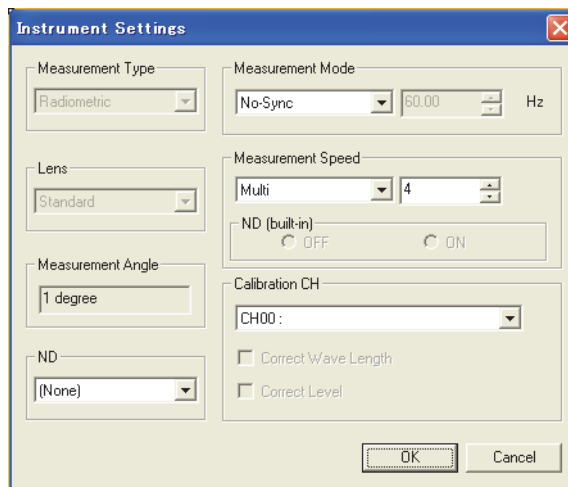

(Beispiel-Fenster, wenn ein CS-2000-Modell angeschlossen ist, dessen ROM-Version älter als 1.10 ist)

Measurement Type

Radiometric wird angezeigt, wenn der Dokumenttyp auf Lichtquellenfarbenmessung eingestellt ist. [Auswahl nicht möglich.]

Ist der Dokumenttyp auf Objektfarbenmessung eingestellt, wählen Sie entweder Reflectance oder Transmittance.

Lens

Wählen Sie entweder Standard oder Close up (Nahbereich). Wählen Sie Close up, wenn Sie das optional erhältliche Nahbereichsobjektiv CS-A35 verwenden. Beim Speichern der Faktoren wird Close up (Nahbereich) dann zu Ihren Einstellungen hinzugefügt.

Measurement Angle

Je nach Messgeräte-Status wird entweder 1°, 0,2° oder 0,1° angezeigt. [Auswahl nicht möglich]

ND

Wählen Sie als Einstellung None (Keiner), ND1/10 oder ND1/100. Wenn Sie den optional erhältlichen ND-Filter CS-A33 (1/10) verwenden, wählen Sie ND1/10. Wenn Sie den optional erhältlichen ND-Filter CS-A34 (1/100) verwenden, wählen Sie ND1/100. Beim Speichern der ND-Korrekturfaktoren für ND1/10 bzw. ND1/100 wird dieser Wert zu Ihren Einstellungen hinzugefügt.

Measurement Mode

Wählen Sie als Einstellung No-Sync (Keine Synchronisation), External (Extern) oder Internal (Intern). Bei der Auswahl von Internal geben Sie im Kästchen rechts einen Wert zwischen 20,00 und 200,00 in Stufen von 0,01 Hz ein.

Measurement Speed

Wenn ein CS-2000-Modell angeschlossen ist, dessen ROM-Version älter als 1.10 ist
Wählen Sie als Einstellung Normal, Fast (Schnell), Multi oder Manual (Manuell). Bei der Auswahl von Multi geben Sie im Kästchen rechts einen Wert zwischen 1 und 16 in Stufen von 1 ein. Bei der Auswahl von Manual geben Sie im Kästchen rechts einen Wert zwischen 0,0050000 und 120,0000 in Stufen von 0,000001 Sekunden ein. Wenn Manual ausgewählt ist, können Sie auch die EIN/AUS-Einstellungen für den eingebauten ND-Filter des CS-2000 anpassen.

Wenn das Modell CS-2000A oder das Modell CS-2000 mit einer ROM-Version gleich oder größer 1.10 angeschlossen ist

Wählen Sie die Einstellung Normal, Fast, Multi (Normal), Multi (Fast) oder Manual aus.

Bei der Auswahl von Multi (Normal) oder Multi (Fast) geben Sie im Kästchen rechts einen Wert zwischen 1 und 16 in Stufen von 1 ein.

Bei der Auswahl von Manual geben Sie im Kästchen rechts einen Wert zwischen 0,0050000 und 120,0000 in Stufen von 0,000001 Sekunden ein.


Sie können auch aus der eingebauten ND-Filtereinstellung des CS-2000A zwischen ON oder OFF wählen, wenn Sie Manual ausgewählt haben, bzw. zwischen ON, OFF oder AUTO, wenn Sie die andere Option ausgewählt haben.

Calibration CH

Die Combo-Box zeigt Kalibrierkanäle in Form einer „CH-Nummer : ID Name“. Wählen Sie einen Kalibrierkanal zwischen CH00 und CH10.

Der Kalibrier-Modus für den ausgewählten Kalibrier-Kanal wird bei den Kontrollkästchen unten angezeigt. Der Kalibrier-Modus wird entweder als Correct Wave Length (Wellenlänge korrigieren) oder als Correct Level (Pegel korrigieren) angezeigt.

■ Dialogbox Instrument Settings (Wenn das CS-200 angeschlossen ist)

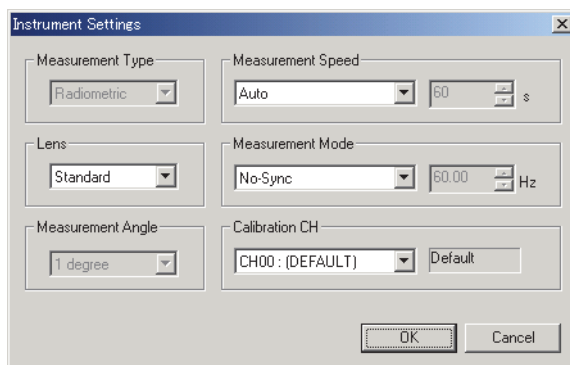

Measurement Type

Radiometric wird angezeigt, wenn der Dokumenttyp auf Lichtquellenfarbenmessung eingestellt ist. [Auswahl nicht möglich.]

Ist der Dokumenttyp auf Objektfarbenmessung eingestellt, wählen Sie entweder Reflectance oder Transmittance.

Lens

Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen: Standard, Close up 1 (No. 107) und Close up 2 (No. 122). Wählen Sie Close up 1 (No. 107), wenn das Nahbereichsobjektiv Nr. 107 (optionales Zubehör) aufgesetzt ist, bzw. Close up 2 (Nr. 122), wenn das Nahbereichsobjektiv Nr. 122 (optionales Zubehör) aufgesetzt ist.

Wird ein zusätzliches Objektiv verwendet, wie etwa ein ND-Filter, und wurde dessen Korrekturfaktor erfasst, werden User 1, User 2 und User 3 zu den Optionen hinzugefügt. Zur Erfassung von Korrekturfaktoren siehe Seite 122.

Measurement Angle

Je nach Messgeräte-Status wird entweder 1°, 0,2° oder 0,1° angezeigt. [Auswahl nicht möglich]

Measurement Speed

Zur Auswahl stehen Auto, LTD. AUTO, S-Fast, Fast, Slow, S-Slow und Manual. Bei der Auswahl von „Manual“ geben Sie im Kästchen rechts einen Wert zwischen 1 und 60 in Schritten von 1 Sekunde ein.


Measurement Mode

Wählen Sie entweder Internal oder No-Synch. Bei der Auswahl von „Internal“ geben Sie im Kästchen rechts einen Wert zwischen 40,00 und 200,00 in Stufen von 0,01 Hz ein.

Calibration CH

Die Combo-Box zeigt Kalibrierkanäle in Form einer „CH-Nummer : ID Name“. Wählen Sie einen Kalibrierkanal zwischen CH00 und CH20.

Der Kalibrier-Modus für den ausgewählten Kalibrier-Kanal wird im Textfeld rechts angezeigt. Als Kalibrier-Modus stehen Default oder Single zur Auswahl.

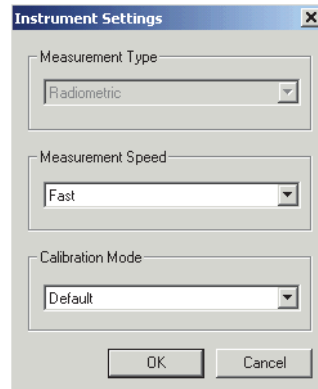■ Dialogbox Instrument Settings (Wenn das CS-100A angeschlossen ist)**Measurement Type**

Wenn der Dokumenttyp auf Lichtquellenfarbenmessung eingestellt ist, wird Radiometric angezeigt. [Auswahl nicht möglich]


Ist der Dokumenttyp auf Objektfarbenmessung eingestellt, wählen Sie entweder Reflectance oder Transmittance.

Measurement Speed

Wählen Sie entweder Fast oder Slow.

Calibration Mode

Wählen Sie entweder Default oder User.

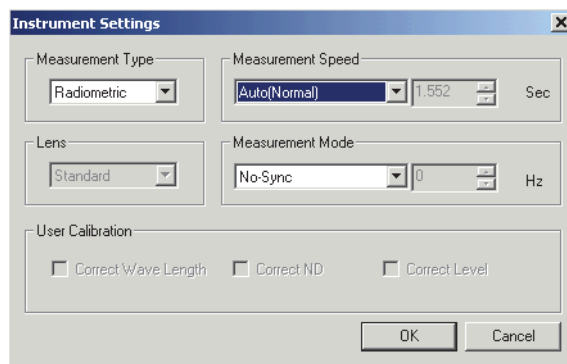■ Dialogbox Instrument Setting (Wenn das CS-1000 angeschlossen ist)**Measurement Type**

Wenn der Dokumenttyp auf Lichtquellenfarbenmessung eingestellt ist, wird Radiometric angezeigt. [Auswahl nicht möglich]

Ist der Dokumenttyp auf Objektfarbenmessung eingestellt, wählen Sie entweder Reflectance oder Transmittance.

Lens

Je nach Status des Messgeräts wird Standard oder Macro angezeigt.
[Auswahl nicht möglich]

Measurement Speed

Wählen Sie als Einstellung Auto (Normal), Auto (Fast) oder Manual. Bei der Auswahl von Manual geben Sie im Kästchen rechts einen Wert (Integralzeit) zwischen 0,040 und 60,000 Sekunden in Schritten von 0,001 Sekunden ein.

Measurement Mode

Wählen Sie als Einstellung Internal, External oder No-Sync. Ist Internal eingestellt, geben Sie im Kästchen rechts einen Wert zwischen 20,00 und 250,00 Hz in Schritten von 0,01 Hz ein.

User Calibration

Wird für das Messgerät ein Koeffizient verwendet, wird das entsprechende Auswahlkästchen aktiviert. Für die Einstellung siehe Seite 112.


2.2 Erstellung einer neuen Datei

Erstellen Sie ein neues Dokument (Datei), um die Messdaten zu speichern. Ein Dokument, das für den in der Dialogbox „Welcome to CS-S10w“ ausgewählten Dokumenttyp geeignet ist, wird erstellt.

2.2.1 Erstellung einer neuen Datei

1. Wählen Sie *File - New* in der Menüleiste.

Ein Listen- und Entwurf-Fenster für den ausgewählten Dokumenttyp wird angezeigt.

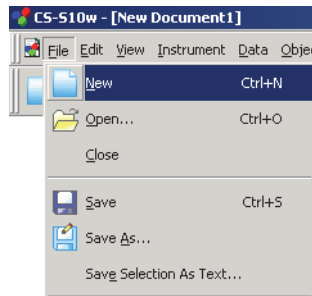


2.3 Vorbereitung für die Messung

2.3.1 Beobachter und Lichtart einstellen


Beobachter und Lichtart sind wichtige Grundeinstellungen für die Berechnung von Farbmessdaten. Damit ein Vergleich zwischen Farbmessdaten verschiedener Proben überhaupt möglich ist, müssen der Beobachter und die Lichtart identisch sein. Es wird empfohlen, den Beobachter und die Lichtart schon vorher festzulegen. Sie sollten später nicht unnötig verändert werden.

1. Wählen Sie *Data - Observer and Illuminant* in der Menüleiste.


Die Dialogbox Observer And Illuminant erscheint.

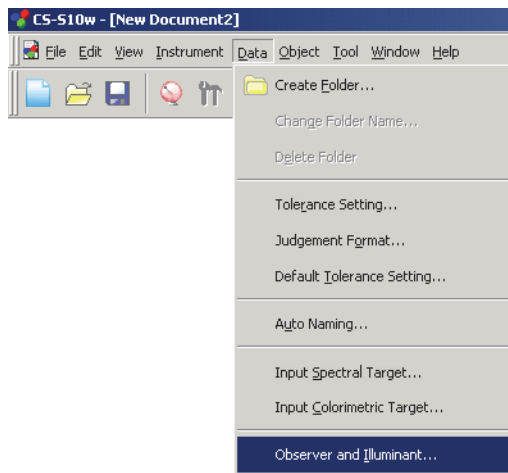

2. Definieren Sie den Beobachter und die Lichtart.

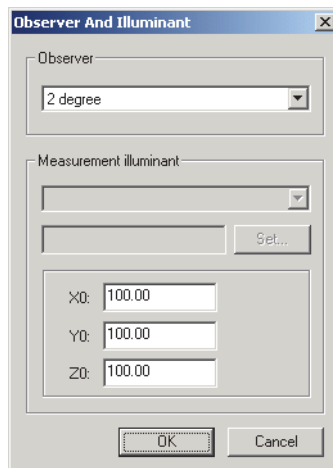

Wenn die Betriebsart
Lichtquellenfarbe ausgewählt
wurde

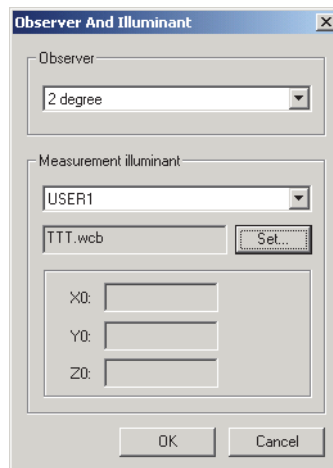

Wenn die Betriebsart
Objektfarbe ausgewählt
wurde

Für jede Dokumentendatei kann nur ein Beobachter- und Lichtartenpaar festgelegt werden. (Für jede Datei kann ein anderes Beobachter- und Lichtartenpaar festgelegt werden.)

Der Weißpunkt (X0, Y0, Z0) in der Betriebsart Lichtquellenfarbe wird in die Einstellungen übernommen. (Das Festlegen des Weißpunktes betrifft auch die Berechnungen anderer Dateien.) Diese Einstellungen betreffen nicht den Beobachter und die Lichtart, die mit dem Messgerät eingestellt wurden.

■ Dialogbox Observer And Illuminant

Observer

Wählen Sie entweder 2 Grad oder 10 Grad aus.

Measurement illuminant

Wenn die Betriebsart Lichtquellenfarbe ausgewählt wurde

Sie können den gewünschten Weißpunkt festlegen, der zur Berechnung von Farbmessdaten verwendet wird.

Der verfügbare Weißpunktbereich umfasst:

X0/Y0/Z0: 0,01 bis 9999900000,00

Wenn die Betriebsart Objektfarbe ausgewählt wurde

Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen:


A, B, C, D50, D55, D65, D75, D95, E, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, User 1, User 2 oder User 3.

Geben Sie bei der Einstellung von User 1, 2 oder 3 die zu verwendende Datei für die Lichtartdaten des Benutzers ein. Durch Klicken auf die Schaltfläche Set wird die Dialogbox Input illuminant data angezeigt.


Die Einstellung in dieser Dialogbox findet Berücksichtigung in allen Daten in der Dokumentendatei.

Wird der Beobachter oder die Lichtart geändert, berechnet die CS-S10w-Software alle Daten neu.

Wenn Sie versuchen, den Beobachter oder die Lichtart zu ändern, erscheint die folgende Meldung.

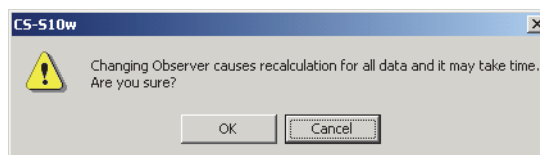

■ Dialogbox Input illuminant data

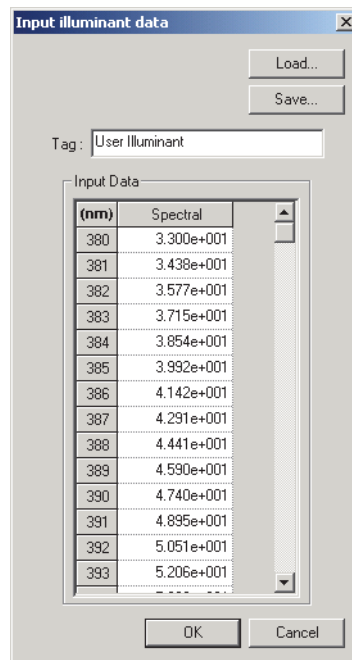

Tag

Eine Markierung mit max. 60 Zeichen kann für die Lichtartdaten eingegeben werden.

Load

Die ausgewählte Datei (Erweiterung: .lrv) wird geladen und erscheint bei den Eingabedaten.
Nachdem die Datei geladen wurde, wird der Name der Datei automatisch im Feld Tag angezeigt.

Save

Die Datei wird je nach ausgewähltem Dateipfad gespeichert. Die Dateierweiterung lautet „.lrv“.


Input Data

Die Spektraldaten werden angezeigt. Sie können die Daten durch direkte manuelle Eingabe der Werte bearbeiten.

2.3.2 Einstellung von Listen Merkmal

Stellen Sie die im Listenfenster dargestellten Positionen, wie etwa Dateinamen oder Farbmessdaten ein, und legen Sie die Reihenfolge fest, in der diese Positionen aufgelistet werden sollen.


1. Wählen Sie *Data - List Items* in der Menüleiste.
Die Dialogbox List Items erscheint.

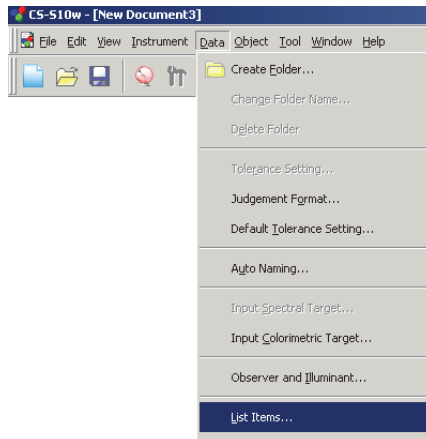

2. Legen Sie die Details der einzelnen im Listenfenster dargestellten Positionen fest.

Diese Symbole zeigen die Gruppen an, nach denen die Listeninhalte klassifiziert werden.

Wählen Sie eine Position im linken Attributfenster und klicken Sie auf die Schaltfläche $\rightarrow$, um diese Position im rechten Feld Selected Items hinzuzufügen.
Um eine Position aus dem Feld Selected Items zu löschen, wählen Sie die jeweilige Position aus und klicken Sie auf die Schaltfläche $\leftarrow$.

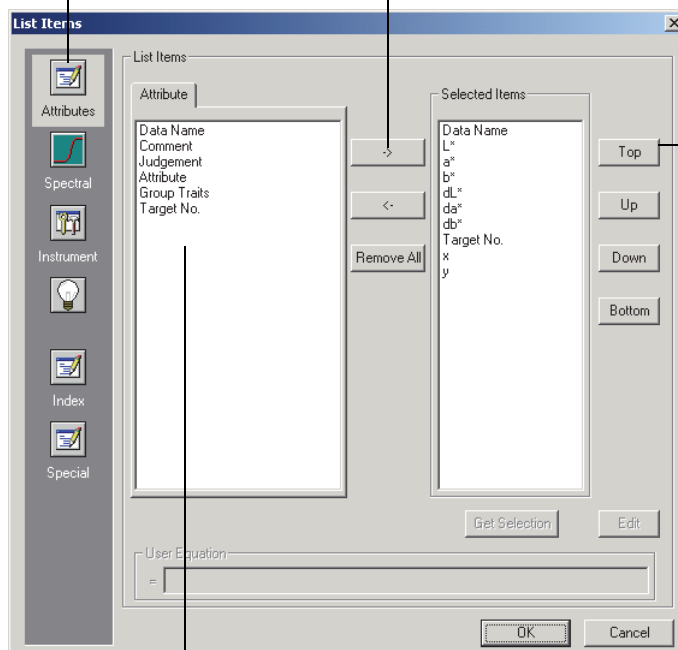


Die Reihenfolge, in der die einzelnen Positionen im Listenfenster angezeigt werden sollen, kann geändert werden. Die Position oben in diesem Fenster wird auf der linken Seite des Listenfensters angezeigt. Um die Reihenfolge zu ändern, wählen Sie die Position im Feld Selected Items und klicken Sie auf die jeweilige Schaltfläche.

Die Listeninhalte, die in dieser durch das Symbol links dargestellten Gruppe enthalten sind, werden angezeigt.

Sobald alle benötigten Positionen festgelegt sind, klicken Sie auf OK.

■ Dialogbox List Items

Die folgende Tabelle enthält die auswählbaren Positionen als Listeninhalte sowie den Inhalt jeder einzelnen in diesem Listenfenster dargestellten Positionen.

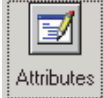		Inhaltsanzeige im Listenfenster
Attributes 	Data Name	Name der Datei
	Comment	Anmerkung
	Judgement	Pass oder Fail (Nur für Proben-Daten verfügbar)
	Attribute	Demonstration colorimetric data / Measured colorimetric data / Manually input colorimetric data / Uploaded colorimetric data / Averaged colorimetric data / Demonstration spectral data / Measured spectral data / Manually input spectral data / Uploaded spectral data / Averaged spectral data
	Group Traits	White / Black / Red / Green / Blue
	Target No.	Nummer des verknüpften Bezugs
	Judgment (Opt1)	OK / NG (Nur für die Messdatenliste)
	Judgment (Opt2)	OK / NG (Nur für die Messdatenliste)
	Judgment (Opt3)	OK / NG (Nur für die Messdatenliste)
	Judgment (Opt4)	OK / NG (Nur für die Messdatenliste)
	Judgment (Opt5)	OK / NG (Nur für die Messdatenliste)

		Inhaltsanzeige im Listenfenster
Spectral Value 		*1 380 bis 780 nm (1 nm-Schritte)

		Inhaltsanzeige im Listenfenster
	Instrument Name	CS-2000 / CS-2000A / CS-200 / CS-100A / CS-1000
	Variation	Standard-Modell (wenn das CS-2000 angeschlossen ist) Niedriges-Modell (wenn das CS-2000A angeschlossen ist) XXXX-XXX (wenn das CS-200 angeschlossen ist) Modell 1 / Modell 2 (wenn das CS-1000 angeschlossen ist)
	Serial No.	Seriennummer des Messgeräts
	Firmware Version	ROM Version des Messgeräts
	Timestamp	Tag und Uhrzeit der Messung
	Measurement Type	Reflectance / Transmittance / Radiometric
	Lens	Standard / Close up (wenn das CS-2000/2000A angeschlossen ist) Standard / Close up 1 (No. 107) / Close up 2 (No. 122) / User 1 / User 2 / User 3 (wenn das CS-200 angeschlossen ist) Standard / Macro / Small measuring diameter / Small measuring angle (wenn das CS-1000 angeschlossen ist)
	Measurement Angle	1° / 0,2° / 0,1° (nur wenn das CS-2000/2000A oder das CS-200 angeschlossen ist)
	Measurement Speed	Normal / Fast / Multi / Manual (Wenn ein CS-2000-Modell angeschlossen ist, dessen ROM-Version älter als 1.10 ist) Normal / Fast / Multi (Normal) / Multi (Fast) / Manual (Wenn das Modell CS-2000A oder das Modell CS-2000 mit einer ROM-Version gleich oder größer 1.10 angeschlossen ist) Auto / LTD. AUTO / S-Fast / Fast / Slow / S-Slow / Manual (wenn das CS-200 angeschlossen ist) Fast / Slow (wenn das CS-100A angeschlossen ist) Auto (Normal) / Auto (Fast) / Manual (wenn das CS-1000 angeschlossen ist) Wird als „Manual xx.x(s)“ angezeigt, wenn „Manual“ angezeigt werden soll. (Wobei „xx.x“ zum Zeitpunkt, an dem der Wert gemessen wurde, die Messgeschwindigkeit in Sekunden angibt.)
	Measurement Mode	No-Sync / External / Internal (wenn das CS-2000/2000A angeschlossen ist) Internal / No Sync (wenn das CS-200 angeschlossen ist) Internal / External / No Sync (wenn das CS-1000 angeschlossen ist) Wird als „Internal xxx.x(Hz)“ angezeigt, wenn „Internal“ angezeigt werden soll. (Wobei „xxx.x“ zum Zeitpunkt, an dem der Wert gemessen wurde, die Synchronisationsfrequenz in Hertz angibt.) Beachten Sie, dass Dezimalzahlen ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Synchronisationsfrequenz zum Zeitpunkt der Messung immer als „00“ angezeigt werden.
	Calibration Channel	00 bis 20 (wenn das CS-200 angeschlossen ist) 00 bis 10 (wenn das CS-2000/2000A angeschlossen ist)
	Calibration Mode	ND / Wavelength / Level / ND + Wavelength / Wavelength + Level / ND + Level / ND + Wavelength + Level (wenn das CS-2000/2000A angeschlossen ist) Konica Minolta Standard / One-point calibration / User (wenn das CS-200 angeschlossen ist) Konica Minolta Standard / User (wenn das CS-100A angeschlossen ist) Wavelength / ND / Level / Wavelength + ND / Wavelength + Level / ND + Level / Wavelength + ND + Level (wenn das CS-1000 angeschlossen ist)
	Observer	2 Grad, 10 Grad
	Lichtart	A/B/C/D ₅₀ /D ₅₅ /D ₆₅ /D ₇₅ /D ₉₅ /E/F ₂ /F ₆ /F ₇ /F ₈ /F ₁₀ /F ₁₁ /F ₁₂
	Integral Time	Integralzeit
	Meas.ID	Mess-ID
	ND [Aufsatz]	None / ND1/10 / ND1/100 (nur wenn das CS-2000/2000A angeschlossen ist)
	ND [eingebaut]	On / Off / Auto (Nur wenn das CS-2000A angeschlossen ist)
	Warnung	Over (brightness) / Over (chromaticity) / Over (brightness + chromaticity) / Under (brightness) / Under (chromaticity) / Under (brightness + chromaticity) / Insufficient exposure

	Wenn die Betriebsart Lichtquellenfarbe ausgewählt wurde			
	Absolute Data	Color Difference	Equation	Others
	X	ΔX	JND	Dominant Wavelength
	Y	ΔY		d [Dominant Wavelength]
	Z	ΔZ		Excitation Purity (%)
*2	L_v	*2 ΔL_v		Peak Wavelength (Maximale Wellenlänge)
		*2 ΔL_v (%)		
		*2 % L_v		T
	x	Δx		Δ_{uv}
	y	Δy		Le
	u'	$\Delta u'$		Scotopic Vision
	v'	$\Delta v'$		Contrast
	L^*	ΔL^*		Square ratio
	a^*	Δa^*		
	b^*	Δb^*		
Wenn die Betriebsart Objektfarbe ausgewählt wurde				
	Absolute Data	Color Difference	Equation	Others
	X	ΔX	ΔE^*_{ab}	Dominant Wavelength
	Y	ΔY		d [Dominant Wavelength]
	Z	ΔZ		Excitation Purity (%)
	x	Δx		Peak Wavelength (Maximale Wellenlänge)
	y	Δy		
	u'	$\Delta u'$		
	v'	$\Delta v'$		
	L^*	ΔL^*		
	a^*	Δa^*		
	b^*	Δb^*		
	C^*	ΔC^*		
	h	ΔH^*		
	u^*	Δu^*		
	v^*	Δv^*		
	L (Hunter)	ΔL (Hunter)		
	a (Hunter)	Δa (Hunter)		
	b (Hunter)	Δb (Hunter)		

Index	Wenn die Betriebsart Lichtquellenfarbe ausgewählt wurde																																																		
	<table> <tr> <th data-bbox="425 202 493 222">Index</th><th data-bbox="823 202 1001 222">Index Difference</th></tr> <tr><td>Ra</td><td></td></tr> <tr><td>R1</td><td></td></tr> <tr><td>R2</td><td></td></tr> <tr><td>R3</td><td></td></tr> <tr><td>R4</td><td></td></tr> <tr><td>R5</td><td></td></tr> <tr><td>R6</td><td></td></tr> <tr><td>R7</td><td></td></tr> <tr><td>R8</td><td></td></tr> <tr><td>R9</td><td></td></tr> <tr><td>R10</td><td></td></tr> <tr><td>R11</td><td></td></tr> <tr><td>R12</td><td></td></tr> <tr><td>R13</td><td></td></tr> <tr><td>R14</td><td></td></tr> <tr><td>R15</td><td></td></tr> <tr><td>MIvis (D50)</td><td></td></tr> <tr><td>MIvis (D50) Grade</td><td></td></tr> <tr><td>MIvis (D55)</td><td></td></tr> <tr><td>MIvis (D55) Grade</td><td></td></tr> <tr><td>MIvis (D65)</td><td></td></tr> <tr><td>MIvis (D65) Grade</td><td></td></tr> <tr><td>MIvis (D75)</td><td></td></tr> <tr><td>MIvis (D75) Grade</td><td></td></tr> </table>	Index	Index Difference	Ra		R1		R2		R3		R4		R5		R6		R7		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14		R15		MIvis (D50)		MIvis (D50) Grade		MIvis (D55)		MIvis (D55) Grade		MIvis (D65)		MIvis (D65) Grade		MIvis (D75)		MIvis (D75) Grade	
Index	Index Difference																																																		
Ra																																																			
R1																																																			
R2																																																			
R3																																																			
R4																																																			
R5																																																			
R6																																																			
R7																																																			
R8																																																			
R9																																																			
R10																																																			
R11																																																			
R12																																																			
R13																																																			
R14																																																			
R15																																																			
MIvis (D50)																																																			
MIvis (D50) Grade																																																			
MIvis (D55)																																																			
MIvis (D55) Grade																																																			
MIvis (D65)																																																			
MIvis (D65) Grade																																																			
MIvis (D75)																																																			
MIvis (D75) Grade																																																			
	Wenn die Betriebsart Objektfarbe ausgewählt wurde <table> <tr> <th data-bbox="425 1043 493 1062">Index</th><th data-bbox="823 1043 1001 1062">Index Difference</th></tr> </table>	Index	Index Difference																																																
Index	Index Difference																																																		


Special	Others
	*3 Benutzerformel 1 *3 Benutzerformel 2 *3 Benutzerformel 3

Die Punkte x , y , u' , v' , Δx , Δy , $\Delta u'$ und $\Delta v'$ werden mit vier Dezimalstellen angezeigt. Andere Farbmessdaten werden mit zwei Dezimalstellen angezeigt.

Die Anzahl an Dezimalstellen kann geändert werden. Für Details siehe Seite 41.

Die CS-S10w-Software verbessert die Rechengenauigkeit, da interne Berechnungen mit größeren Zahlen durchgeführt werden als tatsächlich angezeigt. Durch Rundung oder Farbsystemkonversion kann die am wenigsten signifikante angezeigte Ziffer folglich um eine Ziffer von der am Gerät angezeigten abweichen.

- *1 Werden alle Wellenformen der Spektraldaten ausgewählt, verlangsamt sich die Geschwindigkeit, mit der die Anzeige erfolgt. Es wird daher empfohlen, nur die erforderlichen Wellenformen einzustellen.
- *2 Ist der Beobachter auf 10° eingestellt, gilt für L_v :
 - Für einen Farbwert dargestellt als „-----“.
 - Für Spektraldaten berechnet anhand des Y-Werts für Beobachtereinstellung 2° .
- *3 Wird eine Benutzerformel hinzugefügt, kann die Formel wie folgt festgelegt werden.

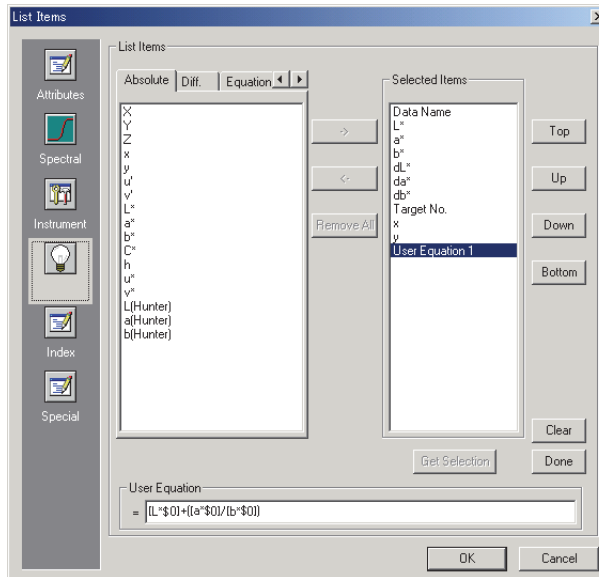

Wählen Sie die in das Feld Selected Items verschobene Benutzerformel und klicken Sie auf die Schaltfläche Edit. Das Eingabefeld User Equation erscheint unter dem Feld.

Die in einer Benutzerformel verwendbaren Farbmessdaten sind oben im Feld Selected Items ersichtlich. Wählen Sie die Position im Feld und klicken Sie auf die Schaltfläche Get Selection.

Beispiel: Für die Eingabe von „ $L + (a/b)$ “

- 1) Wählen Sie „L“ aus dem Feld Selected Items.
- 2) Klicken Sie auf die Schaltfläche Get Selection.
- 3) Geben Sie „+“ ein.
- 4) Geben Sie „(“ ein.
- 5) Wählen Sie „a“ aus dem Feld Selected Items.
- 6) Klicken Sie auf die Schaltfläche Get Selection.
- 7) Geben Sie „/“ ein.
- 8) Wählen Sie „b“ aus dem Feld Selected Items.
- 9) Klicken Sie auf die Schaltfläche Get Selection.
- 10) Geben Sie „)“ ein.

Arbeitsvorgang nach Auswahl von „L“:

[L*\$0] wird im Texteingabefeld angezeigt.

Der Abschnitt zwischen „[“ und “]“ gibt den Listeninhalt an. Werden diese Symbole „[“ gelöscht, kann die CS-S10w-Software den Listeninhalt nicht erkennen. Eine Benutzerformel ohne Listeninhalt ist nicht gültig.

„\$0“ gibt das Gruppenmerkmal der Daten an.

Gruppenmerkmal	Zeichenkette
Keine	\$0
Weiß	\$WT
Schwarz	\$BK
Rot	\$RD
Grün	\$GR
Blau	\$BL

Nach Eingabe der Benutzerformel in das Texteingabefeld klicken Sie auf Done.


Ist die Benutzerformel nicht korrekt, wird die Meldung „Error!“ oder „Cycle!“ angezeigt. Überprüfen Sie in diesem Fall, dass die Benutzerformel korrekt ist, und versuchen Sie es erneut.

2.3.3 Einstellung der Dezimalstellen für die Liste


Für Listeninhalte, die durch Zahlen dargestellt werden, können Dezimalstellen einzeln festgelegt werden.

1. Wählen Sie *Data - Decimal Places* in der Menüleiste.

Die Dialogbox *Decimal Places for List* erscheint.

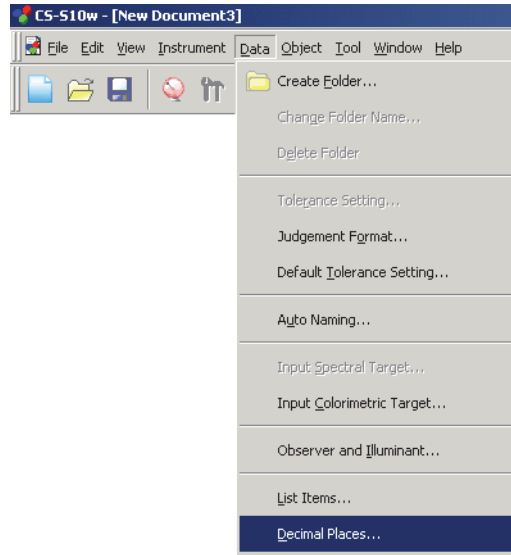

2. Legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen für die anwendbaren Listeninhalte fest.

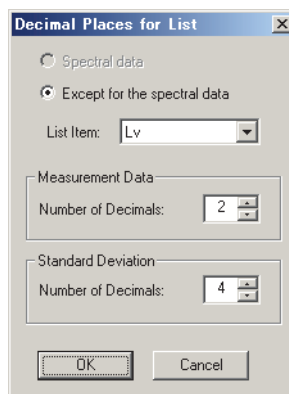


■ Dialogbox *Decimal Places for List*

- Spectral data** Diese Option kann ausgewählt werden, wenn der Spektralwert als Listeninhalt ausgewählt wird.
- Except for the spectral data** Hier kann man zwischen *Spectral data* und *Except for the spectral data* umschalten und die Details für jede Option einstellen.
- List Item** Positionen, die als Listeninhalt festgelegt wurden, werden in der Pull-down-Liste angezeigt. Um die Dezimalstellen für eine Position festzulegen, wählen Sie diese Position aus.
- Measurement Data**
Number of Decimals: Zahlen zwischen 0 und 8 können eingegeben oder ausgewählt werden.
- Standard Deviation**
Number of Decimals: Zahlen zwischen 0 und 8 können eingegeben oder ausgewählt werden.


2.3.4 Einstellung der Messoptionen

1. Wählen Sie *Instrument - Measurement Options* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Instrument Option erscheint.

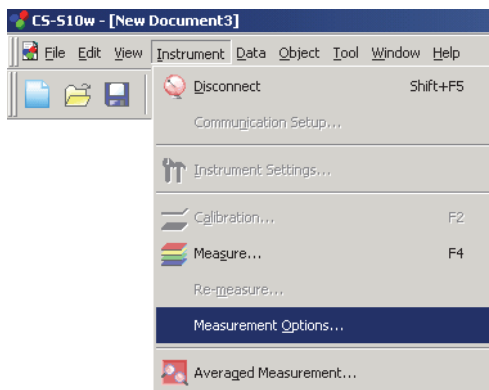

2. Stellen Sie die Parameter für Interval Measurement und Averaging Measurement ein.

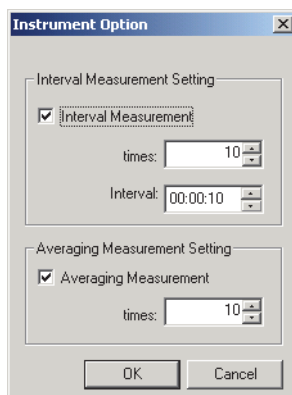

■ Dialogbox Instrument Option

Interval Measurement Setting

Interval Measurement

Ist diese Option ausgewählt, wird eine Intervallmessung durchgeführt. Für Details zur Intervallmessung siehe Seite 46.

times

Die Anzahl an Messungen kann hier eingegeben oder zwischen 2 und 1000 ausgewählt werden.

Interval

Die Intervallzeit kann hier eingegeben oder zwischen 00:00:00 und 12:00:00 in 10-Sekunden-Schritten ausgewählt werden. Setzen Sie den Cursor auf Stunde, Minute und Sekunde und stellen Sie diese Werte einzeln ein.

Averaging Measurement Setting

Averaging Measurement


Ist diese Option ausgewählt, wird eine Mittelwertbildung durchgeführt. Für Details zur Mittelwertbildung siehe Seite 46.

times


Die Anzahl an Messungen kann hier eingegeben oder zwischen 2 und 1000 ausgewählt werden.

2.3.5 Einstellung Automatische Bezeichnung

1. Wählen Sie *Data - Auto Naming* in der Menüleiste.

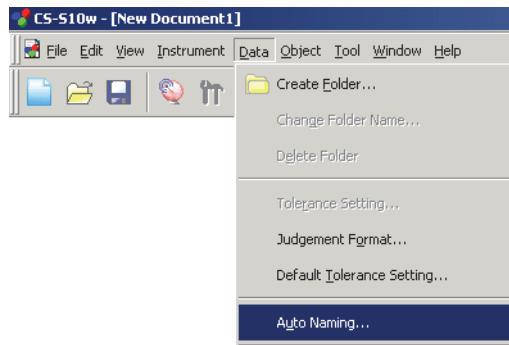

2. Legen Sie hier die Parameter für die automatische Bezeichnung fest.

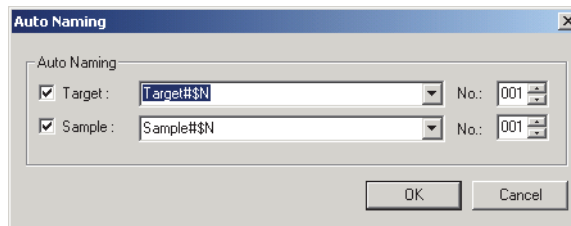

■ Dialogbox Auto Naming

Auto Naming

Target

Wird diese Box aktiviert, wird der Name der Bezugsdaten automatisch während der Messung zugeordnet.

Sample

Wird diese Box aktiviert, wird der Name der Probedaten automatisch während der Messung zugeordnet.

Ist diese Box ausgewählt, werden den Daten während der Messung automatisch Namen zugeordnet. Legen Sie das Format des Namens fest, der automatisch zugeordnet werden soll. Die Zeichenketten in den folgenden Tabellen werden als spezielle Symbole behandelt. Sie werden durch die Zeichenkette für die jeweiligen Daten ersetzt.

Zeichenkette	Entsprechende Daten
\$N	Automatisch erstellte Nummer (Seriennummer), die einer Probe zugeordnet wird. (Als erste Nummer in der Reihe ist eine Zahl zwischen 0 und 999 einstellbar.)
\$D	Tag der Messung
\$M	Monat der Messung
\$Y	Jahr der Messung
\$h	Stunde der Messung
\$m	Minute der Messung
\$s	Sekunde der Messung

Geben Sie eine Kombination dieser Zeichenketten in das Textfeld ein. Bis zu 40 alphanumerische Zeichen können verwendet werden.

Die folgenden zwei Zeichenketten stehen für Probenformate zur Verfügung und können aus einer Pull-down Box ausgewählt werden.

Probe#\$N
\$D/\$M/\$Y-\$h.\$m.\$s

2.4 Messung

Um mit der Messung zu beginnen, verwenden Sie, wie unten dargestellt, eine der verschiedenen verfügbaren Methoden.

Normale Messung:

Lösen Sie mit der CS-S10w-Software eine Messung aus, um Probedaten zu erhalten.

Intervallmessung :

Sobald der Messvorgang von der CS-S10w gestartet wird, wird die Messung abhängig von der voreingestellten Häufigkeit je nach dem vorher eingestellten Zeitintervall wiederholt. Jedes Mal, wenn eine Messung durchgeführt wird, können Sie Probedaten empfangen.

Die Intervallmessung ist nur in Betriebsart Normal bei Punkt Lichtquellenfarbe verfügbar.

Mittelwertmessung:

Starten Sie die CS-S10w-Software einmal, um mit der Messung zu beginnen. Nachdem die festgelegte Anzahl an Messungen durchgeführt wurde, wird für die Ermittlung des Probenwerts aus den gesammelten Daten ein Mittelwert gebildet.

In Betriebsart Normal bei Punkt Lichtquellenfarbe können Sie entweder die Intervallmessung oder die Mittelwertbildung oder beide verwenden.

Berechneter Mittelwert:

Wählen Sie die Betriebsart Berechneter Mittelwert. Wiederholen Sie die Messungen so oft wie gewünscht und beenden Sie diese Betriebsart. Aus den während dieser Zeit gesammelten Probedaten wird für die Ermittlung des Probenwerts ein Mittelwert gebildet. Die manuelle Mittelwertbildung ist jene Funktion, die nur in Betriebsart Normal bei Lichtquellenfarbenmessung bzw. Objektfarbenmessung verfügbar ist.

Messung mittels Taste am Messgerät:

Führen Sie eine Messung durch, indem Sie die Messtaste des Messgeräts drücken. Die CS-S10w-Software empfängt die Probedaten.

Die Messung mittels Messgerätetaste ist nur in Betriebsart Normal bei Punkt Lichtquellenfarbe verfügbar.

Zusätzlich zur Betriebsart Normal ermöglicht die Lichtquellenfarbenmessung verschiedene andere Betriebsarten, um für einen einzelnen Probenwert eine Reihe von Messungen zu kombinieren. Messablauf, Listenmerkmale und Datenverwaltungsmethode hängen von der Betriebsart ab.

Die Betriebsart kann durch Auswahl des Dokumententyps in der Dialogbox Welcome to CS-S10w eingestellt werden.

Kontrast-Modus:

In dieser Betriebsart werden ein weißer und ein schwarzer Punkt gemessen, um so einen einzelnen Probenwert aus zwei Daten zu erhalten. Diese Betriebsart wird verwendet, um den Kontrast der Daten für Weiß auf der Basis von „white Lv/black Lv“ zu berechnen. (Seite 56)

RGB-Modus:

In dieser Betriebsart werden ein roter, grüner und blauer Punkt gemessen, um so einen einzelnen Probenwert aus drei Daten zu erhalten. Diese Betriebsart wird zur Berechnung des Bereichs auf der Farbtafel anhand der Daten für Rot, Grün und Blau verwendet. (Seite 58)

RGB- & Kontrast-Modus:

In dieser Betriebsart werden ein weißer, schwarzer, roter, grüner und blauer Punkt gemessen, um so einen einzelnen Probenwert aus fünf Daten zu erhalten. Diese Betriebsart wird verwendet, um den Kontrast der Daten für Weiß, Rot, Grün und Blau auf der Basis von Daten für Schwarz zu berechnen. Mit ihr wird auch anhand der Daten für Rot, Grün und Blau der Bereich auf der Farbtafel berechnet. (Seite 60)

Die Lichtquellenfarbenmessung ermöglicht wahlweise auch eine Mehrpunktmessung. Diese kann durch Auswahl der Anzahl von Punkten in der Dialogbox Welcome to CS-S10w eingestellt werden.

Mehrpunktmessung ist jenes Messverfahren, bei dem durch sequentielle Messung von Punkten am Messobjekt gleich viele Probedaten wie Punkte ermittelt werden. Farbunterschiede (Ungleichmäßigkeiten) können anhand der gewonnenen Probedaten berechnet werden. (Seite 62)

Beachten Sie, dass die Intervallmessung deaktiviert ist, wenn die Mehrpunkt-Messung ausgewählt wurde.

2.4.1 Durchführung einer Normalen Messung


Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Messgerät angeschlossen ist.

1. Wählen Sie *Instrument - Measure* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Name erscheint.


Wurde Auto-Naming aktiviert, erscheint die Dialogbox Name nicht. Überspringen Sie diesen Vorgang und gehen Sie zu Schritt 3.

Um jedem Probenwert einen Kommentar zuzuweisen, wählen Sie nach der Messung *Data - Data Property* in der Menüleiste und geben Sie den Kommentar in der angezeigten Dialogbox ein. (Siehe Seite 53.)

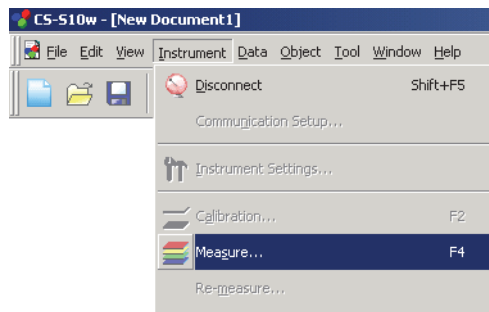


2. Geben Sie für die Datei einen Namen ein.

Sie können für alle einzelnen Probendaten einen Namen und eine Anmerkung zuweisen. Bis zu 64 und 256 alphanumerische Zeichen können für jeden Namen bzw. jeden Kommentar verwendet werden. (Siehe Seite 53.)

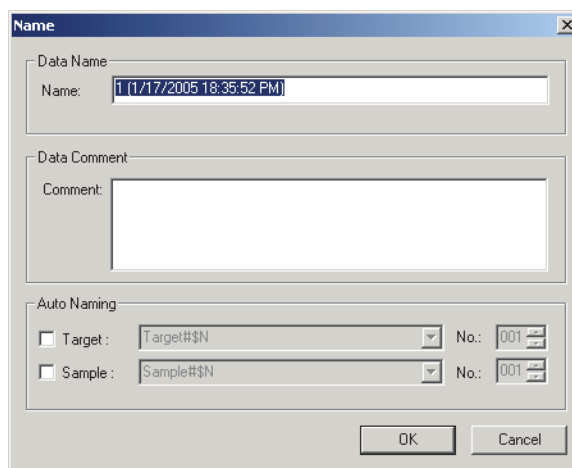

3. Klicken Sie auf OK.

Die Daten werden dem Listenfenster hinzugefügt.

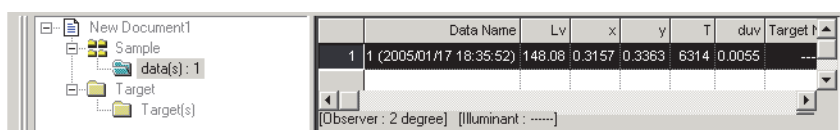


2.4.2 Durchführung einer Intervallmessung/ Mittelwertbildung

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Messgerät angeschlossen ist.


1. Wählen Sie *Instrument - Measurement Options* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Instrument Option erscheint.

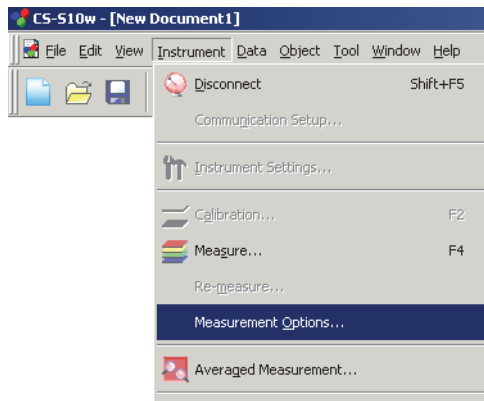

Kreuzen Sie Interval Measurement an, um Details für die Intervallmessung einzustellen.

Kreuzen Sie Averaging Measurement an, um Details für die Mittelwertbildung einzustellen.

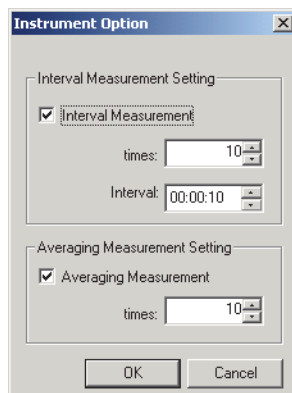

Die Intervallmessung wiederholt die Messung je nach dem Wert, der unter „times“ eingestellt wurde, und dem Zeitintervall, das unter „Interval“ eingestellt wurde. Jedes Mal, wenn eine Messung durchgeführt wird, können Sie Probanddaten empfangen. Ist die Messzeit länger als das Intervall und ist die Messung nicht vor der Startzeit der nächsten Messung abgeschlossen, wird diese übersprungen. In dieser Situation ist die Anzahl der durchgeführten Messungen niedriger als die eingestellte Anzahl der durchzuführenden Messungen.

Die Mittelwertbildung wiederholt die Messung je nach dem Wert, der unter „times“ eingestellt wurde, und berechnet dann den Mittelwert der Probanddaten, um zu einem Ergebnis zu gelangen. Die Intervallmessung ist nur in Betriebsart Normal bei Punkt Lichtquellenfarbe verfügbar. In dieser Betriebsart können Sie entweder die Intervallmessung oder die Mittelwertbildung oder beide verwenden.

■ Dialogbox Instrument Option

Siehe „Dialogbox Instrument Option“ auf Seite 42.

2. Klicken Sie auf OK.
3. Starten Sie die Messung wie auf Seite 45 beschrieben.

Die Dialogbox Measurement erscheint und die Intervallmessung/Mittelwertbildung wird durchgeführt.

Bei der Intervallmessung wird das Ergebnis nach jeder Messung im Listenfenster hinzugefügt. Bei der Mittelwertbildung werden die Daten hinzugefügt, nachdem die Messungen je nach eingestellter Anzahl abgeschlossen wurden.

The screenshot shows the 'Measurement' dialog box with the following settings and status:

- Interval Time: 00:00:10
- Rest of Time: 00:00:09
- Measurement Status: Measuring 1...
- Measurement Times: 0 / 10
- Average Times: 2 / 10
- Measurement Times(s): 0.10
- Buttons: Cancel

The screenshot shows the 'Measurement' dialog box with the following settings and status:

- Interval Time: 00:00:10
- Rest of Time: 00:00:02
- Measurement Status: Waiting for Measurement 2
- Measurement Times: 1 / 10
- Average Times: 0 / 10
- Measurement Times(s):
- Buttons: Cancel


2.4.3 Berechneter Mittelwert

Dieser Vorgang ist nur verfügbar, wenn das Messgerät in Normal Mode bei Lichtquellenfarbenmessung oder Objektfarbenmessung angeschlossen ist.

1. Wählen Sie *Instrument - Averaged Measurement* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Target Averaged Measurement erscheint.


Sie können Averaged Measurement nicht auswählen, wenn Intervallmessung oder Mehrpunkt-Messung eingestellt wurde.

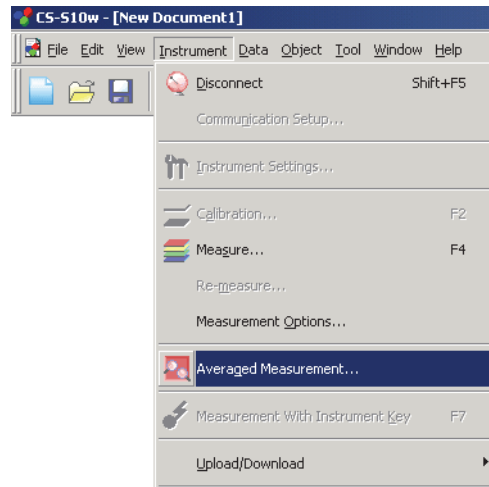

2. Um die Messung so oft wie gewünscht zu wiederholen, klicken Sie wiederholt auf die Schaltfläche Measure.

Der Probenwert wird in der Dialogbox angezeigt.


Die Durchschnitts- und Standardabweichung wird berechnet und für jede Messung angezeigt. Die mit einem Haken markierten Daten werden für die Mittelwertberechnung verwendet. Deaktivieren Sie die Daten, die für die Mittelwertberechnung nicht berücksichtigt werden sollen, wie etwa abnormale Werte.

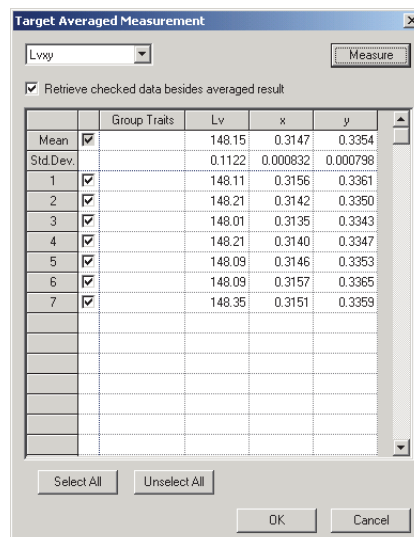

3. Klicken Sie auf OK.

Der Mittelwert wird im Listenfenster als ein Probenwert angefügt.

Die hier durchgeführte Mittelwertberechnung bestimmt zuerst den Mittelwert der XYZ-Daten. Das Ergebnis wird anschließend für die Berechnung der Farbmessdaten verwendet. Andererseits führt die Mittelwertberechnung, welche die auf Seite 84 beschriebenen statistischen Werte verwendet, eine Mittelung der Farbmessdaten aller Datenteile durch, die gemäß der XYZ-Daten individuell berechnet wurden. Daher können die Ergebnisse dieser beiden Berechnungsarten voneinander abweichen.

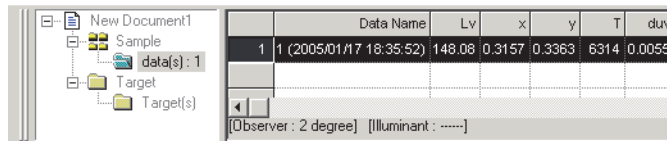

	Data Name	Lv	x	y	T	duv
1	1 (2005/01/17 18:35:52)	148.08	0.3157	0.3363	6314	0.0055

[Observer : 2 degree] [Illuminant : -----]

■ Dialogbox Target Averaged Measurement**Color space drop-down list box**

Wählen Sie das in der Liste darzustellende Farbsystem.

Die auswählbaren Farbsysteme sind: L_vxy , $L_vu'v'$ und XYZ für die Betriebsart Lichtquellenfarbe, bzw. $L^*a^*b^*$, L^*C^*h , Lab und XYZ für die Betriebsart Objektfarbe.

Retrieve checked data besides averaged result

Ist diese Option aktiviert, werden mit einem Haken versehene Daten als einzelner Probenwert an das Listenfenster und an das grafische Objekt im Entwurf-Fenster angefügt.

Select All

Alle Probendaten werden aktiviert und ausgewählt.

Unselect All

Alle Probendaten werden abgewählt.

2.4.4 Messung mittels Taste am Messgerät


Dieser Vorgang ist nur verfügbar, wenn das CS-2000/2000A oder CS-200 in Normal Mode bei Light-source Color angeschlossen ist.

1. Wählen Sie *Instrument - Measurement With Instrument Key* in der Menüleiste.

Wird diese Option aktiviert, kann die Messung mittels Messgeräte-Taste erfolgen. Wird diese Option ausgewählt, kann die Messung entweder mit der Messtaste des Messgeräts oder mit dem Mess-Befehl der CS-S10w-Software ausgelöst werden.

Wenn die Option „Messung mittels Taste am Messgerät“ aktiviert ist, kann nur die Messtaste am Messgerät betätigt werden.

Um die anderen Tasten betätigen zu können, müssen Sie erneut den Befehl *Instrument - Measurement With Instrument Key* aus der Menüleiste auswählen, um den Status „Messung mittels Taste am Messgerät“ zu beenden.

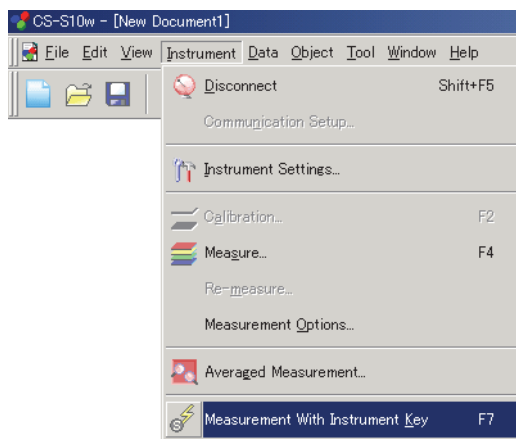


2.4.5 Überspielen der Probanddaten vom Messgerät

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn andere Modelle als das CS-100A angeschlossen sind.

Die im Speicher des Messgeräts gespeicherten Probanddaten können in die CS-S10w-Software geladen werden.

Dieser Vorgang ist nur freigegeben, wenn Betriebsart Normal bei Lichtquellenfarbe ausgewählt wurde.


1. Wählen Sie *Instrument - Upload/Download - Upload Samples* in der Menüleiste.

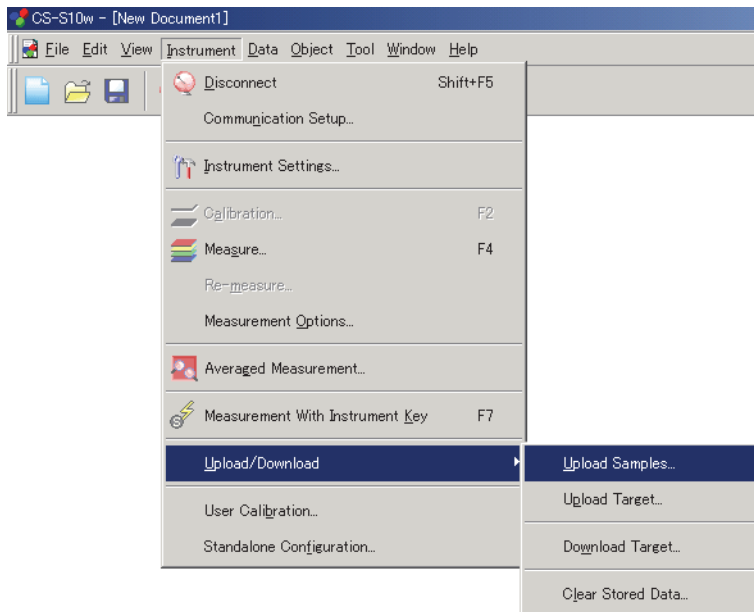

2. Upload beginnt.

Sobald der Upload beendet ist, erscheint die Dialogbox Sample Data to upload. Markierte Daten werden überspielt. Deaktivieren Sie alle nicht benötigten Daten.

Beachten Sie, dass Daten nicht angezeigt werden können, wenn die Einstellung des Beobachters nicht dem gerade bei der CS-S10w-Software eingestellten Wert entspricht.

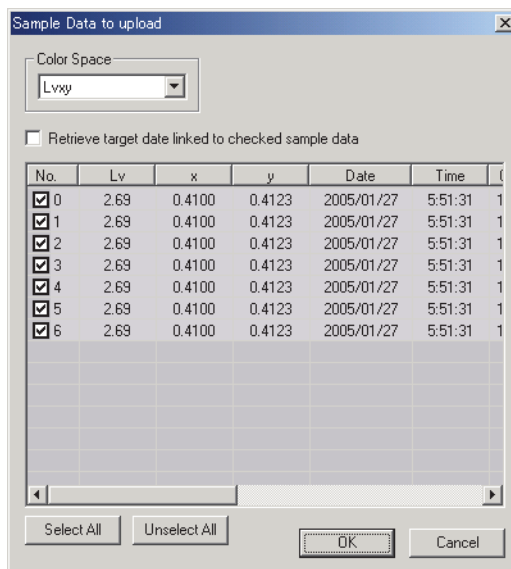

Anzeige der Probanddaten, wenn das CS-200 angeschlossen ist

3. Durch Klicken auf die Schaltfläche OK werden die Daten im Listenfenster hinzugefügt.

■ Dialogbox Sample Data to upload

Select All

Alle Probanden werden aktiviert und ausgewählt.

Unselect All

Alle Probanden werden abgewählt.

Retrieve target data linked to checked sample data (wird nur angezeigt, wenn das CS-200 angeschlossen ist)

Wurde dieses Auswahlkästchen aktiviert, werden die Probanden zusammen mit der Verknüpfung zu den Bezugsdaten im Messgerät überspielt. Die Verknüpfung kann nicht angewandt werden, wenn die Einstellung des Beobachters für Bezugsdaten nicht der Einstellung des Beobachters für Probanden entspricht.


No.	Lv	x	y	Date	Time	
☒ 0	2.69	0.4100	0.4123	2005/01/27	5:51:31	1
☒ 1	2.69	0.4100	0.4123	2005/01/27	5:51:31	1
☒ 2	2.69	0.4100	0.4123	2005/01/27	5:51:31	1
☒ 3	2.69	0.4100	0.4123	2005/01/27	5:51:31	1
☒ 4	2.69	0.4100	0.4123	2005/01/27	5:51:31	1
☒ 5	2.69	0.4100	0.4123	2005/01/27	5:51:31	1
☒ 6	2.69	0.4100	0.4123	2005/01/27	5:51:31	1

Anzeige der Probanden, wenn das CS-200 angeschlossen ist

2.4.6 Anzeige der Dateneigenschaften

Sie können die Eigenschaften der im Listenfenster ausgewählten Daten anzeigen.

1. Wählen Sie die Daten im Listenfenster.
Um die Daten auszuwählen, die aufgelistet werden sollen, siehe Seite 86. Um die Bezugsdaten auszuwählen, gehen Sie zu Target - Target(s) im Baumdiagramm und wählen Sie die Daten in der angezeigten Datengruppe.
2. Wählen Sie *Data -Data Property* in der Menüleiste.
Die Dialogbox Data Property erscheint.

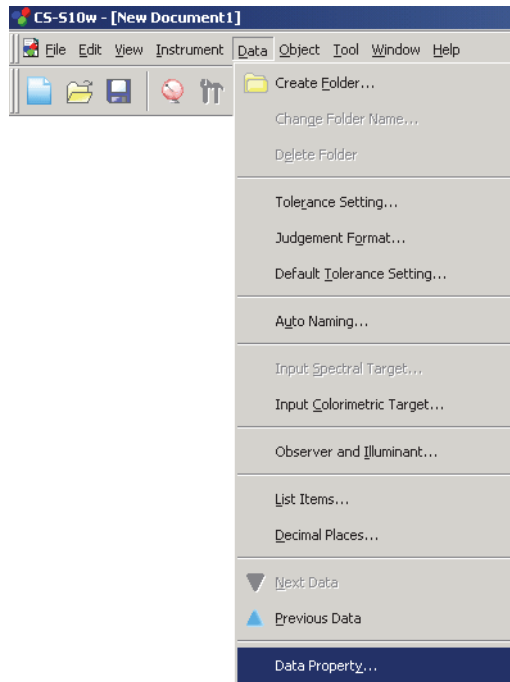

Zusätzlich zur Auswahl über die Menüleiste können Sie Data Property auch auswählen, indem Sie die Daten mit der rechten Maustaste im Listenfenster anklicken und den Befehl aus dem angezeigten Kontextmenü auswählen. Werden zwei oder mehr Daten im Listenfenster ausgewählt, können Sie zwischen den ausgewählten Daten mit den Schaltflächen Previous und Next hin und her wechseln.

3. Legen Sie die Dateneigenschaften wie benötigt fest.

■ Dialogbox Data Property

Die folgenden Eigenschaften können bearbeitet oder geändert werden.

Registerkarte Data

- Name
- Comment


Registerkarte Image

- Bilddatei
- Bildpositionsmarkierung
- Markierungsfarbe

2.4.7 Verknüpfung eines Bilds mit den Daten


1. Klicken Sie auf Browse im Register Image der Dialogbox Data Property. Wählen Sie die Bilddatei direkt in der Dialogbox für die Auswahl der zu öffnenden Datei.

Die ausgewählte Bilddatei wird angezeigt. Sie können eine Datei entweder im JPEG oder BMP-Dateiformat auswählen. Beachten Sie, dass die CS-S10w-Software die Bilddatei selbst nicht speichert, sondern sich nur den Dateipfad merkt. Ändern Sie den Dateinamen oder das Verzeichnis der Bilddatei nicht mit Internet Explorer oder einer anderen Software.

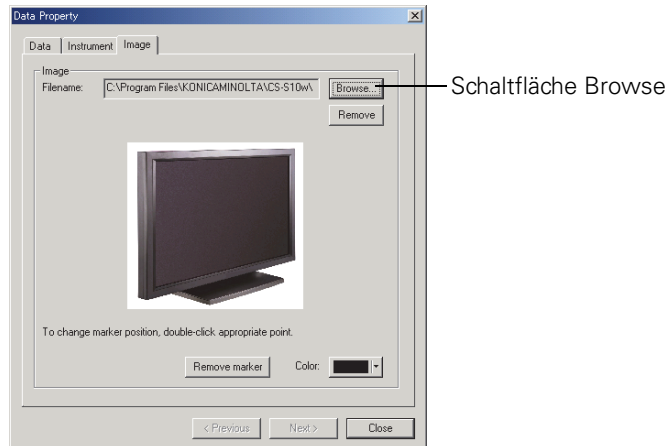

Einstellung einer Positionsmarkierung

Doppelklicken Sie auf die Stelle, an der Sie eine Markierung im Bild anbringen wollen. Eine Markierung erscheint an dieser Stelle. Pro Bild kann nur eine Markierung gesetzt werden. Wollen Sie eine zweite Markierung an einer anderen Stelle setzen, bewegt sich die Markierung zu dieser Stelle. Beachten Sie, dass die CS-S10w-Software nicht wirklich eine Markierung in der Bilddatei einzeichnet, sondern sich lediglich die Position der Markierung merkt.

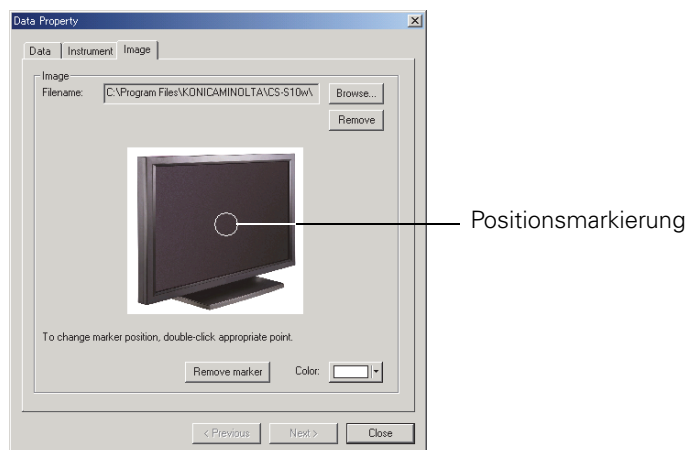

■ Dialogbox Data Property

Remove

Die festgelegte Bildeinstellung wird abgebrochen.

Remove marker

Die Markierung wird aus dem Bild entfernt.

Color

Die Farbe der Markierung kann geändert werden.
Um eine Farbe einzustellen, siehe Seite 108.


2.4.8 Messung in Betriebsart Lichtquellenfarbe - Kontrast

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Messgerät angeschlossen ist.

1. Wählen Sie *Instrument - Measure* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Name erscheint.


Wurde die Automatische Bezeichnung aktiviert, erscheint die Dialogbox Name nicht. Überspringen Sie diesen Vorgang und gehen Sie zu Schritt 3. Um jedem Probenwert einen Kommentar zuzuweisen, wählen Sie nach der Messung *Data - Data Property* in der Menüleiste und geben Sie den Kommentar in der angezeigten Dialogbox ein. (Siehe Seite 53.)

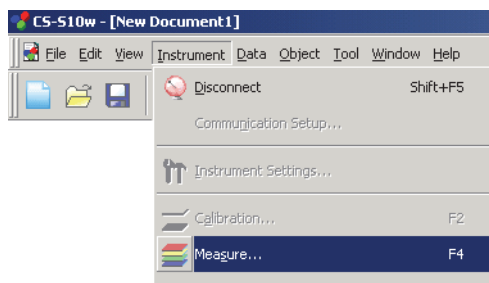

2. Geben Sie für die Datei einen Namen ein.


Sie können für alle einzelnen Probandaten einen Namen und eine Anmerkung zuweisen.

Bis zu 64 und 256 alphanumerische Zeichen können für jeden Namen bzw. jeden Kommentar verwendet werden. (Siehe Seite 53.)

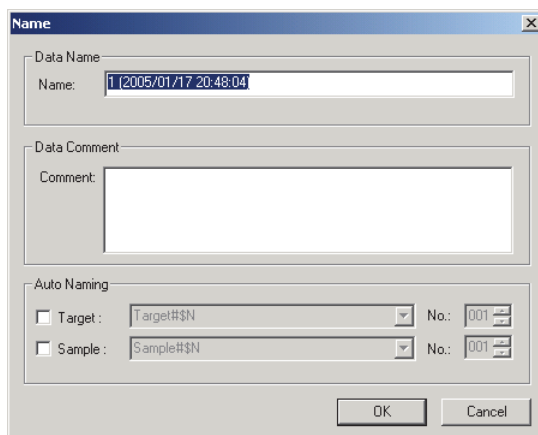

3. Klicken Sie auf OK.

Die Dialogbox Contrast Measurement erscheint.

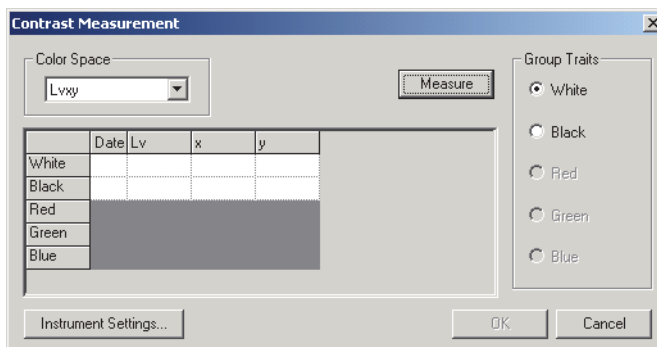

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Measure.

Die Dialogbox Measure erscheint und die Daten werden in der Reihe White in der Datenliste hinzugefügt.

5. Wählen Sie Black aus den Group Traits und klicken Sie auf die Schaltfläche Measure.

Die Dialogbox Measure erscheint und die Daten werden in der Reihe Black in der Datenliste hinzugefügt.

6. Klicken Sie auf OK.

Die Dialogbox Contrast Measurement wird geschlossen und die Daten werden im Listenfenster hinzugefügt.

	Data Name	Group Traits	Lv	x	y	T	duv	Contrast	Target No.	dLv
1	1 (2005/02/15 14:33:52)	White	-----	0.3978	0.3970	-----	-----	14.26	-----	-----
		Black	-----	0.3223	0.2893	-----	-----	1.00	-----	-----

[Observer: 10 degree] [Illuminant:]

■ Dialogbox Contrast Measurement**Instrument Settings**

Wird auf diese Schaltfläche geklickt, erscheint die Dialogbox Instrument Settings und Sie können die Messbedingungen einstellen.

Für Details zur Dialogbox Instrument Settings siehe Seite 28.

Wie bei einer Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Normal können Mittelwertbildung (Seite 46) und Mehrpunkt-Messung (Seite 62) gemeinsam mit der Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Kontrast verwendet werden.

Wurde die Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Kontrast ausgewählt, können Sie später wieder für jede Gruppeneigenschaft eine Messung durchführen. Für Details zur Wiederholung von Messungen siehe Seite 89.

Um von Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Kontrast in eine andere Betriebsart zu wechseln, wählen Sie *View - Welcome to CS-S10w* in der Menüleiste, ändern Sie die Betriebsart und erstellen Sie eine neue Datei. Alternativ dazu können Sie auch eine Datei öffnen, die in der gewünschten Betriebsart erstellt wurde.


2.4.9 Messung in Betriebsart Lichtquellenfarbe - RGB

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Messgerät angeschlossen ist.

1. Wählen Sie *Instrument - Measure* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Name erscheint.


Wurde die Automatische Bezeichnung aktiviert, erscheint die Dialogbox Name nicht. Überspringen Sie diesen Vorgang und gehen Sie zu Schritt 3. Um jedem Probenwert einen Kommentar zuzuweisen, wählen Sie nach der Messung *Data - Data Property* in der Menüleiste und geben Sie den Kommentar in der angezeigten Dialogbox ein. (Siehe Seite 53.)

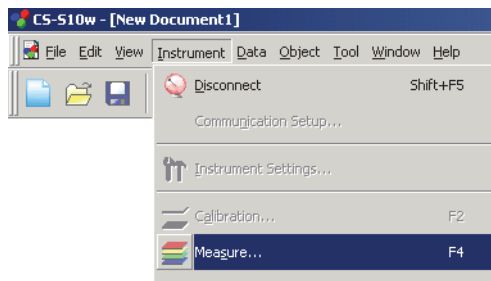

2. Geben Sie für die Datei einen Namen ein.


Sie können für alle einzelnen Probandaten einen Namen und eine Anmerkung zuweisen.

Bis zu 64 und 256 alphanumerische Zeichen können für jeden Namen bzw. jeden Kommentar verwendet werden. (Siehe Seite 53.)

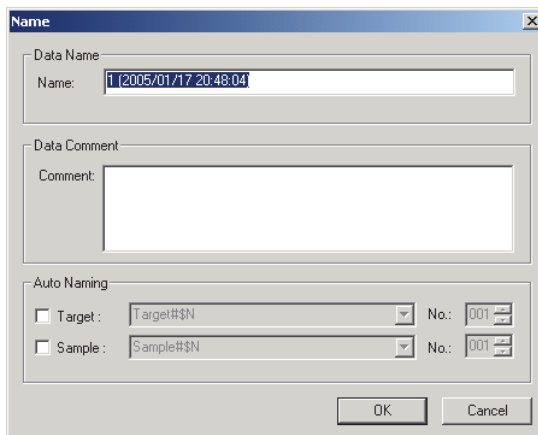

3. Klicken Sie auf OK.

Die Dialogbox RGB Measurement erscheint.

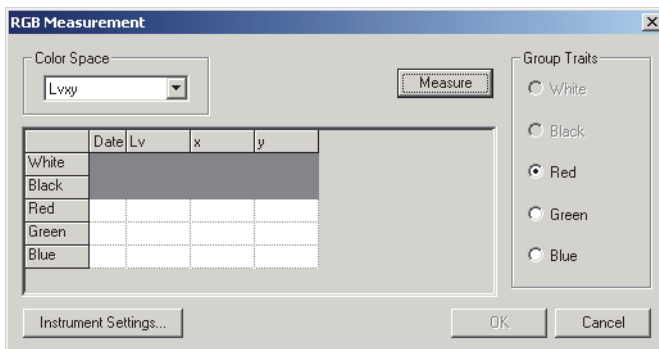

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Measure.

Die Dialogbox Measure erscheint und die Daten werden in der Reihe Red in der Datenliste hinzugefügt.

5. Wählen Sie Green aus den Group Traits und klicken Sie auf die Schaltfläche Measure.

Die Dialogbox Measure erscheint und die Daten werden in der Reihe Green in der Datenliste hinzugefügt.

6. Wählen Sie Blue aus den Group Traits und klicken Sie auf die Schaltfläche Measure.

Die Dialogbox Measure erscheint und die Daten werden in der Reihe Blue in der Datenliste hinzugefügt.

7. Klicken Sie auf OK.

Die Dialogbox Measurement RGB wird geschlossen und die Daten werden im Listenfenster hinzugefügt.

Data Name	Group Traits	Lv	x	y	T	duv	Square ratio	Target No.	dLv	dx	dy	Li
1	Red	0.5536	0.4162									
2005/02/1	Green	0.3902	0.5107									
5 14:38:53	Blue	0.3496	0.3910									

[Observer : 10 degree] [Illuminant : ...]

■ Dialogbox RGB Measurement**Instrument Settings**

Wird auf diese Schaltfläche geklickt, erscheint die Dialogbox Instrument Settings und Sie können die Messbedingungen einstellen.

Für Details zur Dialogbox Instrument Settings siehe Seite 28.

Wie bei einer Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Normal können Mittelwertbildung (Seite 46) und Mehrpunkt-Messung (Seite 62) gemeinsam mit der Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB verwendet werden.

Wurde die Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB ausgewählt, können Sie später wieder für jede Gruppeneigenschaft eine Messung durchführen. Für Details zur Wiederholung von Messungen siehe Seite 89.

Um von Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB in eine andere Betriebsart zu wechseln, wählen Sie *View - Welcome to CS-S10w* in der Menüleiste, ändern Sie die Betriebsart und erstellen Sie eine neue Datei. Alternativ dazu können Sie auch eine Datei öffnen, die in der gewünschten Betriebsart erstellt wurde.


2.4.10 Messung in Betriebsart Lichtquellenfarbe – RGB & Kontrast

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Messgerät angeschlossen ist.

1. Wählen Sie *Instrument - Measure* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Name erscheint.


Wurde die Automatische Bezeichnung aktiviert, erscheint die Dialogbox Name nicht. Überspringen Sie diesen Vorgang und gehen Sie zu Schritt 3. Um jedem Probenwert einen Kommentar zuzuweisen, wählen Sie nach der Messung *Data - Data Property* in der Menüleiste und geben Sie den Kommentar in der angezeigten Dialogbox ein. (Siehe Seite 53.)

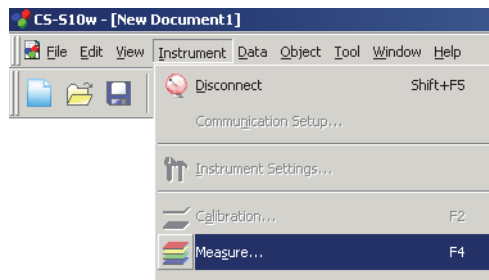

2. Geben Sie für die Datei einen Namen ein.


Sie können für alle einzelnen Probendaten einen Namen und eine Anmerkung zuweisen.

Bis zu 64 und 256 alphanumerische Zeichen können für jeden Namen bzw. jeden Kommentar verwendet werden. (Siehe Seite 53.)

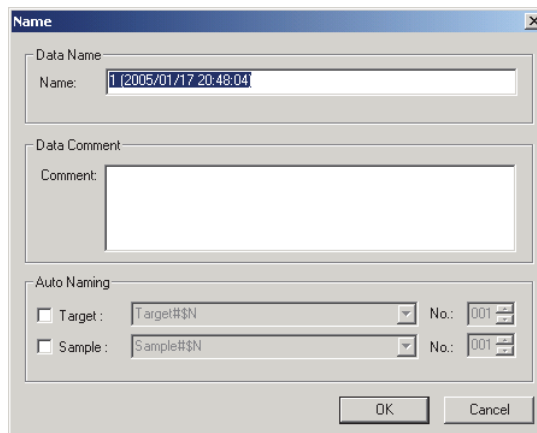


3. Klicken Sie auf OK.

Die Dialogbox RGB&Contrast Measurement erscheint.

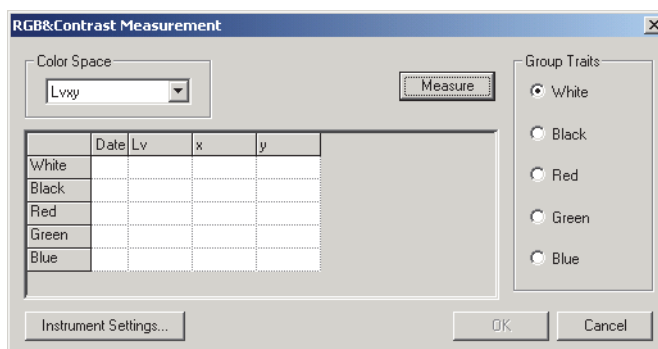

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Measure.
Die Dialogbox Measure erscheint und die Daten werden in der Reihe White in der Datenliste hinzugefügt.
5. Wählen Sie Black aus den Group Traits und klicken Sie auf die Schaltfläche Measure.
Die Dialogbox Measure erscheint und die Daten werden in der Reihe Black in der Datenliste hinzugefügt.
6. Wählen Sie Red aus den Group Traits und klicken Sie auf die Schaltfläche Measure.
Die Dialogbox Measure erscheint und die Daten werden in der Reihe Red in der Datenliste hinzugefügt.
7. Wählen Sie Green aus den Group Traits und klicken Sie auf die Schaltfläche Measure.
Die Dialogbox Measure erscheint und die Daten werden in der Reihe Green in der Datenliste hinzugefügt.
8. Wählen Sie Blue aus den Group Traits und klicken Sie auf die Schaltfläche Measure.
Die Dialogbox Measure erscheint und die Daten werden in der Reihe Blue in der Datenliste hinzugefügt.
9. Klicken Sie auf OK.
Die Dialogbox RGB&Contrast Measurement wird geschlossen und die Daten werden im Listenfenster hinzugefügt.

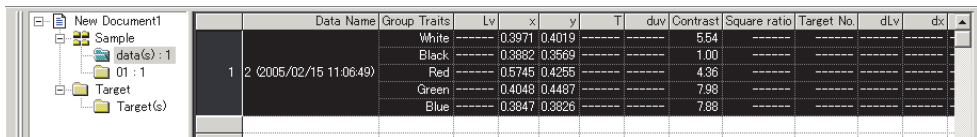

	Data Name	Group Traits	Lv	x	y	T	dlv	Contrast	Square ratio	Target No.	dLv	dx
1 2 (2005/02/15 11:06:49)		White	-----	0.3971	0.4019			5.54	-----			
		Black	-----	0.3882	0.3569			1.00	-----			
		Red	-----	0.5745	0.4255			4.36	-----			
		Green	-----	0.4048	0.4487			7.98	-----			
		Blue	-----	0.3847	0.3826			7.88	-----			

■ Dialogbox RGB & Contrast Measurement

Instrument Setting

Wird auf diese Schaltfläche geklickt, erscheint die Dialogbox Instrument Settings und Sie können die Messbedingungen einstellen.

Für Details zur Dialogbox Instrument Settings siehe Seite 28.

Wie bei einer Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Normal können Mittelwertbildung (Seite 46) und Mehrpunkt-Messung (Seite 62) gemeinsam mit der Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast verwendet werden.


Wurde die Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast ausgewählt, können Sie später wieder für jede Gruppeneigenschaft eine Messung durchführen. Für Details zur Wiederholung von Messungen siehe Seite 89.

Um von Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast in eine andere Betriebsart zu wechseln, wählen Sie *View - Welcome to CS-S10w* in der Menüleiste, ändern Sie die Betriebsart und erstellen Sie eine neue Datei. Alternativ dazu können Sie auch eine Datei öffnen, die in der gewünschten Betriebsart erstellt wurde.


2.4.11 Mehrpunkt-Messung

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Messgerät angeschlossen ist.

1. Wählen Sie *Instrument - Measure* in der Menüleiste.

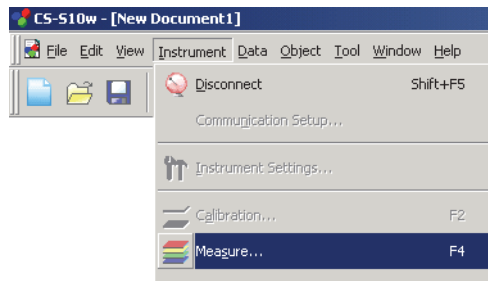

Die Dialogbox Multi-Point Measurement erscheint.

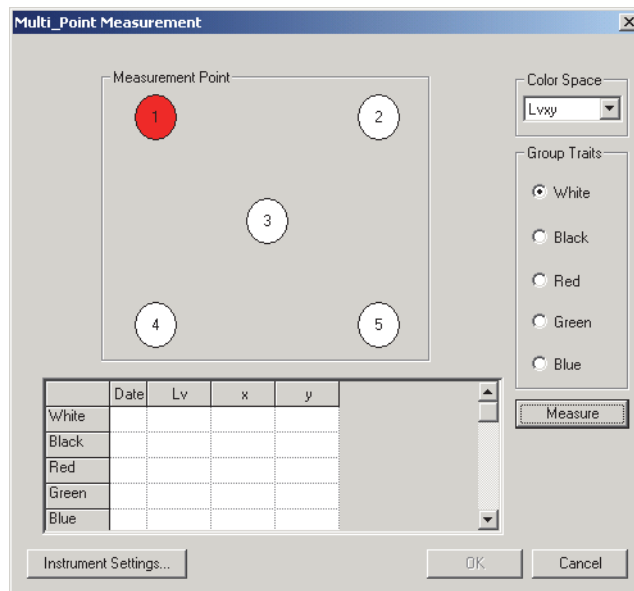

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Measure.

Die Dialogbox Measure erscheint und die Farbe von Measurement Point 1 wechselt bei Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Normal auf Grün bzw. bei anderen Betriebsarten auf Gelb. Die Farbe von Measurement Point 2 wechselt auf Rot.

3. Wiederholen Sie Schritt 2 je nach Anzahl der erforderlichen Punkte.

Bei Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Normal wechseln alle Messpunkte bis auf Measurement Point 1 auf Grün bzw. bei anderen Betriebsarten auf Gelb. Die Daten werden in der Reihe White in den jeweiligen Betriebsarten der Datenliste hinzugefügt.

4. Wählen Sie bei allen Mess-Betriebsarten außer Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Normal aus Group Traits die nächste Einstellung aus und wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für alle Gruppeneigenschaften.

Die Daten werden in der entsprechenden Reihe in der Datenliste hinzugefügt.

Bei allen Gruppeneigenschaften wechselt die Farbe des Messpunktes, für den eine Messung durchgeführt worden ist, auf Grün.

5. Klicken Sie auf OK.

Die Dialogbox Multi-Point Measurement wird geschlossen und die Anzahl der Messpunkte mit den entsprechenden Datenteilen werden im Listenfenster hinzugefügt.

Bei der Mehrpunkt-Messung werden Datennamen automatisch im Format „(Dateiname)_P(Punkt Nr.)“ erstellt.

[illegible]

■ Dialogbox Multi-Point Measurement

Measurement Point

Die Farben der Messpunkte haben die folgende Bedeutung:

Red

Aktiver Messpunkt

White

Dieser Punkt wird noch nicht gemessen.

Yellow

Die Messung wurde für eine oder mehrere Gruppeneigenschaften abgeschlossen.

Green

Die Messung wurde für alle Gruppeneigenschaften abgeschlossen.

Instrument Settings

Wird auf diese Schaltfläche geklickt, erscheint die Dialogbox Instrument Settings und Sie können die Messbedingungen einstellen.

Für Details zur Dialogbox Instrument Settings siehe Seite 28.

Um von Mehrpunkt-Messung in eine andere Betriebsart zu wechseln, wählen Sie *View - Welcome to CS-S10w* in der Menüleiste, ändern Sie die Betriebsart und erstellen Sie eine neue Datei. Alternativ dazu können Sie auch eine Datei öffnen, die in der gewünschten Betriebsart erstellt wurde.

2.5 Festlegung der Bezugsdaten/ Toleranz

2.5.1 Eintragen von Bezugsdaten

Tragen Sie die für die Farbdifferenzmessung verwendeten Bezugsdaten ein. Werden nur Absolutwerte gemessen, ist eine Eintragung der Bezugsdaten nicht notwendig.

Die verschiedenen, für die Eintragung von Bezugsdaten verfügbaren Methoden sind im Folgenden dargestellt:

Wurde Mehrpunkt-Messung ausgewählt, ist die Erfassung nur durch manuelle Dateneingabe verfügbar.

■ **Eintragung von Bezugsdaten mittels Durchführung einer Messung**

Führen Sie eine Messung durch, um Probendaten als Bezugsdaten zu erhalten.

■ **Manuelle Dateneingabe**

Geben Sie Daten aus dem bestehenden Datenblatt manuell ein und verwenden Sie diese als Bezugsdaten.

■ **Überspielen der Daten vom Messgerät**

Überspielen Sie die im Speicher des Messgeräts gespeicherten Bezugsdaten in die CS-S10w-Software.


■ **Bezugsdaten von den bestehenden Daten kopieren**

Kopieren Sie Proben- oder Bezugsdaten in dieselbe oder in eine andere Dokumentendatei und verwenden Sie diese als Bezugsdaten.

2.5.1-a Durchführung einer Bezugsmessung

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Messgerät an den Computer angeschlossen ist.

1. Wählen Sie *Target - Target(s)* im Baumdiagramm im Listenfenster.

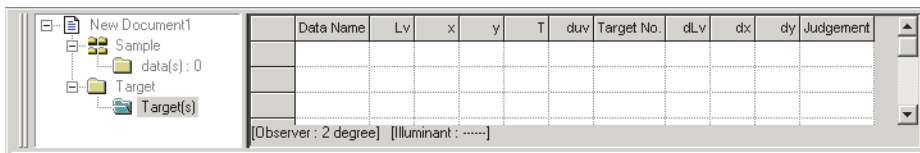

2. Führen Sie eine Messung durch.


Für Details zur Messmethode, siehe Seite 44.

2.5.1-b Eintragen des Bezugs durch Manuelle Dateneingabe

Eingabe von Spektraldaten

1. Wählen Sie *Data - Input Spectral Target* in der Menüleiste.


Die Dialogbox Input Spectral Target erscheint.

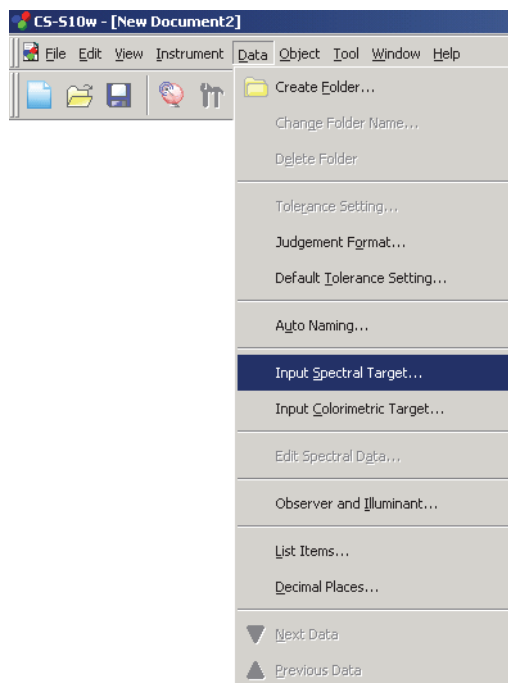

2. Geben Sie die Spektraldaten ein.

Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Kontrast eingestellt, wählen Sie White oder Black als Gruppeneigenschaft. Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB eingestellt, wählen Sie Red, Green oder Blue als Gruppeneigenschaft. Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast eingestellt, wählen Sie White, Black, Red, Green oder Blue als Gruppeneigenschaft. Geben Sie dann die Spektraldaten für jede Farbe ein.

Anstatt die Daten manuell einzugeben, können Sie diese auch über eine Datendatei laden.

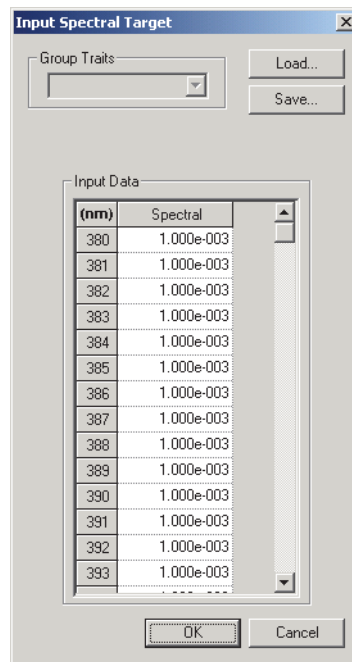

3. Klicken Sie auf OK.

Die Dialogbox Name erscheint.


Wurde Auto-naming aktiviert, erscheint die Dialogbox Name nicht. Überspringen Sie diesen Vorgang und gehen Sie zu Schritt 5.

Um einen Kommentar zuzuweisen, wählen Sie nach der Eintragung *Data - Data Property* in der Menüleiste und geben Sie den Kommentar in der angezeigten Dialogbox ein. (Siehe Seite 53.)

4. Geben Sie den Namen der Datei ein.

Sie können für alle einzelnen Daten einen Namen und eine Anmerkung zuweisen.

Bis zu 64 und 256 alphanumerische Zeichen können für einen Namen bzw. einen Kommentar verwendet werden. (Siehe Seite 53.)

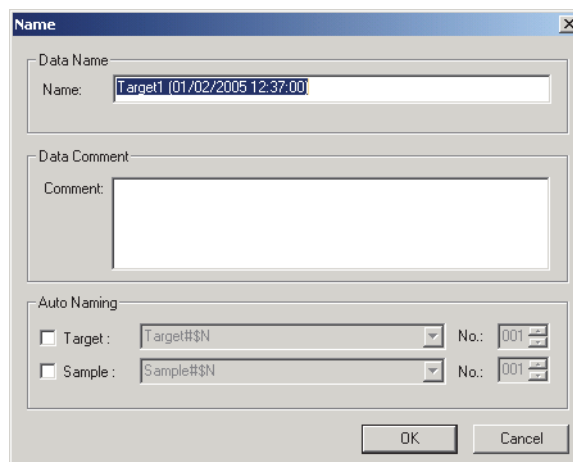

5. Die Datei wird im Listenfenster angefügt.

[illegible]

■ Dialogbox Input Spectral Target

Input Spectral Target [X]

Group Traits: [Dropdown Menu]

[Load...]

[Save...]

Input Data

(nm)	Spectral
380	1.000e-003
381	1.000e-003
382	1.000e-003
383	1.000e-003
384	1.000e-003
385	1.000e-003
386	1.000e-003
387	1.000e-003
388	1.000e-003
389	1.000e-003
390	1.000e-003
391	1.000e-003
392	1.000e-003
393	1.000e-003

[OK] [Cancel]

Load

Die ausgewählte Datei (mit der Erweiterung „Irv“ bei Betriebsart Lichtquellenfarbe und „wcb“ bei Betriebsart Objektfarbe) wird geladen und erscheint bei den Eingabedaten.

Save

Die Datei wird je nach ausgewähltem Dateipfad gespeichert. Die Dateierweiterung bei Betriebsart Lichtquellenfarbe lautet „.lrv“ bzw. „.wcb“ bei Betriebsart Objektfarbe.


Input Data

Die Spektraldaten werden angezeigt. Sie können die Daten durch direkte manuelle Eingabe der Werte bearbeiten.

Eingabe von Farbmessdaten


1. Wählen Sie *Data - Input Colorimetric Target* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Input Colorimetric Target erscheint.

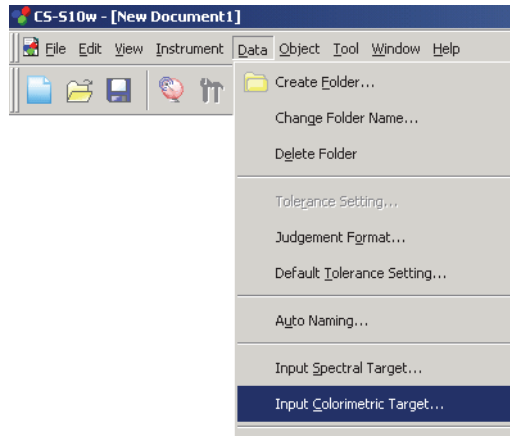

2. Wählen Sie das Farbsystem und geben Sie die Farbmessdaten ein.

Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Kontrast eingestellt, wählen Sie White oder Black als Gruppeneigenschaft. Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB eingestellt, wählen Sie Red, Green oder Blue als Gruppeneigenschaft. Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast eingestellt, wählen Sie White, Black, Red, Green oder Blue als Gruppeneigenschaft. Geben Sie dann die Farbmessdaten für jede Farbe ein.

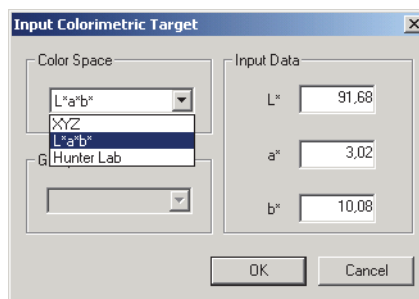

3. Klicken Sie auf OK.

Die Dialogbox Name erscheint.

Wurde Auto-naming aktiviert, erscheint die Dialogbox Name nicht. Überspringen Sie diesen Vorgang und gehen Sie zu Schritt 5.

Um einen Kommentar zuzuweisen, wählen Sie nach der Eintragung *Data - Data Property* in der Menüleiste und geben Sie den Kommentar in der angezeigten Dialogbox ein. (Siehe Seite 53.)

4. Geben Sie den Namen der Datei ein.

Sie können für alle einzelnen Daten einen Namen und eine Anmerkung zuweisen. Bis zu 64 und 256 alphanumerische Zeichen können für einen Namen bzw. einen Kommentar verwendet werden. (Siehe Seite 53.)

Name

Data Name

Name: Target1 [01/02/2005 12:37:00]

Data Comment

Comment:

Auto Naming

☒ Target : Target#\$\$N No.: 001

☐ Sample : Sample#\$\$N No.: 001

OK Cancel

5. Die Datei wird im Listenfenster angefügt.

[illegible]

■ Dialogbox Input Colorimetric Target

Input Colorimetric Target

Color Space: Lxy

Group Traits:

Input Data:

Lv: 80.00

x: 0.3333

y: 0.3333

OK Cancel

Color Space

Stellen Sie den für die manuelle Eingabe verwendeten Farbraum ein. Die verfügbaren Farbräume sind XYZ, L_vx_y und L_vu_v' für Betriebsart Lichtquellenfarbe, bzw. XYZ, L^a*b* und Lab (Hunter) für Betriebsart Objektfarbe.

Input Data

Geben Sie die von Ihnen ausgewählten Farbmessdaten ein.


2.5.1-c Überspielen der Bezugsdaten vom Messgerät

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn andere Modelle als das CS-100A angeschlossen sind.

Die im Speicher des Messgeräts gespeicherten Bezugsdaten können in die CS-S10w-Software geladen werden.

Dieser Vorgang ist nur freigegeben, wenn Betriebsart Normal bei Lichtquellenfarbe ausgewählt wurde.


1. Wählen Sie *Instrument - Upload/Download - Upload Target* in der Menüleiste.

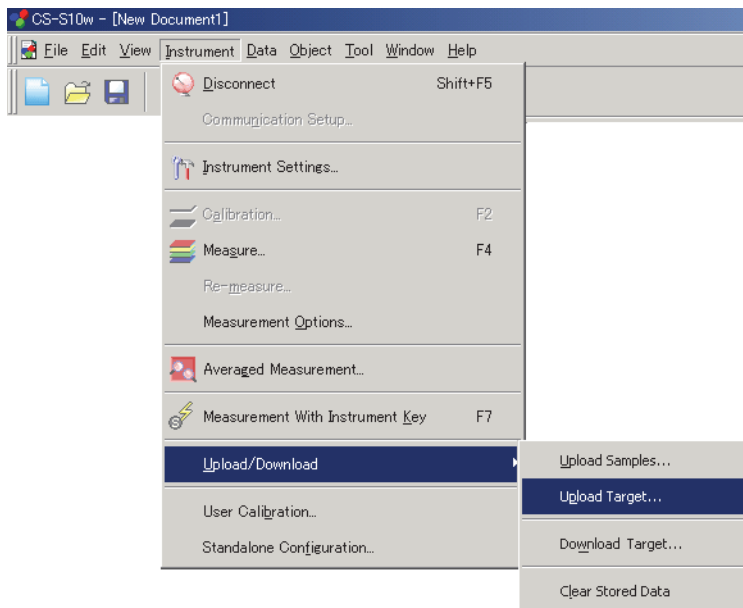


2. Upload beginnt.

Die Dialogbox Target Data to upload erscheint. Markierte Daten werden überspielt. Deaktivieren Sie Daten, die Sie nicht benötigen.


Beachten Sie, dass Daten nicht angezeigt werden können, wenn die Einstellung des Beobachters nicht dem gerade bei der CS-S10w-Software eingestellten Wert entspricht.

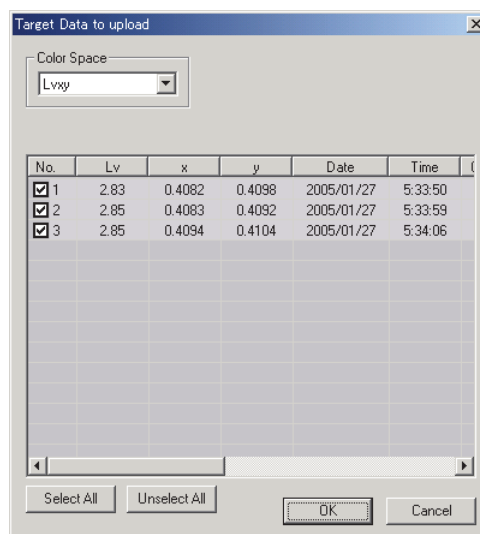

3. Klicken Sie auf OK, um mit dem Upload zu beginnen.

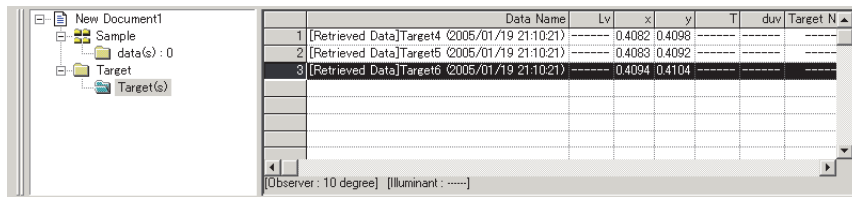

■ Dialogbox Target Data to upload

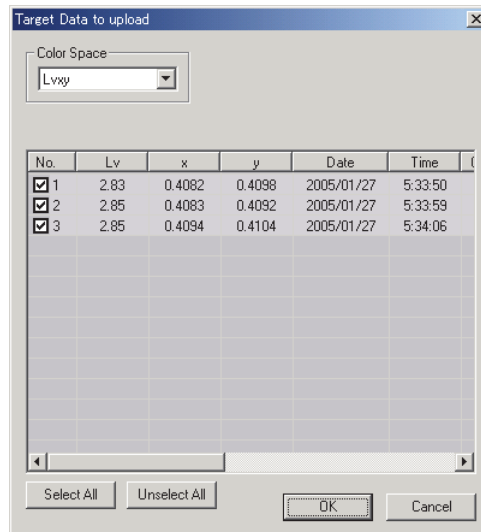

Select All

Alle Probendaten-Kästchen werden ausgewählt.

Unselect All

Aus allen Probendaten-Kästchen wird das Auswahlhäkchen entfernt.

2.5.1-d Bezugsdaten von den bestehenden Daten kopieren

Mehr Informationen über Kopieren und Einfügen finden Sie auf Seite 86.

Sie können Proben- oder Bezugsdaten in dieselbe oder in eine andere Dokumentendatei kopieren und diese als Bezugsdaten verwenden.


2.5.2 Festlegung der Bezugsdaten

Legen Sie die Bezugsdaten für Farbdifferenzmessung aus den in der Dokumentendatei gespeicherten Bezugsdaten fest. Werden nur Absolutwerte gemessen, ist eine Definition der Bezugsdaten nicht notwendig.

2.5.2-a Erstellen eines Bezug-Ordners


1. Wählen Sie *Data - Create Folder* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Folder Name erscheint.

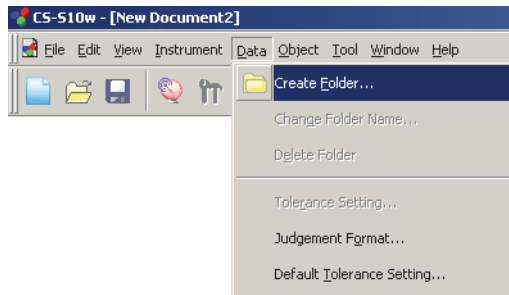

2. Geben Sie den gewünschten Ordner-Namen ein.

Sie können keinen bereits vergebenen Ordner-Namen verwenden. Bis zu 64 Zeichen können für einen Ordner-Namen verwendet werden.

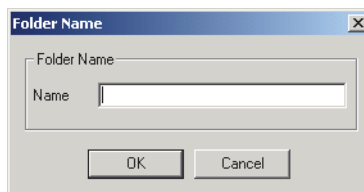

3. Klicken Sie auf OK.

Der Ordner wird im Listenfenster angefügt.

Der Ordner kann gelöscht oder umbenannt werden.


Der Ordner Data(s) unter Sample ist standardmäßig vorgesehen. Sie können keinen Bezug mit dem Ordner verknüpfen. Auch können Sie den Ordner weder löschen noch umbenennen.

4. Speichern Sie die Daten in dem erstellten Ordner.

Führen Sie die Messung durch, während der Ordner ausgewählt wird. Oder verschieben Sie Probanddaten von der Dokumentendatei in den Ordner.

5. Wählen Sie *Tool - Change Target* in der Menüleiste.


Die Dialogbox Change Target erscheint.

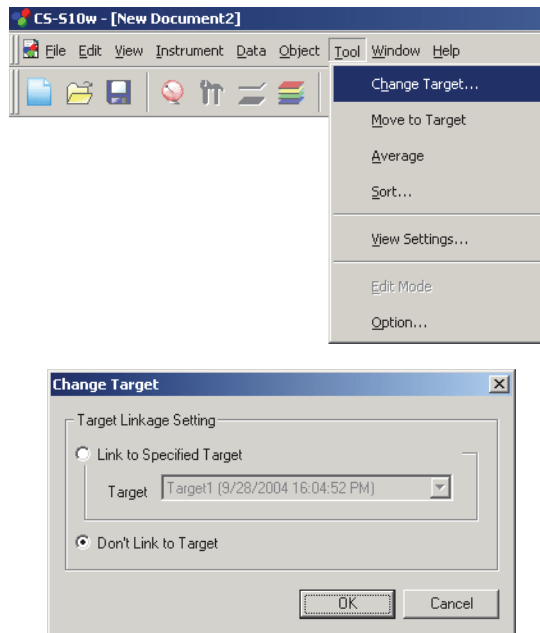

6. Wählen Sie *Link to Specified Target* und stellen Sie den Bezug ein.

Die Bezugsdaten-Optionen für den Ordner Target(s) bei Punkt Target werden in einer Combo-Box aufgelistet. Wählen Sie hier eine aus.

Wenn Sie den Bezug (zur Durchführung einer Absolutmessung) nicht festlegen, lassen Sie *Don't Link to Target* ausgewählt.

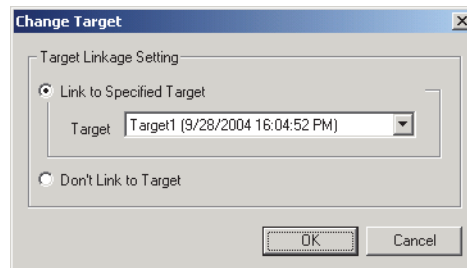

7. Klicken Sie auf OK.

Der Bezugswert wird im Listenfenster angezeigt.

	Data Name	LV	x	y	T	duv	Target No.	dLv	dx	dy	Judgement
Target	Target1 (2005/01/24 21:08:27)	80.00	0.3333	0.3333	5448	-0.0044	-----	-----	-----	-----	-----
1	3 (2005/01/24 21:13:56)	148.26	0.3147	0.3352	6373	0.0054	1	68.26	-0.0187	0.0019	-----

[Observer : 2 degree] [Illuminant : -----]

2.5.3 Einstellung der Toleranz

Um eine Beurteilung auf der Grundlage einer Farbdifferenzmessung durchzuführen, ist es notwendig, die Toleranz einzustellen.


2.5.3-a Einstellung der Anfangstoleranz

Die Standard-Toleranz ist jener Wert, der automatisch eingestellt wird, sobald der Bezug während der Messung oder anderer Operationen eingetragen wird. Um eine Bewertung immer mit demselben Toleranzwert durchzuführen, können Sie die Toleranz vorab einstellen. So ersparen Sie sich bei jeder Änderung der Bezüge die Toleranzeinstellung.

1. Wählen Sie *Data - Default Tolerance Setting* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Default Tolerance erscheint.


Die anzuzeigenden Farbmessdatenpositionen (Listeninhalte) sind jene Positionen, die gemäß dem Arbeitsablauf in „Setting the List Items“ (Seite 35) eingestellt werden.

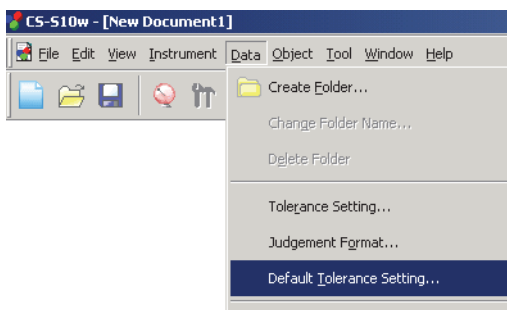


2. Legen Sie die Parameter für die Toleranz fest.

Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Kontrast eingestellt, wählen Sie White oder Black als Gruppeneigenschaft. Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB eingestellt, wählen Sie Red, Green oder Blue als Gruppeneigenschaft. Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast eingestellt, wählen Sie White, Black, Red, Green oder Blue als Gruppeneigenschaft. Geben Sie dann die Toleranzdaten für jede Farbe ein.

Die eingestellte Toleranz wird bei neu hinzugefügten Bezugsdaten verwendet.

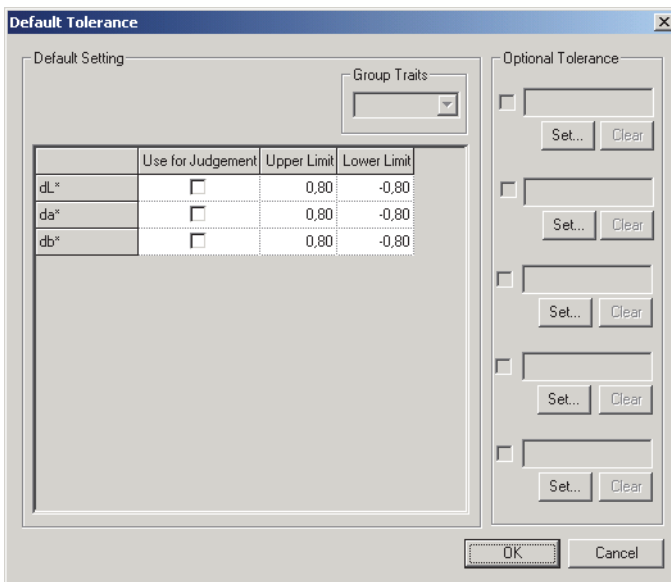

■ Dialogbox Default Tolerance

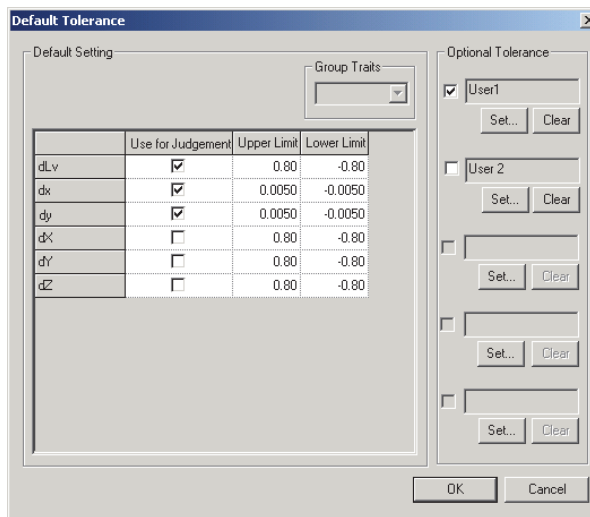

Ist das Kästchen in der Spalte Use for Judgement aktiviert, werden die Daten mit den oberen/unteren Toleranzwerten beurteilt. Daten-Kästchen, die nicht aktiviert wurden, werden nicht beurteilt. Zahlenwerte können bearbeitet werden, ungeachtet ob die Kästchen markiert sind oder nicht. Die Toleranz kann für alle im Listenfenster angezeigten Farbmessdatenpositionen (Listeninhalte) festgelegt werden.

Optional Tolerance

Polygon-Toleranzwerte können mit einem gewünschten Namen festgelegt werden. Polygon-Toleranzwerte beziehen sich auf den Toleranzbereich innerhalb eines Polygons, das mit Farbsättigungspunkten gebildet wird, welche auf der Farbtafel festgelegt werden. Wird das Kästchen links vom Namen aktiviert, wird die Bewertung mit dem vom Anwender definierten Toleranzwert durchgeführt. Wurde ein Daten-Kästchen nicht aktiviert, wird die Beurteilung nicht durchgeführt.

Die Einstellung ist ungeachtet der Auswahl des Kästchens verfügbar.


Set

Wird auf diese Schaltfläche geklickt, erscheint die Dialogbox Optional Tolerance. Sie können die Polygon-Toleranzwerte hier einstellen.

Clear

Wird auf diese Schaltfläche geklickt, werden die vom Anwender definierten aktuellen Toleranzwerte gelöscht.

■ Dialogbox Optional Tolerance

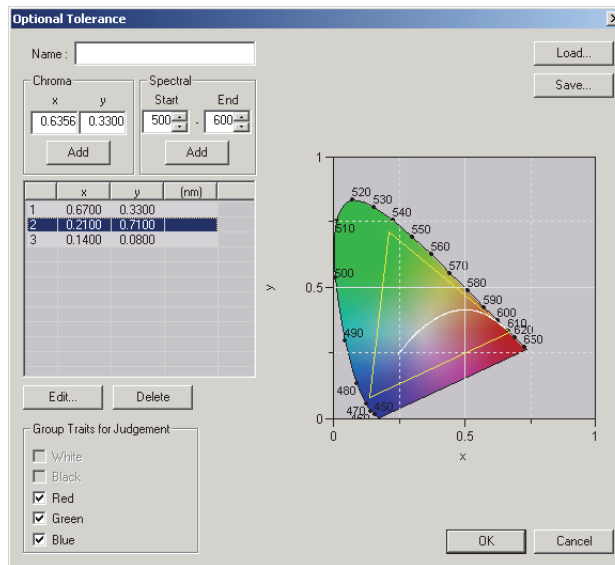

Name

Es können bis zu 64 alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Wenn kein Name festgelegt wird, können die Anwender-definierten Toleranzwerteinstellungen nicht abgeschlossen werden.

Chroma

Geben Sie einen Sättigungspunkt zum Hinzufügen ein. Ein Zahlenwert zwischen 0,0001 und 1,0 kann eingegeben oder ausgewählt werden.

Add

Wird diese Schaltfläche angeklickt, wird der Sättigungspunkt zur Datenliste hinzugefügt.

Spectral

Legen Sie hier die Daten fest, die als Spektralort hinzugefügt werden sollen. Eine Wellenlänge zwischen 380 und 780 kann eingegeben oder ausgewählt werden.

Add

Wird diese Schaltfläche angeklickt, werden die bei Start und Ende eingestellten Wellenlängen als farbtongleiche Wellenlängen der Datenliste hinzugefügt und der Schnittpunkt der Wellenlängen sowie der Spektralort als Sättigungspunkte der Datenliste hinzugefügt.

Delete

Wenn die in der Datenliste eingetragenen Daten ausgewählt werden und auf diese Schaltfläche geklickt wird, werden die Daten gelöscht.

Edit

Wenn eine der in der Datenliste eingetragenen Positionen ausgewählt und diese Schaltfläche angeklickt wird, erscheint die Dialogbox Edit, damit Sie die Daten bearbeiten können.

Group Traits for Judgement

Die Gruppeneigenschaft des ausgewählten Kästchens wird mit den Anwender-definierten Toleranzdaten bewertet. Die auswählbaren Gruppeneigenschaften variieren je nach Dokumententyp.

Load

Wurden Toleranzdaten gespeichert, kann die Datei (mit der Erweiterung .otr) aufgerufen und die Einstellung auf dem Bildschirm angezeigt werden.


Save

Wird diese Schaltfläche angeklickt, wird die Einstellung in einer Datei gespeichert (mit der Dateierweiterung .otr).

2.5.3-b Einstellung der Toleranz für jeden Bezug


Der mit der Standard-Toleranzeinstellung während der Bezugserfassung eingestellte Toleranzwert kann für alle Bezugsdaten geändert werden.

1. Öffnen Sie im Baumdiagramm im Listenfenster unter *Target – Target(s)* einen Ordner und wählen Sie anschließend die Bezugsdaten aus der Liste aus.

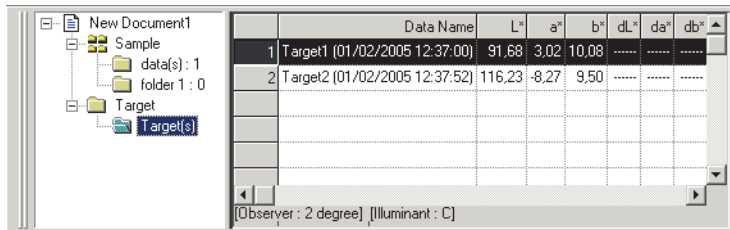


2. Wählen Sie *Data - Tolerance Setting* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Tolerance Settings erscheint.

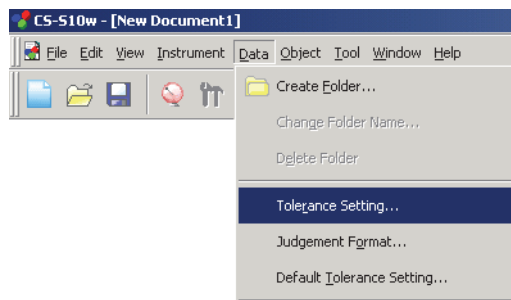

3. Legen Sie die erforderlichen Parameter für die Toleranzen fest.

Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Kontrast eingestellt, wählen Sie White oder Black als Gruppeneigenschaft. Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB eingestellt, wählen Sie Red, Green oder Blue als Gruppeneigenschaft. Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast eingestellt, wählen Sie White, Black, Red, Green oder Blue als Gruppeneigenschaft. Geben Sie dann die Toleranzdaten für jede Farbe ein.

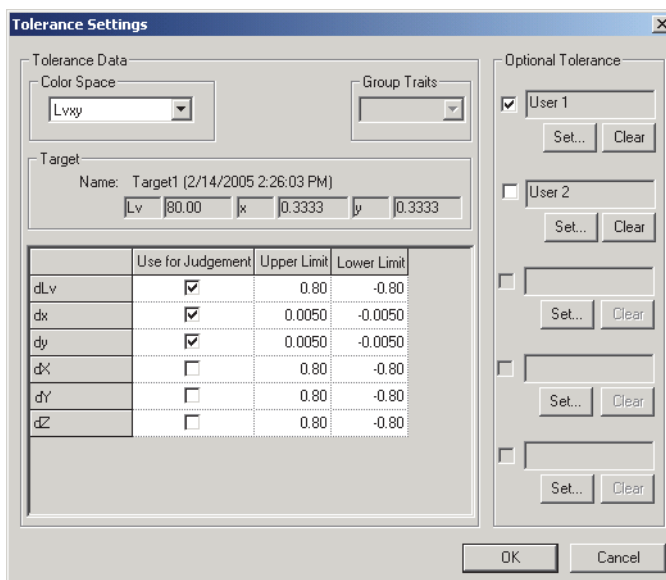

■ Dialogbox Tolerance Settings

Target

Die Bezugsdaten zur Einstellung der Toleranzdaten werden angezeigt.

Ist das Kästchen in der Spalte Use for Judgement aktiviert, werden die Daten mit den oberen/unteren Toleranzwerten beurteilt. Daten-Kästchen, die nicht aktiviert wurden, werden nicht beurteilt.

Zahlenwerte können bearbeitet werden, ungeachtet ob die Kästchen markiert sind oder nicht.

Die Toleranz kann für alle im Listenfenster angezeigten Farbmessdatenpositionen (Listeninhalte) festgelegt werden.

Optional Tolerance

Polygon-Toleranzwerte können mit einem gewünschten Namen festgelegt werden. Polygon-Toleranzwerte beziehen sich auf den Toleranzbereich innerhalb eines Polygons, das mit Farbsättigungspunkten gebildet wird, welche auf der Farbtafel festgelegt werden. Wird das Kästchen links vom Namen aktiviert, wird die Bewertung mit dem vom Anwender definierten Toleranzwert durchgeführt. Wurde ein Daten-Kästchen nicht aktiviert, wird die Beurteilung nicht durchgeführt.

Die Einstellung ist ungeachtet der Auswahl des Kästchens verfügbar.

Set

Wird auf diese Schaltfläche geklickt, erscheint die Dialogbox Optional Tolerance. Sie können die Polygon-Toleranzwerte hier einstellen.

Für Details zur Dialogbox Optional Tolerance siehe Seite 76.


Clear

Wird auf diese Schaltfläche geklickt, werden die vom Anwender definierten aktuellen Toleranzwerte gelöscht.


2.5.3-c Einstellung des Bewertungsformats im Listenfenster

1. Wählen Sie *Data -Judgement Format* in der Menüleiste.

Die Dialogbox List Format erscheint.

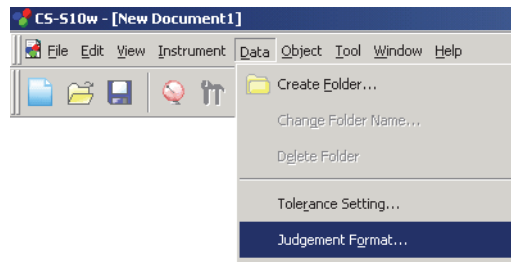

2. Legen Sie die Parameter für das Format der Bewertung fest.

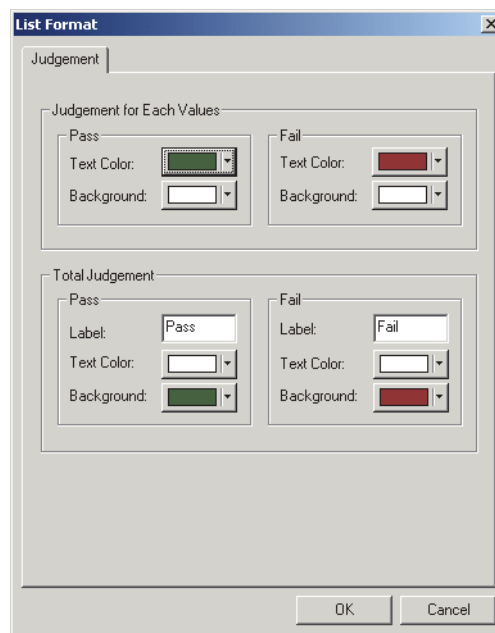

■ Dialogbox List Format

Registerkarte Judgement

Judgement for Each Values

Die folgenden Einstellungen werden für die einzelnen zu beurteilenden Listeninhalte angewandt.

Pass

Text Color: Legen Sie die Farbe des Zahlenwerts im Listenfenster fest, wenn dieser Wert als bestanden bewertet wird.

Background: Legen Sie die Hintergrundfarbe des Zahlenwerts im Listenfenster fest, wenn dieser Wert als bestanden bewertet wird.

Fail

Text Color: Legen Sie die Farbe des Zahlenwerts im Listenfenster fest, wenn dieser Wert als nicht bestanden bewertet wird.

Background: Legt die Hintergrundfarbe des Zahlenwerts im Listenfenster fest, wenn dieser Wert als nicht bestanden bewertet wird.

Diese Einstellungen gelten auch für die Farbe der Pass/Fail-Beurteilung in der Trend-Darstellung des Objekts.

Total Judgement

Die folgenden Einstellungen gelten für das Bewertungsergebnis nach der Bewertung aller Bezugspositionen im Listenfenster.

Pass

- Label:** Bestimmt den Wortlaut, der angezeigt wird, wenn das Ergebnis als bestanden bewertet wird.
- Text Color:** Legt die Farbe der Zeichenkette im Listenfenster fest, wenn dieser Wert als bestanden bewertet wird.
- Background:** Legt die Hintergrundfarbe der Zeichenkette im Listenfenster fest, wenn dieser Wert als bestanden bewertet wird.


Fail

- Label:** Bestimmt den Wortlaut, der angezeigt wird, wenn das Ergebnis als nicht bestanden bewertet wird.
- Text Color:** Legt die Farbe der Zeichenkette im Listenfenster fest, wenn dieser Wert als nicht bestanden bewertet wird.
- Background:** Legt die Hintergrundfarbe der Zeichenkette im Listenfenster fest, wenn dieser Wert als nicht bestanden bewertet wird.

Diese Einstellungen gelten auch für die Farbe der Pass/Fail-Beurteilung in der xy-Farbtabelle, in der u'v'-Farbtabelle und in der L*a*b* Grafik des Objekts

2.6 Arbeiten im Listenfenster


Im Listenfenster werden Probanddaten aufgelistet. Wählen Sie *View - List Window* in der Menüleiste, um das Listenfenster anzuzeigen oder auszublenden.

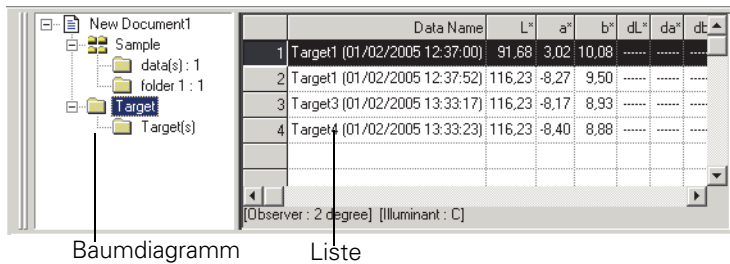

2.6.1 Baumdiagramm

Im Baumdiagramm werden die folgenden Positionen angezeigt.

Dateiname des Dokuments

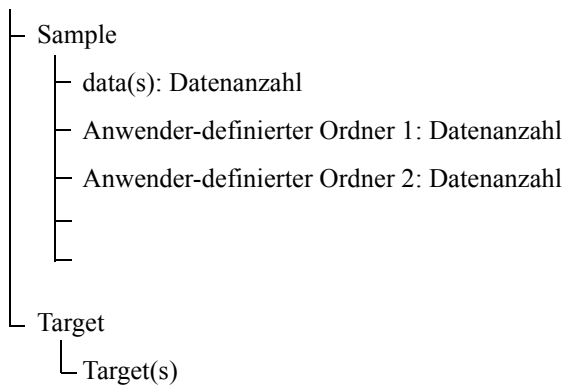

„Sample – data(s)“ und „Target - Target(s)“ sind Ordner, die standardmäßig definiert werden, wenn eine Dokumentendatei erstellt wird. „Sample - User-defined folder 1, 2,...“ ist ein Ordner, der von den Anwendern erstellt werden kann. Für die Erstellung eines Ordners siehe Seite 72.

2.6.2 Liste

Mit dem Befehl List werden die im Ordner enthaltenen Daten aus dem Baumdiagramm aufgelistet. Jede Position wird gemäß der auf Seite 35 festgelegten Listeninhalte angezeigt.

Die Punkte x , y , u' , v' , Δx , Δy , $\Delta u'$ und $\Delta v'$ werden mit vier Dezimalstellen angezeigt. Andere Farbmessdaten werden mit zwei Dezimalstellen angezeigt.

Die Anzahl an Dezimalstellen kann geändert werden. Für Details siehe Seite 41.


Die CS-S10w-Software verbessert die Rechengenauigkeit, da interne Berechnungen mit präziseren Zahlen durchgeführt werden als tatsächlich angezeigt. Durch Rundung oder Farbsystemkonversion kann die am wenigsten signifikante angezeigte Ziffer folglich um eine Ziffer von der am Gerät angezeigten abweichen.

Wenn der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Kontrast eingestellt ist, wird ein Datenwert über die Reihen White und Black dargestellt. Wenn der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB eingestellt ist, wird ein Datenwert über die Reihen Red, Green und Blue dargestellt. Wenn der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast eingestellt ist, wird ein Datenwert über die Reihen White, Black, Red, Green und Blue dargestellt.

Je nach ausgewähltem Ordner variieren der Inhalt des Listenfensters und die Funktion der grafischen Objekte im Entwurf-Fenster wie folgt:

■ Target - Target(s)


Alle in der Dokumentendatei enthaltenen Bezugsdaten werden aufgelistet.

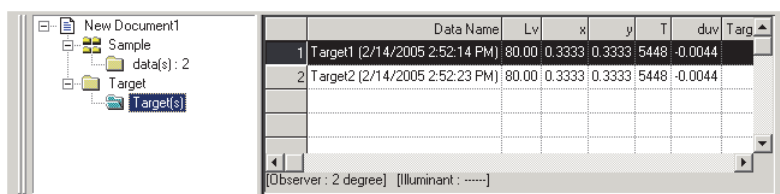

	Data Name	Lv	x	y	T	duv	Targ
1	Target1 (2/14/2005 2:52:14 PM)	80.00	0.3333	0.3333	5448	-0.0044	
2	Target2 (2/14/2005 2:52:23 PM)	80.00	0.3333	0.3333	5448	-0.0044	

[Observer : 2 degree] [Illuminant :]

Anzeigebeispiel für eine Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Normal

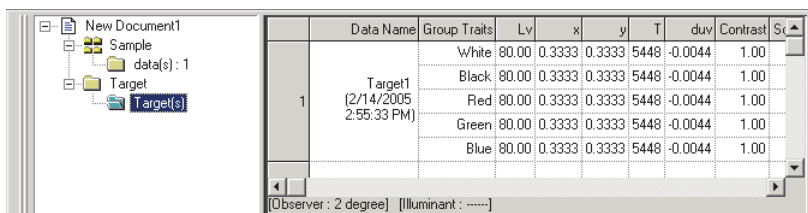

	Data Name	Group Traits	Lv	x	y	T	duv	Contrast	St
1	Target1 (2/14/2005 2:55:33 PM)	White	80.00	0.3333	0.3333	5448	-0.0044	1.00	
		Black	80.00	0.3333	0.3333	5448	-0.0044	1.00	
		Red	80.00	0.3333	0.3333	5448	-0.0044	1.00	
		Green	80.00	0.3333	0.3333	5448	-0.0044	1.00	
		Blue	80.00	0.3333	0.3333	5448	-0.0044	1.00	

[Observer : 2 degree] [Illuminant :]

Anzeigebeispiel für eine Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast

Funktionen der grafischen Objekte

Farbtafel, Absolutwert-Kurve	Die ausgewählten Daten (der letzte Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) werden angezeigt. *
Spektralkurve	Die ausgewählten Daten (der erste Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) werden angezeigt (ohne Differenzangabe).*
Trend-Darstellung/Histogramm	Alle Daten in der Liste werden angezeigt.*
Bild	Das Bild der ausgewählten Daten (der erste Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) wird angezeigt.
Datenobjekt mit Anzeigemerkmal für Bezug	Der Zahlenwert der ausgewählten Daten (der erste Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) wird angezeigt. *
Datenobjekt mit Anzeigemerkmal für Probe	Nicht angezeigt.

* Wenn der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Normal, Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Kontrast, Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB oder Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast eingestellt ist, werden nur die Daten aus den Gruppeneigenschaften angezeigt, die in der Gruppeneinstellung ausgewählt werden (siehe Seite 194).

■ Probedaten

Von allen in der Dokumentendatei enthaltenen Probedaten werden die in diesem Ordner enthaltenen Daten aufgelistet.

	Data Name	Lv	x	y	T	duv	Target No.
1	1 (2/14/2005 2:57:23 PM)	148.07	0.3139	0.3344	6420	0.0054	-----
2	2 (2/14/2005 2:57:27 PM)	148.22	0.3156	0.3364	6317	0.0055	-----

[Observer : 2 degree] [Illuminant : -----]

Anzeigebeispiel für eine Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Normal

	Data Name	Group Traits	Lv	x	y	T	duv	C
1	1 (2/14/2005 2:53:32 PM)	White	148.14	0.3159	0.3368	6300	0.0056	-----
		Black	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Red	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Green	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Blue	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[Observer : 2 degree] [Illuminant : -----]

Anzeigebeispiel für eine Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast

Funktionen der grafischen Objekte

Farbtafel, Absolutwert-Kurve	Die Verteilung aller Daten in der Liste wird angezeigt.*
Spektralkurve	Die ausgewählten Daten werden angezeigt (ohne Differenzangabe).*
Trend-Darstellung/Histogramm	Alle Daten in der Liste werden angezeigt.*
Bild	Das Bild der ausgewählten Daten (der erste Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) wird angezeigt.
Datenobjekt mit Anzeigemerkmale für Bezug	Nicht angezeigt.
Datenobjekt mit Anzeigemerkmale für Probe	Der Zahlenwert der ausgewählten Daten (der erste Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) wird angezeigt. *

* Wenn der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Normal, Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Kontrast, Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB oder Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast eingestellt ist, werden nur die Daten aus den Gruppeneigenschaften angezeigt, die in der Gruppeneinstellung ausgewählt werden (siehe Seite 194).

■ Probe – Anwender-definierter Ordner

Von allen in der Dokumentendatei enthaltenen Probedaten werden die in diesem Ordner enthaltenen Daten aufgelistet. Sie können diesem Ordner einen Bezugswert zuordnen. Für die Einstellung eines Bezugswerts siehe Seite 72.

	Data Name	Lv	x	y	T	duv	Target No.
Target	Target1 (2005/01/20 14:24:55)	80.00	0.3333	0.3333	5448	-0.0044	-----
Max.		148.40	0.3160	0.3370	6416	0.0057	-----
Min.		147.91	0.3139	0.3341	6295	0.0052	-----
Mean		148.16	0.3150	0.3357	6352	0.0055	-----
Std Dev.		0.1630	0.00080901	0.00101526	47	0.00014314	-----
3	3 (2005/01/20 14:25:53)	148.34	0.3152	0.3360	6342	0.0055	1
4	4 (2005/01/20 14:26:01)	148.06	0.3142	0.3345	6400	0.0053	1
5	5 (2005/01/20 14:26:31)	148.40	0.3160	0.3370	6295	0.0057	1
6	6 (2005/01/20 14:26:42)	147.91	0.3139	0.3341	6416	0.0052	1
7	7 (2005/01/20 14:26:52)	147.96	0.3144	0.3350	6385	0.0054	1
8	8 (2005/01/20 14:27:01)	148.16	0.3160	0.3368	6295	0.0055	1

[Observer : 2 degree] [Illuminant : -----]

Verknüpfte
Bezugsdaten
Statistischer Wert

Anzeigebeispiel für eine Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Normal

New Document1													
Sample													
data(s) : 1													
01 : 1													
Target													
Target(s)													

Anzeigebeispiel für eine Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast

Data Name	L*	x	y	T	duv	Target No.	dL*	d*
Target2 (2005/02/15 13:39:49)	Max.	0.4094	0.4094				0.003	
	Min.	0.4134	0.4106				-0.005	
	Mean	0.4083	0.4081				-0.001	
	Std. Dev.	0.00362667	0.00291437				0.0036266	
	Non-Uniformity	2.31	1.76				244.5	
1 (2005/02/15 13:39:49)	01_P01	0.4069	0.4092			2	-0.002	
	01_P02	0.4134	0.4100			2	0.003	
	01_P03	0.4097	0.4034			2	0.000	
	01_P04	0.4038	0.4106			2	-0.005	
	01_P05	0.4080	0.4072			2	-0.001	

Anzeigebeispiel für eine Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Normal, Mehrpunkt-Messung (Anz. der Punkte: 5)

Verknüpfte Bezugsdaten

Die verknüpften Bezugsdaten werden angezeigt, wenn List - Categorized List - Show Linked Target im Register Data List der Dialogbox Display Settings aktiviert wird. Um diese Dialogbox anzuzeigen, wählen Sie *Tool - View Settings* in der Menüleiste. Scrollen ist in den Zeilen der verknüpften Bezugsdaten nicht möglich.

Statistischer Wert

Die Statistikwerte der mit den Bezugsdaten verknüpften Probanden werden angezeigt. Die Statistik wird angezeigt, wenn List - Categorized List - Show Statistics im Register Data List der Dialogbox Display Settings aktiviert wird. Um diese Dialogbox anzuzeigen, wählen Sie *Tool - View Settings* in der Menüleiste. Scrollen ist in den Statistikzeilen nicht möglich. Wird auch Mehrpunktmessung eingestellt, wird die Reihe Non-Uniformity (Farbabweichungen) angezeigt.

Bei der hier durchgeführten Mittelwertbildung wird der Mittelwert der Farbmessdaten für jeden Wert ermittelt, der individuell nach dessen Spektraldaten oder XYZ-Daten berechnet wurde. Andererseits erfolgt anhand des ermittelten Mittelwerts (beschrieben auf Seite 48) und der Mittelwertbildung der Listendaten (auf Seite 88) zuerst die Mittelung der Spektraldaten oder der XYZ-Daten, um Daten zu erhalten, die dann für die Berechnung der Farbmessdaten verwendet werden. Daher können die Ergebnisse dieser beiden Berechnungsarten voneinander abweichen.

Funktionen der grafischen Objekte


Farbtafel, Absolutwert-Kurve	Die Verteilung aller Daten in der Liste wird angezeigt.*
Spektralkurve	Die Bezugsdaten sowie die ausgewählten Daten werden angezeigt (ohne Differenzangabe).*
Trend-Darstellung/Histogramm	Alle Daten in der Liste werden angezeigt (Anzeige der Referenzzeile).*
Bild	Das Bild der ausgewählten Daten (der erste Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) wird angezeigt.
Datenobjekt mit Anzeigemerkmale für Bezug	Die Bezugsdaten werden angezeigt.
Datenobjekt mit Anzeigemerkmale für Probe	Der Zahlenwert der ausgewählten Daten (der erste Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) wird angezeigt.*

* Wenn der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Normal, Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Kontrast, Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB oder Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast eingestellt ist, werden nur die Daten aus den Gruppeneigenschaften angezeigt, die in der Gruppeneinstellung ausgewählt werden (siehe Seite 194).

2.6.3 Bearbeitung der Listendaten


■ Auswahl der Listendaten

Wird der Mauszeiger über die Spalte am äußerst linken Rand (Zahlenspalte) in der Liste gestellt, ändert sich dessen Form und aus dem Zeiger wird ein Pfeil. Klicken Sie mit diesem Pfeil auf die Listendaten, um die Daten auszuwählen. Um zwei oder mehr Daten auszuwählen, klicken Sie auf den ersten Wert und legen Sie den gewünschten Bereich fest, indem Sie die Umschalt-Taste gedrückt halten und gleichzeitig auf den letzten Wert klicken, oder klicken Sie nacheinander auf die gewünschten Daten und halten Sie dabei die Strg-Taste gedrückt. Sie können den Bereich aber auch durch Ziehen mit der Maus auswählen. Um nicht zusammenhängende Daten auszuwählen, halten Sie sowohl die Umschalt- wie auch die Strg-Taste gedrückt. Daten aus verschiedenen Ordnern können nicht ausgewählt werden. Durch Anklicken der Zelle in der linken oberen Ecke werden alle Zellen ausgewählt.

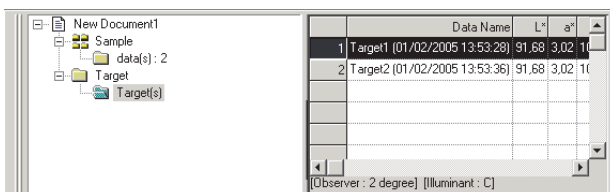

■ Kopieren der Listendaten

Klicken Sie in der Liste der Daten, die durch Auswahl von Target - Target(s) oder Sample - data(s) angezeigt werden, mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten (markierten) Daten und wählen Sie den Befehl *Copy* im angezeigten Kontextmenü. Oder wählen Sie die Daten aus und gehen dann auf *Edit - Copy* in der Menüleiste. Die kopierten Daten können dann in ein Tabellenkalkulationsprogramm, wie etwa Excel, eingefügt werden.

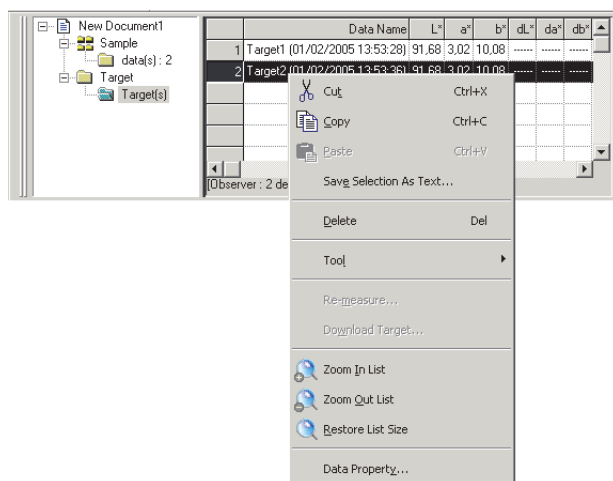

■ Ausschneiden von Listendaten

Klicken Sie in der Liste der Daten, die durch Auswahl von Target - Target(s) oder Sample - data(s) angezeigt werden, mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten (markierten) Daten und wählen Sie den Befehl *Cut* im angezeigten Kontextmenü. Oder wählen Sie die Daten aus und gehen dann auf *Edit - Cut* in der Menüleiste.

Die ausgeschnittenen Daten werden mit einer punktierten Linie in der Liste angezeigt. Werden die Daten irgendwohin kopiert, so werden die zuvor ausgeschnittenen Daten aus der Liste gelöscht.

Die ausgeschnittenen Daten können in ein Tabellenkalkulationsprogramm, wie etwa Excel, eingefügt werden.

■ Einfügen der Listendaten

Klicken Sie auf die Stelle, an der Sie die Daten einfügen wollen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Stelle und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü den Befehl *Paste*. Oder wählen Sie *Edit - Paste* in der Menüleiste. Sie können Daten nur einfügen, wenn Sie diese vorher kopiert haben. Daten können nicht in dieselbe Dokumentendatei, aus der sie kopiert wurden, eingefügt werden.

■ Gleichzeitiges Ausschneiden und Einfügen/Kopieren und Einfügen der Listendaten

Die Listendaten können auch mittels Drag-and-drop kopiert oder verschoben werden. Um die Daten zu verschieben, wählen Sie die Daten aus und bewegen Sie den Mauszeiger an den Rand der ausgewählten Daten. Sobald sich die Form des Mauszeigers in ein Viereck verwandelt, ziehen Sie die Daten an die gewünschte Stelle, um die Daten zu verschieben. Wenn Sie Daten mittels Drag-and-drop verschieben und dabei gleichzeitig die Strg-Taste gedrückt halten, werden die Daten kopiert und eingefügt. Die in Probe angezeigten Daten können jedoch nicht kopiert und eingefügt (repliziert) werden. Sie können nur ausgeschnitten und eingefügt (verschoben) werden.

Wenn Sie Probendaten von einem Ordner, den Sie erstellt haben, in einen Ordner verschieben, der verschiedene Bezugsdaten enthält, ändert sich die Verknüpfung zwischen den Probendaten und den Bezugsdaten.

■ Löschen der Listendaten


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten (markierten) Daten und wählen Sie *Delete* im angezeigten Kontextmenü. Oder wählen Sie die Daten aus und gehen dann auf *Edit - Delete* in der Menüleiste. Wird mehr als ein Wert ausgewählt, werden alle ausgewählten Daten gleichzeitig gelöscht. Wenn die Bezugsdaten gelöscht werden, verlieren die mit den Bezugsdaten verknüpften Probendaten ihre Merkmale und werden zu Absolutdaten.

Wenn Mehrpunkt-Messung eingestellt ist, können die Daten nicht gelöscht werden.

■ Sortieren der Listendaten

Die Listendaten können je nach Listeninhalt sortiert werden. Daten können zum Beispiel je nach ΔL_v -Wert in aufsteigender Reihenfolge geordnet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü den Befehl *Tool - Sort*. Oder wählen Sie *Tool - Sort* in der Menüleiste. Die zu sortierenden Daten sind die Listendaten in der Liste. Wird *Sort* ausgewählt, erscheint die Dialogbox Sort.

Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Kontrast, Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB oder Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast eingestellt, können die bei Gruppeneigenschaften eingestellten Daten sortiert werden.

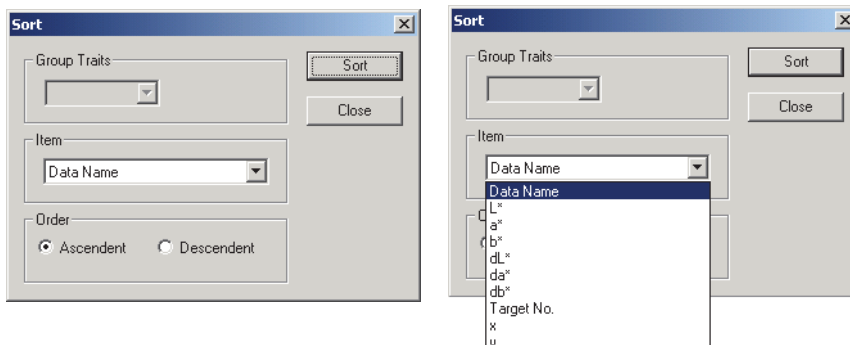

Wenn Mehrpunkt-Messung eingestellt ist, können die Daten nicht sortiert werden.

■ Speicherung der Listendaten im Textformat

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten (markierten) Daten und wählen Sie *Save Selection as Text* im angezeigten Kontextmenü. Oder wählen Sie die Daten und gehen auf *File - Save Selection As Text* in der Menüleiste. Die Daten werden als tabulatorgetrennter Text in einer Textdatei mit der Erweiterung „.txt“ oder als Datei mit einem Delimiter gespeichert, der in der Systemsteuerung festgelegt werden kann (Erweiterung: .csv).

Die Spektraldaten können auch dann als Text gespeichert werden, wenn sie nicht unter Listen Merkmale ausgewählt wurden. Für Details, siehe Seite 110.


2.6.4 Hinzufügen von Mittelwertdaten

Sie können die gewünschten Daten aus den Listendaten auswählen, den Mittelwert bilden und das Ergebnis als neuen Wert hinzufügen.

Wenn Mehrpunkt-Messung eingestellt ist, kann für die Listendaten kein Mittelwert gebildet werden.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten (markierten) Listendaten und wählen Sie *Tool - Average* im angezeigten Kontextmenü. Oder wählen Sie mindestens einen Listenwert und gehen Sie auf *Tool - Average* in der Menüleiste.



Eine Dialogbox mit der folgenden Meldung erscheint: „Are you sure to add averaged data?“

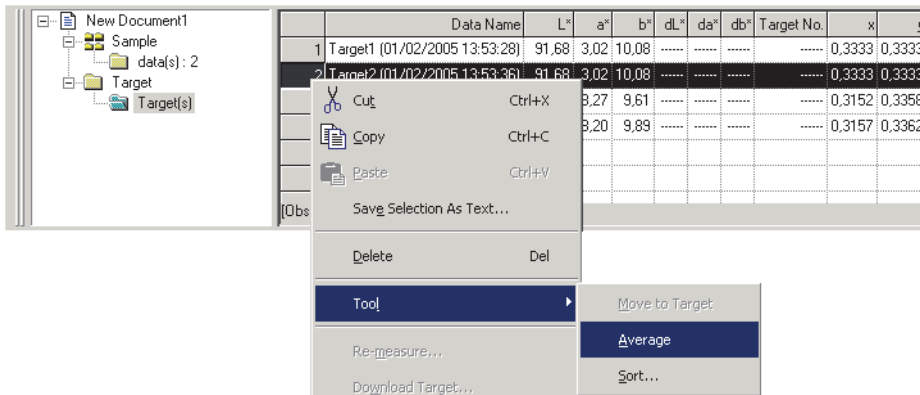

2. Klicken Sie auf Yes.

Der gebildete Mittelwert wird im Listenfenster angefügt.


Die hier durchgeführte Mittelwertberechnung bestimmt zuerst den Mittelwert der Spektraldaten oder XYZ-Daten. Das Ergebnis wird anschließend für die Berechnung der Farbmessdaten verwendet. Andererseits führt die Mittelwertberechnung, welche die auf Seite 84 beschriebenen statistischen Werte verwendet, eine Mittelung der Farbmessdaten aller Datenteile durch, die anhand der Spektraldaten oder XYZ-Daten individuell berechnet wurden. Daher können die Ergebnisse dieser beiden Berechnungsarten voneinander abweichen.

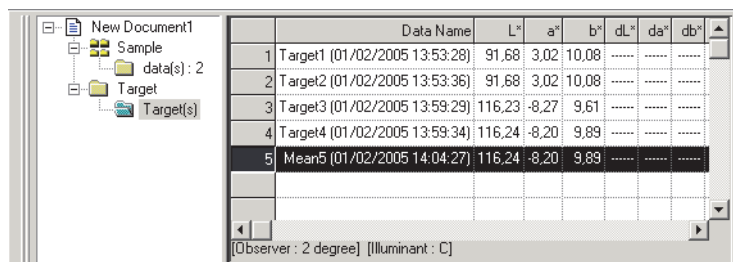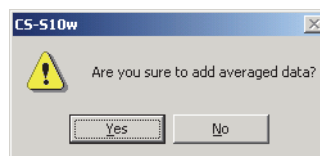


2.6.5 Listendaten neu messen

Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Kontrast, Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB oder Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast eingestellt, können Sie beliebige Daten in den Listendaten auswählen, sie erneut messen und die alten Daten durch die neuen ersetzen.

1. Wird eine der Positionen aus den Listendaten ausgewählt und markiert, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ein Pop-up Menü aufzurufen und wählen Sie *Re-measure*. Oder wählen Sie *Instrument - Re-measure* in der Menüleiste. Oder wenn Mehrpunkt-Messung eingestellt ist, wählen Sie *Instrument - Measure* in der Menüleiste. Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Kontrast eingestellt, erscheint die Dialogbox Contrast Measurement. Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB eingestellt, erscheint die Dialogbox RGB Measurement. Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast eingestellt, erscheint die Dialogbox RGB & Contrast Measurement. Wurde Mehrpunkt-Messung eingestellt, erscheint die Dialogbox Multi-Point Measurement.

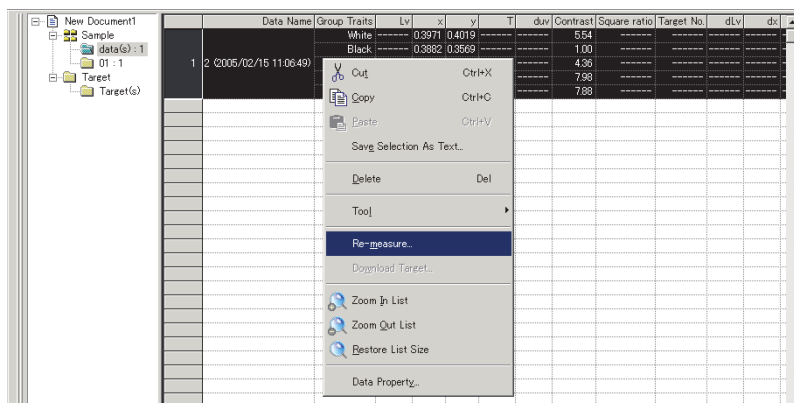

2. Wählen Sie die Gruppeneigenschaft oder den Messpunkt, um die neue Messung durchzuführen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Measure. Die Dialogbox Measure erscheint und die Daten in der Reihe der ausgewählten Gruppeneigenschaft oder des ausgewählten Messpunkts werden durch die neuen Daten ersetzt.

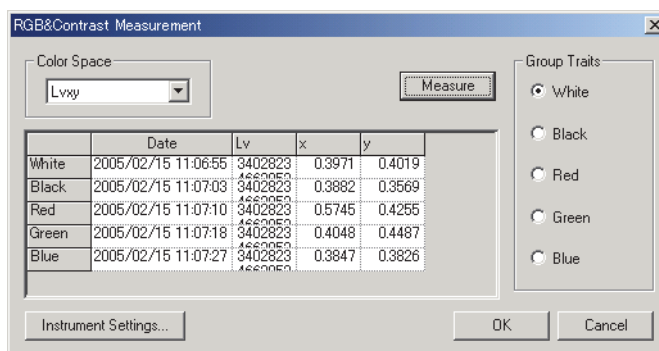

Probedatenanzeige bei Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast

3. Wiederholen Sie Schritt 2 für andere Gruppeneigenschaften oder Messpunkte, die eine neue Messung erforderlich machen.


4. Klicken Sie auf OK.

Die Dialogbox wird geschlossen und die im Listenfenster ausgewählten Daten werden durch die neuen Daten ersetzt.

	Data Name	Group Traits	Lv	x	y	T	duv	Contrast	Square ratio	Target No.	dLv	dx
1	2 (2005/02/15 11:06:49)	White	0.3971	0.4019	554							
		Black	0.3882	0.3569	1.00							
		Red	0.5629	0.4190	432							
		Green	0.3826	0.5090	496							
		Blue	0.3592	0.3848	545							

2.6.6 Liste vergrößern/verkleinern

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste, um das Kontextmenü aufzurufen oder wählen Sie *View* in der Menüleiste. Wählen Sie den jeweiligen Befehl.

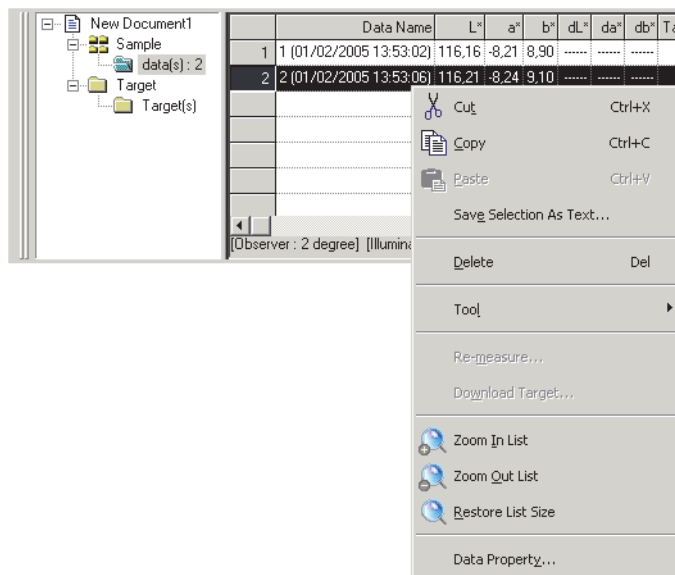

■ Liste vergrößern

1. Wählen Sie *Zoom In List*.

Die Liste wird vergrößert.

■ Liste verkleinern

1. Wählen Sie *Zoom Out List*.

Die Liste wird verkleinert.

■ Listengröße wiederherstellen

1. Wählen Sie *Restore List Size*.

Die Größe der Liste wird wieder auf die Standardgröße eingestellt.

Die Standardgröße kann verändert werden. Für den Ablauf zur Änderung der Standardgröße siehe Seite 105.

2.7 Arbeiten im Entwurf-Fenster

Das Entwurf-Fenster zeigt die Daten als Grafiken. Die CS-S10w-Software stellt verschiedene Grafikarten zur Auswahl, die wie gewünscht im Fenster platziert werden können. Das Entwurf-Fenster ist in zwei Anzeigenarten verfügbar: Display-Ansicht und Druckansicht. Verwenden Sie die Display-Ansicht, um für die Überprüfung der Messergebnisse am PC-Bildschirm grafische Objekte zu platzieren. Mit der Druckansicht können Sie grafische Objekte platzieren, um einen Testbericht auszudrucken.


Mehr Informationen über grafische Objekte finden Sie auf Seite 146.

2.7.1 Bearbeitung des Entwurf-Fensters

Grafiken, Kurven und deren Komponenten werden grafische Objekte genannt. Um grafische Objekte zu bearbeiten, stellen Sie das Entwurf-Fenster auf Edit.


1. Wählen Sie *Tool - View Settings* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Display Settings erscheint.

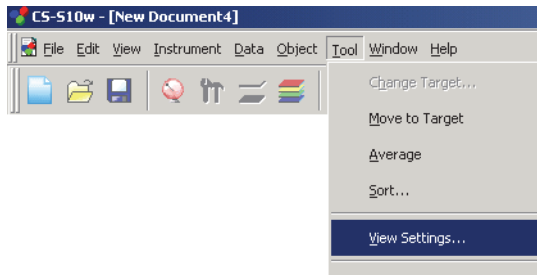

2. Wählen Sie die Registerkarte General.
3. Aktivieren Sie den Punkt „Allow editing canvas window“ und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
4. Aktivieren Sie *Tool - Edit Mode* in der Menüleiste.

Das Entwurf-Fenster geht nun in Betriebsart Graphic Object Edit.

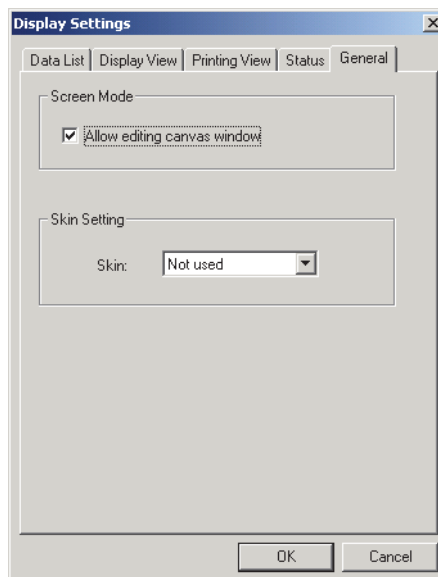


Für Details zu anderen Einstellungspositionen in der Dialogbox Display Settings siehe Seite 106 und 107.

2.7.2 Einfügen eines Grafischen Objekts


1. Wählen Sie ein grafisches Objekt.

Wählen Sie ein grafisches Objekt, das Sie in der Symbolleiste einfügen wollen, oder wählen Sie es im Menü *Object* in der Menüleiste. Wird ein grafisches Objekt ausgewählt, ändert der Mauszeiger seine Form.

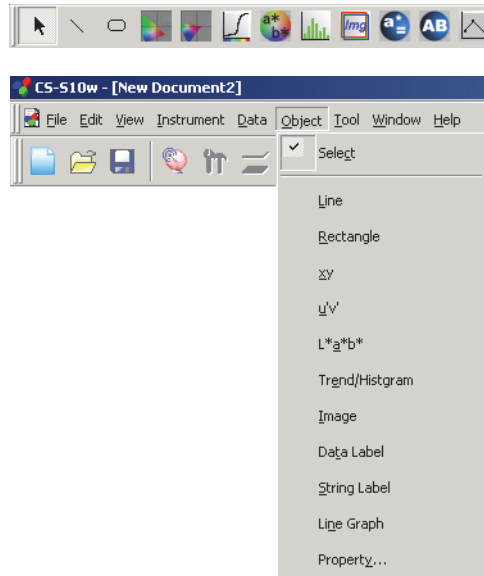

2. Fügen Sie das grafische Objekt ein.

Ziehen Sie das grafische Objekt in das Entwurf-Fenster und fügen Sie es an der gewünschten Stelle ein. Um das grafische Objekt erscheint ein Rahmen mit Griffen. Ziehen Sie am jeweiligen Griff, um die Größe des Objekts beliebig zu ändern.

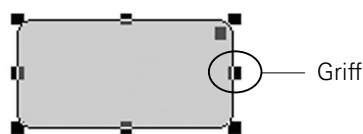

2.7.3 Auswahl eines Grafischen Objekts

Wenn Sie in den Rahmen eines grafischen Objekts klicken, das im Entwurf-Fenster eingefügt wurde, wird das grafische Objekt markiert. Sie können zwei oder mehr Objekte markieren, indem Sie dabei die Umschalt-Taste gedrückt halten.

Wenn Sie mit gedrückter Maustaste ein grafisches Objekt umrahmen, wird das Objekt ebenfalls markiert. (Sie können ein Objekt markieren, indem Sie es ganz oder nur teilweise einrahmen.) Wenn Sie zwei oder mehr grafische Objekte umrahmen, werden dabei alle in diesem Rahmen enthaltenen grafischen Objekte markiert.


Auch wenn mehrere Dokumentdateien geöffnet werden, können Sie grafische Objekte in mehr als einer Dokumentendatei markieren.

2.7.4 Auswahl eines Grafischen Objekts aufheben


Klicken Sie in einen beliebigen Bereich neben den eingefügten grafischen Objekten oder klicken Sie auf ESC. Wenn zwei oder mehr grafische Objekte markiert sind, klicken Sie auf ein Objekt und halten dabei die Umschalt-Taste gedrückt, um so die Auswahl nur des betreffenden Objekts aufzuheben.

2.7.5 Änderung der Größe eines Grafischen Objekts

Klicken Sie auf ein grafisches Objekt, markieren Sie es und stellen Sie den Mauszeiger über einen der Griffe am Rahmen. Wenn sich die Form des Mauszeigers ändert und ein Pfeil mit zwei Spitzen erscheint, ziehen Sie den Griff und ändern Sie so die Größe des Objekts.

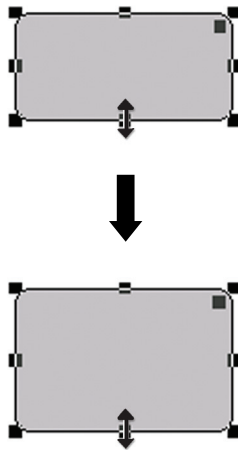


Bei einem rechteckigen Objekt bewirkt das Ziehen des Griffs an der oberen rechten Ecke, dass die Ecken rund werden und aus dem Rechteck eine Ellipse entsteht.

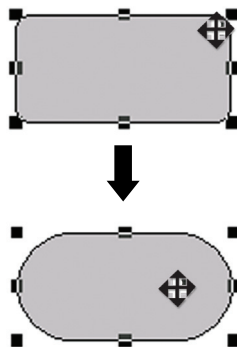

2.7.6 Verschieben eines Grafischen Objekts

Klicken Sie auf ein grafisches Objekt, markieren Sie es und stellen Sie den Mauszeiger auf irgendeinen Punkt im Rahmen. Ziehen Sie das Objekt an die gewünschte Stelle.

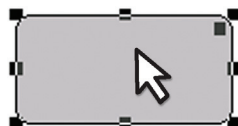

2.7.7 Kopieren eines Grafischen Objekts

Klicken Sie auf ein grafisches Objekt und markieren Sie es. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und wählen Sie *Copy* im angezeigten Kontextmenü. Sie können das Objekt auch kopieren, indem Sie in der Menüleiste auf *Edit - Copy* gehen oder indem Sie auf die Taste C drücken und gleichzeitig die Strg-Taste gedrückt halten. Wenn Sie ein Objekt verschieben, während Sie die Strg-Taste gedrückt halten, wird eine Kopie des Objekts verschoben und eingefügt. Wenn zwei oder mehr Objekte markiert sind, werden die markierten Objekte gleichzeitig kopiert.

2.7.8 Ausschneiden eines Grafischen Objekts

Klicken Sie auf ein grafisches Objekt und markieren Sie es. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und wählen Sie *Cut* im angezeigten Kontextmenü. Sie können das Objekt auch ausschneiden, indem Sie in der Menüleiste auf *Edit - Cut* gehen oder indem Sie auf die Taste X drücken und gleichzeitig die Strg-Taste gedrückt halten. Wenn zwei oder mehr Objekte markiert sind, werden die markierten Objekte gleichzeitig ausgeschnitten.

2.7.9 Einfügen eines Grafischen Objekts

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und wählen Sie *Paste* im angezeigten Kontextmenü. Sie können das Objekt auch einfügen, indem Sie in der Menüleiste auf *Edit - Paste* gehen oder indem Sie auf die Taste V drücken und gleichzeitig die Strg-Taste gedrückt halten. Sind zwei oder mehr Dokumentdateien geöffnet, können Sie ein Objekt aus dem offenen Dokument kopieren und im Entwurf-Fenster oder einer anderen Dokumentdatei einfügen.

2.7.10 Löschen eines Grafischen Objekts

Klicken Sie auf ein grafisches Objekt und markieren Sie es. Wählen Sie *Edit - Delete* in der Menüleiste oder drücken Sie auf die Taste Entf. Wenn zwei oder mehr Objekte markiert sind, werden die markierten Objekte gleichzeitig gelöscht.

2.7.11 Entwurf-Fenster im Modus Run

Wenn in der Menüleiste die Funktion *Tool - Edit Mode* nicht aktiviert wurde, befindet sich das Entwurf-Fenster im Modus Run.

Im Modus Run können Sie die Größe oder die Position der grafischen Objekte weder ändern noch ein neues grafisches Objekt einfügen. Diese Operationen sind nur in Betriebsart Edit möglich. Die folgenden Operationen sind im Modus Run verfügbar:

- Wenn Sie ein grafisches Objekt doppelklicken, können Sie die Eigenschaften des betreffenden Objekts anzeigen.
- Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt klicken und im angezeigten Kontextmenü *Copy* wählen (oder *Edit - Copy* in der Menüleiste auswählen), wird das Objekt im Bitmap-Format in die Zwischenablage kopiert. Diese Datei kann dann in ein Software-Programm, wie etwa Microsoft Excel, eingefügt werden.

Hinweis: Sie können ein grafisches Objekt, das im Modus Betrieb kopiert wurde, nicht im Entwurf-Fenster der CS-S10w-Software einfügen. Um grafische Objekte zu kopieren und im Entwurf-Fenster einzufügen, stellen Sie das Fenster auf Betriebsart Bearbeiten.

2.7.12 Arbeiten im Fenster, wenn das Listenfenster verborgen ist


Wählen Sie die Daten, die im Entwurf-Fenster angezeigt werden sollen, folgendermaßen aus.

Vorbereitung

Bevor Sie Daten auswählen können, müssen Sie zuerst die benötigten Schaltflächen in der Symbolleiste hinzufügen.


1. Wählen Sie *View - Toolbar setup* in der Menüleiste.
Die Dialogbox *Customize* erscheint.
2. Wählen Sie die Registerkarte *Command* und wählen Sie *Data* in der Liste unter *Categories*.
3. Ziehen Sie das Feld *Select Target*, die Schaltflächen *Previous Data* ▲ und *Next Data* ▼ aus dem Schaltflächen-Bereich in die Symbolleiste.

Die Schaltflächen erscheinen nun in der Symbolleiste.

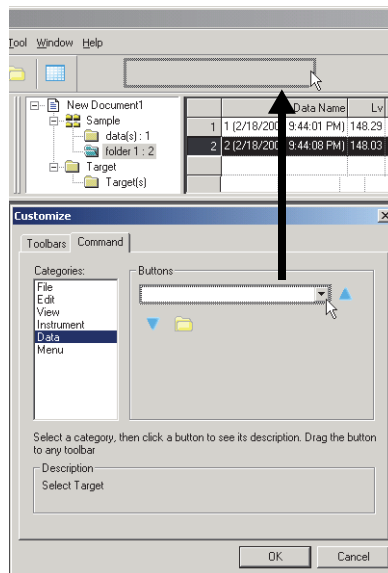

Daten auswählen

1. Wählen Sie im Feld *Select Target* die Datengruppe, die Sie anzeigen möchten.
2. Steuern Sie durch die Daten, indem Sie auf die Schaltflächen ▲ oder ▼ in der Symbolleiste klicken oder indem Sie in der Menüleiste *Data - Next Data* oder *Previous Data* auswählen.

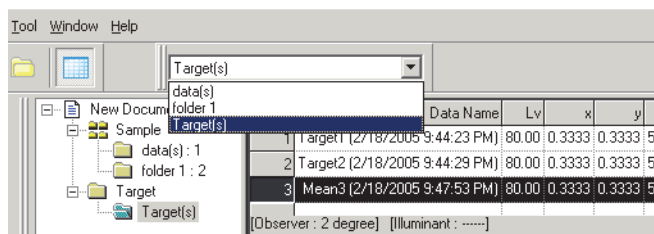


2.8 Drucken

Sie können die Display-Ansicht und die Druck-Ansicht des Entwurf-Fensters oder der Liste im Listenfenster ausdrucken.


2.8.1 Seiteneinstellung

1. Wählen Sie *File - Page Setup* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Page Setup erscheint.

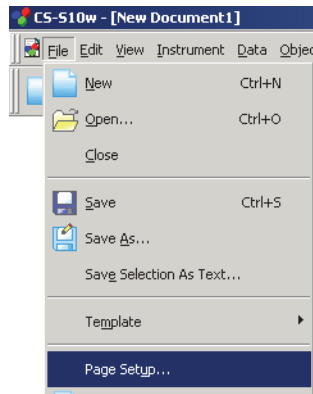

2. Legen Sie die notwendigen Einstellungen im Register Print fest.

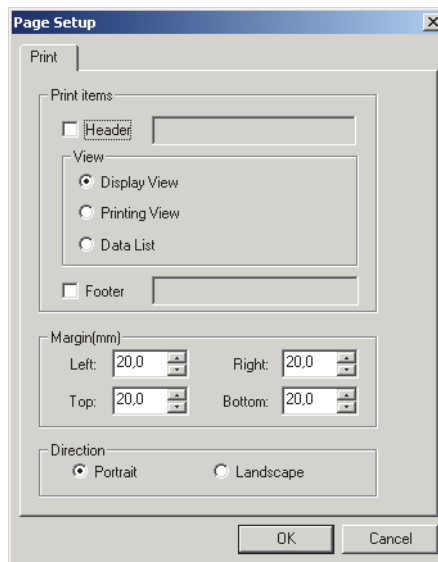

■ Dialogbox Page Setup

Druckeigenschaften

Header

Stellen Sie ein, ob eine Kopfzeile mitausgedruckt werden soll. Um eine Kopfzeile auszudrucken, geben Sie die Zeichenkette ein, die als Kopfzeile ausgedruckt werden soll.

Display View

Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Entwurf-Fenster in Display-Ansicht ausdrucken wollen.

Printing View

Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Entwurf-Fenster in Druck-Ansicht ausdrucken wollen.

Data List

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Liste im Listenfenster ausdrucken wollen.

Footer

Stellen Sie ein, ob eine Fußzeile mitausgedruckt werden soll. Um eine Fußzeile auszudrucken, geben Sie die Zeichenkette ein, die als Fußzeile ausgedruckt werden soll.

Sie können festlegen, ob der in der Kopf- oder Fußzeile zu druckende Text während des Druckvorgangs automatisch bestimmt wird.

Die Zeichen in der untenstehenden Tabelle werden als Sonderzeichen erkannt und durch entsprechende Zeichenfolgen ersetzt.

Zeichenkette	Entsprechende Daten
\$D	Tag der Messung
\$M	Monat der Messung
\$Y	Jahr der Messung
\$h	Stunde der Messung
\$m	Minute der Messung
\$s	Sekunde der Messung

Geben Sie eine Kombination dieser Zeichen in das Textfeld ein. Bis zu 60 alphanumerische Zeichen können verwendet werden.

Margin

Wenn Sie das Listenfenster ausdrucken wollen, stellen Sie den oberen/unteren sowie den rechten/linken Rand ein. Der rechte/linke Rand kann in einem Bereich zwischen 0 und 50 (mm), der obere/untere Rand in einem Bereich zwischen 5 und 50 (mm) eingestellt werden. Die Randeinstellung bestimmt die Position der Randlinie, die im Entwurf-Fenster angezeigt ist (siehe Seite 15).

Orientieren Sie sich an dieser Linie, wenn Sie grafische Objekte platzieren.

Direction

Portrait

Fenster werden im Hochformat ausgedruckt.


Landscape

Fenster werden im Querformat ausgedruckt.

2.8.2 Druckvorschau

1. Wählen Sie *File - Print Preview* in der Menüleiste.


Ein Vorschaufenster erscheint und zeigt das tatsächliche Druckbild der Seite wie in der Dialogbox Page Setup festgelegt.

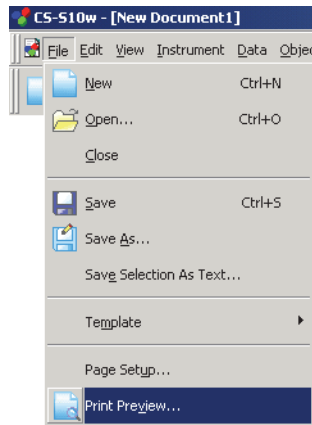

2.8.3 Drucken Starten

1. Wählen Sie *File - Print* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Print erscheint.

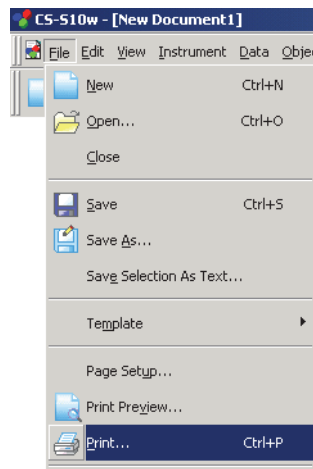


2.9 Datei Sichern

2.9.1 Datei Sichern

Der im Listenfenster oder im Entwurf-Fenster angezeigte Inhalt wird als Dokumentdatei gesichert.

1. Wählen Sie *File - Save As* in der Menüleiste.

Das Dialogfenster Save As erscheint.

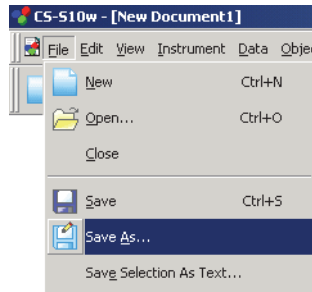

2. Legen Sie den Dateinamen und andere Punkte fest und speichern Sie die Datei.

Die Daten werden als Datei im Original-Dateiformat der CS-S10w-Software gespeichert (mit der Dateierweiterung „.ces“).

Die Datei enthält folgende Daten:

- Probanddaten
- Bezugsdaten
- Ordner
- Beobachter
- Anfangstoleranzen
- Einstellung der Bewertungsanzeige
- Listeninhalte, die im Listenfenster festgelegt wurden.
- Grafische Objekte, die im Entwurf-Fenster eingefügt wurden, ihre Größe und Positionsinformationen
- Einstellparameter für Ansicht

Ein Ordner, der keine Daten enthält, wird nicht gespeichert.

2.10 Andere Funktionen


2.10.1 Vorlagendatei

Die CS-S10w-Software stellt Vorlagendateien in ihren Originaldateiformaten zur Verfügung (mit der Dateierweiterung „.ctp“). Eine Vorlagendatei enthält folgende Daten:

- Beobachter
- Anfangstoleranzen
- Einstellung der Bewertungsanzeige
- Listeninhalte, die im Listenfenster festgelegt wurden.
- Grafische Objekte, die im Entwurf-Fenster eingefügt wurden, ihre Größe und Positionsinformationen
- Bildeigenschaften

Sobald Sie die Vorlagendateien, wie in der folgenden Vorgangsweise beschrieben, gesichert haben, können Sie mit der CS-S10w-Software einfach die Vorlagendatei öffnen. Diese wird sich von nun an immer in derselben Ansicht öffnen.

1. Wählen Sie *File - Template - Save as Template* in der Menüleiste.
Das Dialogfenster Save As erscheint.

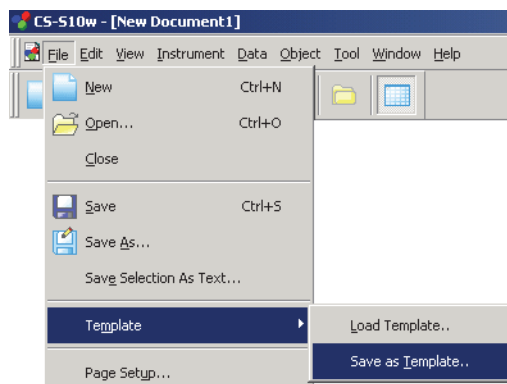

2. Wählen Sie „Template“ als Speicherort, geben Sie einen Dateinamen im Filename -Feld ein und klicken Sie auf Save .
Die Datei wird als Vorlagendatei im geschützten Dateiformat der CS-S10w-Software (mit der Dateierweiterung „.ctp“) gespeichert.

Die CS-S10w stellt die folgenden voreingestellten Vorlagen zur Verfügung, mit denen der Dokumententyp eingestellt werden kann:

Cont.ctp

Legt ein Dokument in Betriebsart Kontrast bei Punkt Lichtquellenfarbe fest, der im Dialog Welcome to CS-S10w ausgewählt wird.

Normal.ctp

Legt ein Dokument in Betriebsart Normal bei Punkt Lichtquellenfarbe fest, der im Dialog Welcome to CS-S10w ausgewählt wird.

Ref.ctp

Legt ein Dokument in Punkt Objektfarbe fest, der im Dialog Welcome to CS-S10w ausgewählt wird.

RGB.ctp

Legt ein Dokument in Betriebsart RGB bei Punkt Lichtquellenfarbe fest, der im Dialog Welcome to CS-S10w ausgewählt wird.


RGBCont.ctp

Legt ein Dokument in Betriebsart RGB & Kontrast bei Punkt Lichtquellenfarbe fest, der im Dialog Welcome to CS-S10w ausgewählt wird.

■ Verzeichnisstruktur der CS-S10w-Software

Die CS-S10w-Software wird in einem Ordner mit der folgenden Verzeichnisstruktur installiert.

KONICAMINOLTA

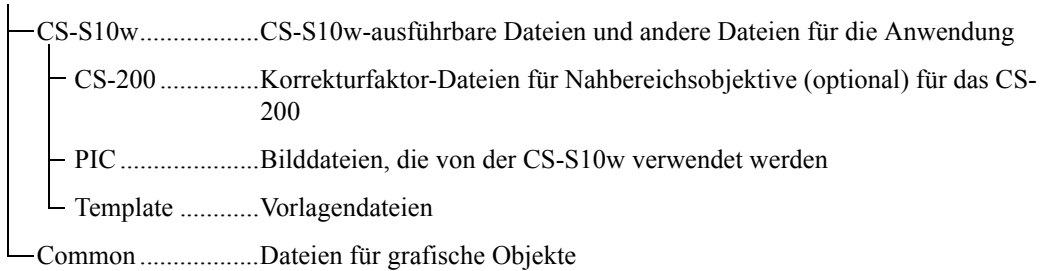


Wenn Sie eine Vorlage erstellen, speichern Sie diese im oben erwähnten Vorlagen-Ordner.

2.10.2 Verwendung einer Vorlagendatei

Sie können den Dokumenttyp ändern, indem Sie eine zuvor erstellte oder eine in der CS-S10w-Software enthaltene Vorlagendatei verwenden.

1. Wählen Sie *File - Template - Load Template* in der Menüleiste.
Das Dialogfenster Open erscheint.

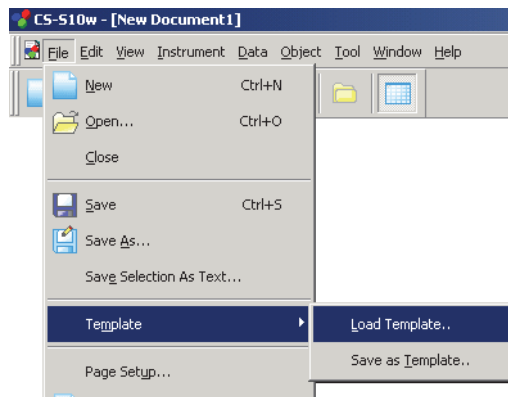


2. Wählen Sie eine Vorlagendatei und klicken Sie auf die Schaltfläche Open.

2.10.3 Einstellung von Programmstart Optionen

Sie können einstellen, ob das Messgerät verbunden werden soll, wenn die CS-S10w-Software gestartet wird.


1. Wählen Sie *File - Startup Options* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Startup Options erscheint.

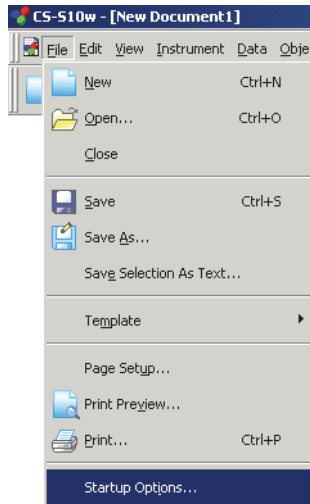

2. Stellen Sie die Startoptionen ein.

Ihre Auswahl wird für den nächsten Programmstart berücksichtigt.

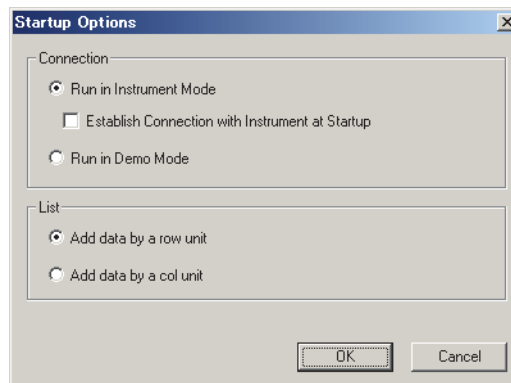

■ Dialogbox Startup Options

Connection

Run in Instrument Mode

Ist diese Option aktiviert, startet die CS-S10w automatisch im Messgeräte-Modus, der für die Verbindung mit einem Messgerät und zur Steuerung desselben dient.

Establish Connection with Instrument at Startup

Wird diese Option aktiviert, wird die Verbindung zum Messgerät, das für den letzten Einsatz verwendet wurde, bei Programmstart automatisch hergestellt.

Run in Demo Mode


Ist diese Option aktiviert, startet die CS-S10w-Software im Demo-Modus. In Betriebsart Demo kann die CS-S10w-Software so betrieben werden, als wäre das Messgerät angeschlossen, auch wenn dieses im Augenblick nicht angeschlossen ist. Wenn Sie versuchen, eine Messung durchzuführen, wird ein beliebiges Messwertergebnis angezeigt.

2.10.4 Datei öffnen

Sie können Dokumente (Dateien), die mit der CS-S10w-Software erstellt wurden, öffnen.


1. Wählen Sie *File - Open* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Open erscheint.

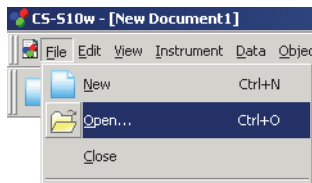

2. Geben Sie an, welche Art von Datei Sie öffnen möchten.

Die Dateinamen des angegebenen Dateityps werden angezeigt.

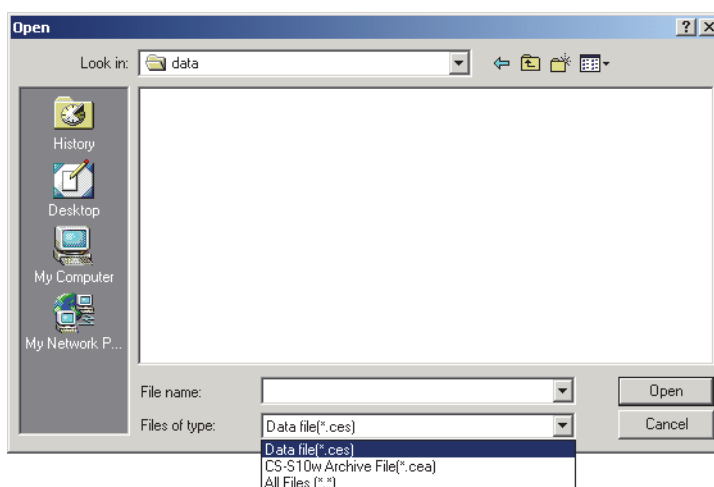

3. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf Open.

Wurde eine Datei mit der Listenanzeige Add data by a row unit mit mehr als 4.000 Daten erstellt und wird diese mit der Listenanzeige Add data by a col unit geöffnet, gehen Werte mit mehr als 4.000 Daten verloren.

Wenn die mit CS-S1w erstellte Datei geöffnet wird

Wenn Sie eine Datei auswählen, die mit CS-S1w erstellt wurde (Dateierweiterung: LMB, LMT, OMB, OMT, LKB, LKT, OKB, OKT oder DAT), und auf die Schaltfläche Open klicken, wird die Datei in eine Datei im CS-S10w-Format umgewandelt (Erweiterung: .ces). Die umgewandelte „ces“-Datei wird im selben Ordner wie die Originaldatei erstellt und geöffnet. Existiert bereits eine Datei unter diesem Namen, wird dem Namen der neuen Datei eine Tilde (~) vorangestellt. Die Anzahl an Tilden wird größer, so lange es eine Datei mit demselben Namen gibt.

Bei DAT-Dateien können nur Dateien geöffnet werden, die als Probandenliste oder als Bezugsdatenliste gespeichert wurden. Bitte beachten Sie, dass das System nicht erkennen kann, ob die Datei eine Liste mit Bezugsdaten oder eine Liste mit Messdaten enthält. Die Datei wird daher als eine Liste mit Messdaten umgewandelt.


Die CS-S10w kann bis zu 5.000 Daten mit einer Listenanzeige Add data by a row unit bzw. 4.000 Daten mit einer Listenanzeige Add data by a col unit speichern. Wenn daher eine mit der CS-S1w erstellte Datei mehr Daten enthält als diese Grenzwerte, wird sie in mehrere getrennte Dateien geteilt, die gleich viel oder weniger Daten als diese Grenzwerte enthalten.

2.10.5 Anordnen von Fenstern überlappend/nebeneinander

Werden zwei oder mehr Dateien geöffnet, können Sie einstellen, ob die Fenster überlappend oder nebeneinander angeordnet werden sollen.

1. Wählen Sie *Window - Cascade* oder *Tile* in der Menüleiste.

Die Fenster werden entweder überlappend oder nebeneinander dargestellt.

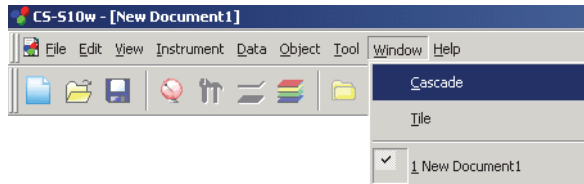


2.10.6 Ansicht der Einstellungen in jedem Fenster


Sie können Einstelldetails der Ansicht wie etwa die Hintergrundfarbe des Listenfensters, des Entwurf-Fensters (Display-Ansicht/Druck-Ansicht) und des Status-Fensters einstellen.

1. Wählen Sie *Tool - View Settings* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Display Settings erscheint.

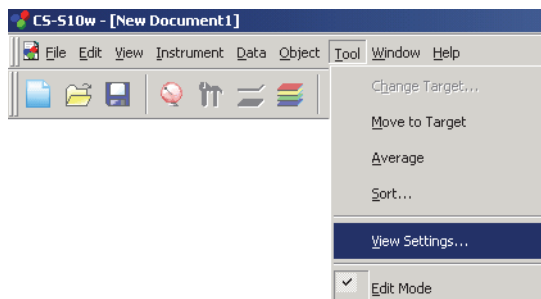

2. Legen Sie die Einstelldetails der Ansicht für jedes Fenster fest.

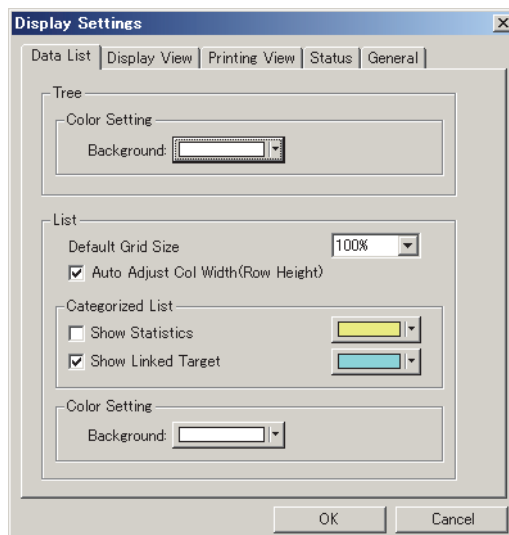

■ Dialogbox Display Settings

Registerkarte Data List

Tree

Color Setting

Background

Stellen Sie eine Hintergrundfarbe für das Baumdiagramm ein.

List

Default Grid Size

Legen Sie die Normalgröße für die Listenanzeige fest. Diese Einstellung wird als Standardgröße für Zoom In/Out verwendet (siehe Seite 90).

Auto Adjust Col Width (Row Height)

Wählen Sie diese Option, um die Spaltenbreite oder Reihenhöhe für den ersten Wert der Liste automatisch nach der Anzahl der angezeigten Stellen einzurichten.

Für die Spalten oder Reihen Data Name, Comment und Timestamp wird die Spaltenbreite oder Reihenhöhe automatisch eingestellt, auch wenn diese Option nicht aktiviert wurde.

Categorized List

Show Statistics

Aktivieren Sie diese Option, um eine Statistik in der Liste für einen Ordner anzuzeigen, wenn Sample - data(s) ausgewählt wurde. Die Farbe der Statistikzeile kann im Feld rechts ausgewählt werden.

Show Linked Target

Aktivieren Sie diese Option, um verknüpfte Bezugsdaten in der Liste für einen Ordner anzuzeigen, wenn Sample - data(s) ausgewählt wurde. Die Farbe der verknüpften Bezugszeile kann im Feld rechts ausgewählt werden.

Color Setting

Background

Stellen Sie eine Hintergrundfarbe für die Liste ein.

Registerkarte Display View, Registerkarte Printing View

Graphics Window

Color Setting

Background

Sie können die Hintergrundfarbe der Display-Ansicht einstellen.

Grid

Show Grid

Wenn diese Option aktiviert ist, wird im Hintergrund des Fensters im Bearbeitungsmodus ein Gitter angezeigt. Sie können die Farbe des Gitters im Feld rechts einstellen. Eine Beschreibung der Farbeinstellung finden Sie im folgenden Abschnitt.

Registerkarte Status

Status Window

Color Setting

Background


Sie können die Hintergrundfarbe des Statusfensters einstellen.

Registerkarte General

Screen Mode

Allow editing canvas window

Ist diese Option aktiviert, kann der Befehl *Edit Mode* unter *Tool* in der Menüleiste ausgewählt werden. Ist diese Option nicht aktiviert, kann nicht zwischen dem Modus Bearbeiten und dem Modus Betrieb hin- und hergeschaltet werden.

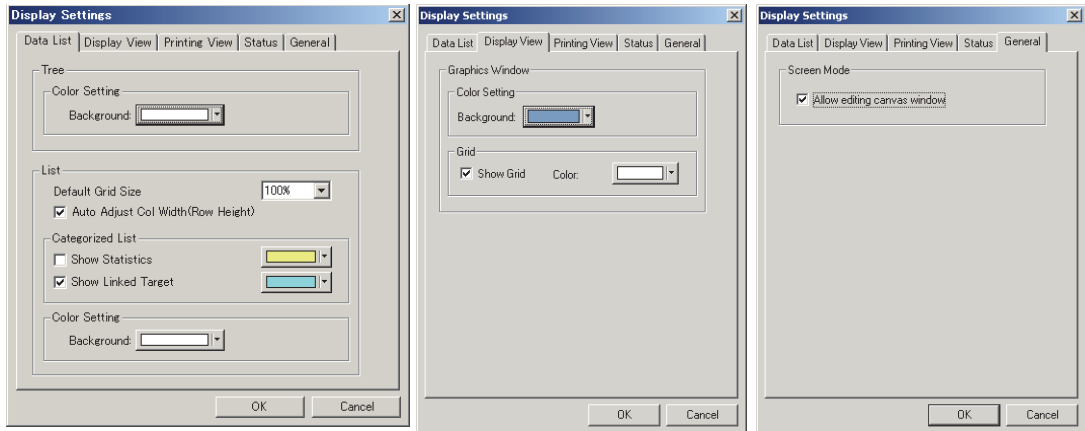

2.10.7 Color Setting

Die Schaltfläche Color erscheint, damit Sie Farben einstellen können. 


1. Klicken Sie auf Color.

Um eine Farbe auszuwählen, die nicht in der Palette enthalten ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Other.



2. Wählen Sie eine Farbe aus der Palette oder erstellen Sie die gewünschte Farbe.


Wird die Schaltfläche Other geklickt, erscheint die Dialogbox Color.

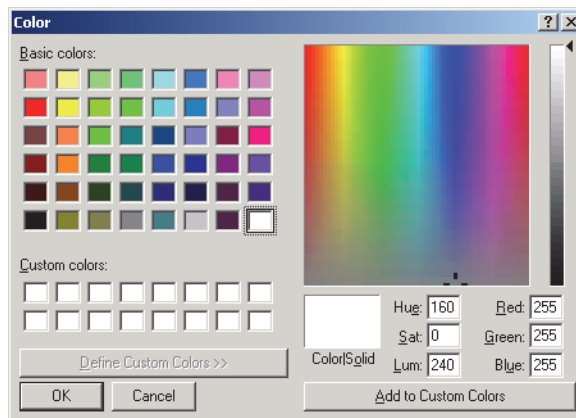


2.10.8 Einstelloptionen

1. Wählen Sie *Tool - Option* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Option erscheint.

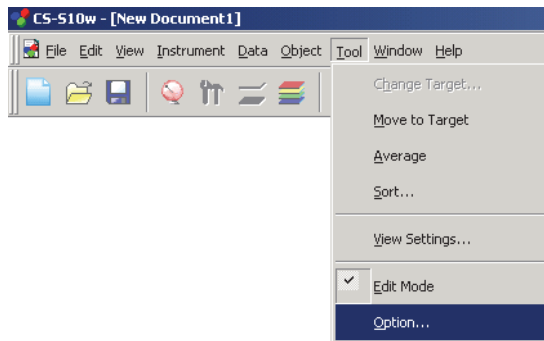

2. Stellen Sie akustische Signale, Datei-bezogene Funktionen und Listenerweiterungsfunktionen nach Bedarf ein.

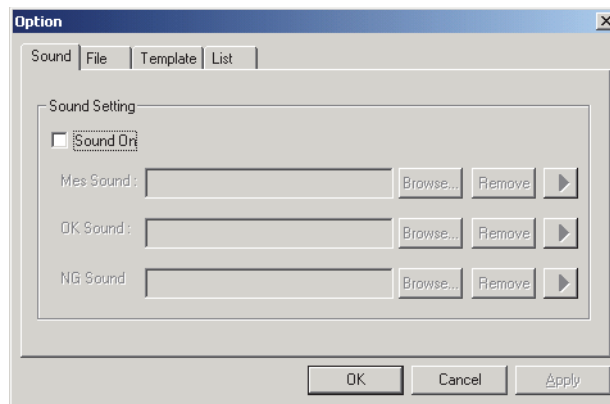

■ Dialogbox Option

Registerkarte Sound

Akustische Signale werden während der Messung im WAV-Format ausgegeben.

Sie können ein akustisches Signal als Antwort auf ein bestimmtes Ergebnis während der Bewertung ertönen lassen.

Registerkarte File

File Path Setting

Load

Stellen Sie den Standard-Dateipfad ein, der angezeigt wird, wenn *File - Open* in der Menüleiste ausgewählt wird.

Template

Der Dateipfad, der zur Vorlagendatei weist, kann geändert werden. Stellen Sie den Standard-Dateipfad ein, der angezeigt wird, wenn *File - Template - Load Template* in der Menüleiste ausgewählt wird.

Auto Save Setting

Auto Save On

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Dateien automatisch gesichert. Dem Namen der Sicherungsdatei wird „~“ (Tilde) vorgestellt.

Registerkarte Template

Template Path Setting

Normal

Stellen Sie den Standard-Dateipfad ein, der angezeigt wird, wenn *File – Template – Load Template* in der Menüleiste in Betriebsart Normal bei Punkt Lichtquellenfarbe ausgewählt wird.

Contrast

Stellen Sie den Standard-Dateipfad ein, der angezeigt wird, wenn *File – Template – Load Template* in der Menüleiste in Betriebsart Kontrast bei Punkt Lichtquellenfarbe ausgewählt wird.

RGB

Stellen Sie den Standard-Dateipfad ein, der angezeigt wird, wenn *File – Template – Load Template* in der Menüleiste in Betriebsart RGB bei Punkt Lichtquellenfarbe ausgewählt wird.

RGB & Contrast

Stellen Sie den Standard-Dateipfad ein, der angezeigt wird, wenn *File – Template – Load Template* in der Menüleiste in Betriebsart RGB & Kontrast bei Punkt Lichtquellenfarbe ausgewählt wird.

Object Color

Stellen Sie den Standard-Dateipfad ein, der angezeigt wird, wenn *File – Template – Load Template* in der Menüleiste bei Objektfarbenmessung ausgewählt wird.

Stellen Sie die Vorlagendatei zusammen, die verwendet wird, wenn jede Betriebsart ausgewählt wird.

Registerkarte List

List Expansionary Setting

Add Header to Top of Copy Text

Wenn die Daten in der Liste ausgewählt und kopiert werden, während diese Option aktiviert ist, so werden auch die Zeichen am Anfang mitkopiert.

Replace rows with cols at the time of „Save Selection As Text“

Ist diese Option aktiviert und werden die ausgewählten Daten als Textdaten gespeichert, werden die Daten in den Reihen der Listen-Merkmale durch jene in den Spalten ersetzt.

Save spectral data at the time of „Save Selection As Text“

Ist diese Option aktiviert und werden die ausgewählten Daten als Textdaten gespeichert, werden nur Spektraldaten gespeichert. Gespeichert wird auch dann, wenn es gar keine Spektraldaten in den Listen-Merkmalen gibt.

Row Select On

Wenn diese Option aktiviert ist, wird durch Anklicken eines beliebigen Punktes in der Liste jene Zeile ausgewählt, in der sich der angeklickte Punkt befindet.

Luminance units

Stellen Sie die Leuchtdichte-Einheit entweder auf cd/m^2 oder ft-L . Der Lv -Wert wird in der mit dieser Option ausgewählten Einheit berechnet.


2.10.9 Übermittlung von Dateien per E-Mail

Eine Datei kann als Anhang per E-Mail versendet werden.

1. Wählen Sie *File - Send Mail* in der Menüleiste.

Bei einigen E-Mail-Programmen kann eine Dialogbox zur Einstellung von Parametern erscheinen.
Stellen Sie jeden Parameter entsprechend ein.

Das Fenster für das Versenden von E-Mails wird geöffnet.

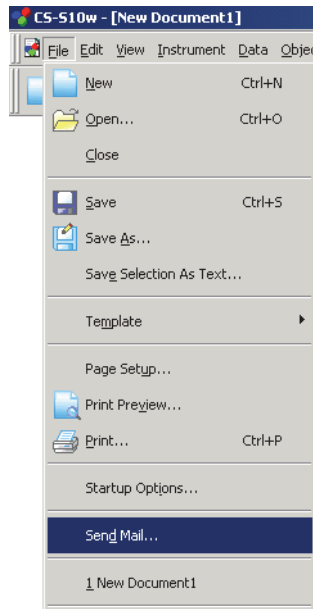

2. Geben Sie den Empfänger und Betreff ein und senden Sie die Mail.

2.10.10 Einstellung Benutzerkalibrierung

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn andere Modelle als das CS-100A am Computer angeschlossen sind.

Wenn das CS-2000/2000A angeschlossen ist


Zwei Arten von Benutzerkalibrierung sind für das CS-2000/2000A verfügbar: Wavelength Calibration (Wellenlängen-Kalibrierung) und Level Calibration (Pegel-Kalibrierung).

Mit Wavelength Calibration wird die Wellenlänge der Daten kalibriert, die mit dem CS-2000 gemessen wurden. Zum Beispiel können Sie bei der Messung von Emissionslinien die Position der Wellenlängenchse so verschieben, dass die Position der gemessenen maximalen Wellenlänge oder der Länge von Schwerewellen Ihrem voreingestellten Wert entspricht.

Mit Level Calibration wird die spektrale Empfindlichkeit kalibriert. Zum Beispiel können Sie die spektrale Empfindlichkeit so korrigieren, dass die spektrale Wellenform des Messwerts jener entspricht, die sie eingestellt haben. Durch die Einstellung eines Kalibrierwerts für das Messgerät können Sie Ihren eigenen Korrekturfaktor in einem Kalibrierkanal eintragen. Mit der Auswahl des Kalibrierkanals vor der Messung können Sie Probendaten ermitteln, die anhand des eingetragenen Korrekturfaktors korrigiert worden sind.


1. Wählen Sie *Instrument - User Calibration* in der Menüleiste.

Die Dialogbox User Calibration erscheint.

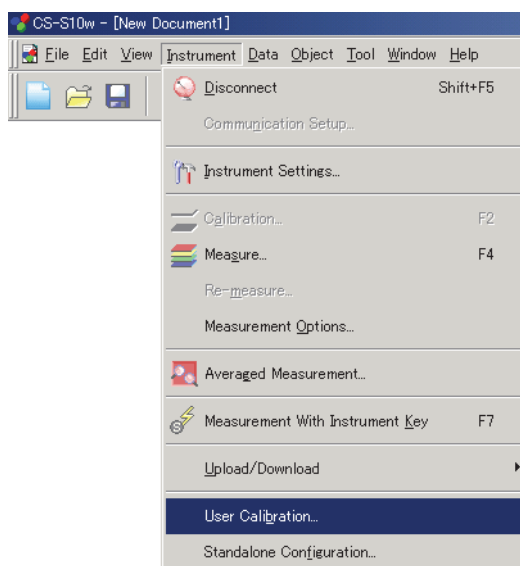

2. Wählen Sie in der Datenliste einen Kalibrierkanal, für den Sie einen Korrekturfaktor einstellen wollen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Load, um die Dialogbox zu öffnen. Wählen Sie die Datei aus, in der die zuvor gespeicherten Kalibrierwerte abgelegt sind, und klicken Sie auf Open.
4. Klicken Sie auf OK, um die Daten für den unter Schritt 2 ausgewählten Kalibrierkanal in das Messgerät zu laden.

■ Dialogbox User Calibration (Wenn das CS-2000/2000A angeschlossen ist)

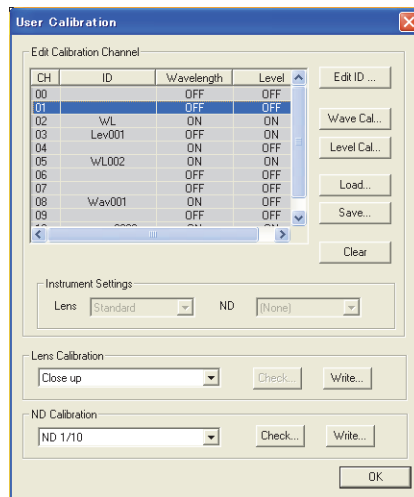

Edit Calibration Channel

Edit ID

Bearbeiten Sie die ID für den ausgewählten Kalibrierkanal. Sie können Kalibrierkanäle zwischen CH01 und CH10 auswählen und bis zu 10 Zeichen verwenden. Es sollten ausschließlich Zahlen und/oder Ziffern verwendet werden, da sonstige Zeichen auf dem Gerät möglicherweise nicht richtig dargestellt werden.

Wave Cal

Führen Sie die Wellenlängen-Kalibrierung für den ausgewählten Kalibrierkanal aus. Wenn Wavelength und Level auf OFF (AUS) gestellt sind, ist diese Option für die Kalibrierkanäle CH01 bis CH10 auswählbar.

Die Anleitung zur Durchführung der Wellenlängen-Kalibrierung finden Sie auf Seite 131.

Level Cal

Führen Sie die Pegelkalibrierung für den ausgewählten Kalibrierkanal aus. Wenn Level auf OFF (AUS) gestellt ist, ist diese Option für die Kalibrierkanäle CH01 bis CH10 auswählbar.

Die Anleitung zur Durchführung der Pegelkalibrierung finden Sie auf Seite 131.

Load

Die angegebene Datei (Dateierweiterung: .ucf) wird gelesen, und die ID, der Faktor für die Wellenlängen-Kalibrierung sowie der Faktor für die Pegel-Kalibrierung des ausgewählten Kalibrierkanals werden ins Messgerät geladen.

Save

Die Sicherungskopie des Datensatzes aus ID, Faktor für Wellenlängen-Kalibrierung sowie Faktor für Pegel-Kalibrierung des ausgewählten Kalibrierkanals wird in der angegebenen Datei gespeichert (Dateierweiterung: .ucf).

Clear

Die Informationen zum ausgewählten Kalibrierkanal werden aus dem Messgerät gelöscht. Diese Option ist auswählbar für die Kalibrierkanäle CH01 bis CH10.

(Instrument Settings) Lens

Den derzeit für das Messgerät festgelegten Objektivtyp anzeigen. [Eine Bearbeitung ist nicht möglich]

(Instrument Settings) ND


Den derzeit für das Messgerät festgelegten ND-Filter anzeigen. [Eine Bearbeitung ist nicht möglich]

Wenn das CS-200 angeschlossen ist

Durch die Einstellung eines Kalibrierwerts für das Messgerät können Sie Ihren eigenen Korrekturfaktor in einem Kalibrierkanal eintragen. Mit der Auswahl des Kalibrierkanals vor der Messung können Sie Probendaten ermitteln, die anhand des eingetragenen Korrekturfaktors korrigiert worden sind.

1. Wählen Sie *Instrument - User Calibration* in der Menüleiste.

Die Dialogbox User Calibration erscheint.

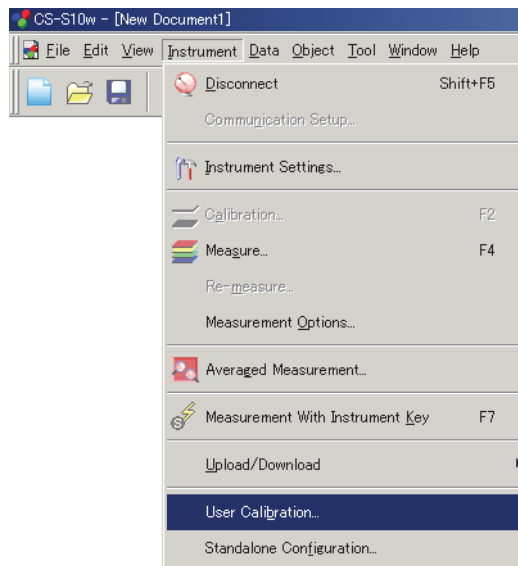

2. Wählen Sie in der Datenliste einen Kalibrierkanal, für den Sie einen Korrekturfaktor einstellen wollen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Load, um die Dialogbox zu öffnen. Wählen Sie die Datei aus, in der die zuvor gespeicherten Kalibrierwerte abgelegt sind, und klicken Sie auf Open.
4. Klicken Sie auf OK, um die Daten für den unter Schritt 2 ausgewählten Kalibrierkanal in das Messgerät zu laden.

■ Dialogbox User Calibration (Wenn das CS-200 angeschlossen ist)

CH	ID	Mode	Observer
00	(DEFAULT)	Default	
01	(DEFAULT)	Default	10 degree
02	(DEFAULT)	Default	10 degree
03	(DEFAULT)	Default	10 degree
04	(DEFAULT)	Default	
05	(DEFAULT)	Default	
06	(DEFAULT)	Default	
07	(DEFAULT)	Default	
08	(DEFAULT)	Default	
09	(DEFAULT)	Default	
10	(DEFAULT)	Default	
11	(DEFAULT)	Default	
12	(DEFAULT)	Default	
13	(DEFAULT)	Default	
14	(DEFAULT)	Default	

Edit Calibration Channel

Edit ID

Bearbeiten Sie den ID-Namen für den ausgewählten Kalibrierkanal. Sie können Kalibrierkanäle zwischen CH01 und CH20 auswählen und bis zu 9 Zeichen verwenden.

Single Cal

Führen Sie die Benutzerkalibrierung für den ausgewählten Kalibrierkanal aus. Sie können diese Option für die Kalibrierkanäle CH01 – CH20 auswählen, wenn die Beobachter-Einstellung jener des Messgeräts entspricht oder nicht definiert wurde.

Für den Arbeitsablauf zur Durchführung der Benutzerkalibrierung siehe Seite 131.

Load

Die ausgewählte Datei wird gelesen; Kalibrierwert, ID-Name und Bezug werden in den ausgewählten Kalibrierkanal geschrieben.

Save

Die Sicherung des Kalibrierwerts, ID-Name und Bezug des ausgewählten Kalibrierkanals wird in der ausgewählten Datei gespeichert.

Clear

Die Informationen zum ausgewählten Kalibrierkanal werden auf die Standard-Einstellung zurückgesetzt. Diese Option ist auswählbar für die Kalibrierkanäle CH01 bis CH20.

Clear All

Die Informationen zu allen Kalibrierkanälen werden auf die Standard-Einstellung zurückgesetzt.

Wenn das CS-1000 angeschlossen ist

Zwei Arten von Benutzerkalibrierung sind für das CS-1000 verfügbar: Wavelength Calibration und Level Calibration.


Mit Wavelength Calibration wird die Wellenlänge der Daten kalibriert, die mit dem CS-1000 gemessen wurde. Zum Beispiel können Sie bei der Messung von Emissionslinien die Position der Wellenlängenchse so verschieben, dass die Position der gemessenen maximalen Wellenlänge oder der Länge von Schwerewellen Ihrem voreingestellten Wert entspricht.

Mit der Level Calibration wird die spektrale Empfindlichkeit kalibriert. Zum Beispiel können Sie die spektrale Empfindlichkeit so korrigieren, dass die spektrale Wellenform des Messwerts jener entspricht, die sie eingestellt haben.

- Da mit der Funktion Benutzerkalibrierung der CS-S10w jene Messdaten kalibriert werden, die vom CS-1000 in einen PC überspielt werden, erfolgen alle Berechnungen für die Benutzerkalibrierung am PC. Beim CS-1000 wird keine Berechnung für die Benutzerkalibrierung durchgeführt. Somit kann mit dem CS-1000 die Funktion Benutzerkalibrierung nicht alleine ausgeführt werden.
- Sobald die Benutzerkalibrierung durchgeführt wurde, können die ursprünglichen Messdaten nicht mehr wieder hergestellt werden.
- Die Benutzerkalibrierung kann nur durchgeführt werden, wenn sich der Dokumententyp in Betriebsart Lichtquellenfarbe befindet.

1. Wählen Sie *Instrument - User Calibration* in der Menüleiste.

Die Dialogbox User Calibration erscheint.

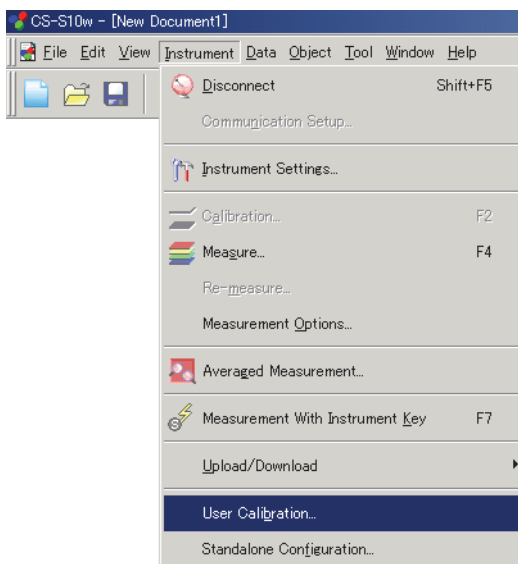

2. Um die Kalibrierung der Wellenlänge einzustellen, klicken Sie bei Wavelength auf die Schaltfläche Load. Wenn die Dialogbox Open erscheint, wählen Sie einen Kalibrierwert, den Sie von den Kalibrierwerten, die im Speicher abgelegt sind, anzeigen wollen, und klicken Sie auf Load.
3. Wählen Sie bei Wavelength ON.
4. Um die Kalibrierung des Pegels einzustellen, klicken Sie bei Level auf die Schaltfläche Load. Wenn die Dialogbox Open erscheint, wählen Sie einen Kalibrierwert, den Sie von den Kalibrierwerten, die im Speicher abgelegt sind, anzeigen wollen, und klicken Sie auf Load.
5. Wählen Sie bei Level ON.
6. Klicken Sie auf OK und die Einstellung für Benutzerkalibrierung wird durchgeführt.

■ Dialogbox User Calibration (Wenn das CS-1000 angeschlossen ist)

The dialog box 'User Calibration' is organized into several sections. The 'Wavelength' section includes an 'OFF' (selected) or 'ON' radio button, a 'Tag/Comment' area with 'Tag' and 'Comment' text boxes, and 'Load...', 'Save...', 'Calibrate...', and 'Clear' buttons. The 'ND' section has an 'OFF' (selected) or 'ON' radio button, a 'Tag' text box, and 'Load...' and 'Clear' buttons. The 'Level' section has an 'OFF' (selected) or 'ON' radio button, a 'Tag/Comment' area with 'Tag' and 'Comment' text boxes, and 'Load...', 'Save...', 'Calibrate...', and 'Clear' buttons. Below these is the 'Level Calibration Coefficient Property' section with 'Wavelength' and 'Correct ND' text boxes. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Wellenlänge

ON/OFF

Stellen Sie ein, ob die Kalibrierung durchgeführt werden soll oder nicht. Wird kein Kalibrierwert eingestellt, stellen Sie OFF ein. Sie können ON nicht auswählen.

Tag / Comment

Die Markierung bzw. der Kommentar zum Kalibrierwert wird angezeigt. Die Markierung zeigt Datum und Uhrzeit der Kalibrierung an. Eine Bearbeitung ist nicht möglich. Der Kommentar kann je nach Wunsch eingestellt werden, ist jedoch auf 32 Zeichen beschränkt.

Load

Die Kalibrierwert-Datei (mit der Erweiterung .wcf) wird abhängig vom ausgewählten Pfad geladen. Der Inhalt des Felds Tag/Comment wird aktualisiert.

* Eine mit der CS-S1w Software erstellte Datei kann ebenfalls geladen werden.

Save

Die Kalibrierwert-Datei (mit der Erweiterung .wcf) wird je nach ausgewähltem Pfad gespeichert.

Calibrate

Die Kalibrierung der Wellenlänge wird ausgeführt. Diese Schaltfläche ist aktiv, wenn OFF für alle Kalibrierarten ausgewählt wurde.

Details zur Durchführung der Benutzerkalibrierung finden Sie auf Seite 131. Nachdem die Kalibrierung ausgeführt wurde, wird der Inhalt des Felds Tag/Comment aktualisiert.

Clear

Der Kalibrierwert wird auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

Level

ON/OFF

Stellen Sie ein, ob die Kalibrierung durchgeführt werden soll oder nicht. Wird kein Kalibrierwert eingestellt, stellen Sie OFF ein. Sie können ON nicht auswählen.

Tag / Comment

Die Markierung bzw. der Kommentar zum Kalibrierwert wird angezeigt. Die Markierung zeigt Datum und Uhrzeit der Kalibrierung an. Eine Bearbeitung ist nicht möglich. Der Kommentar kann je nach Wunsch eingestellt werden, ist jedoch auf 32 Zeichen beschränkt.

Load

Die Kalibrierwert-Datei (mit der Erweiterung .lcf) wird abhängig vom ausgewählten Pfad geladen. Der Inhalt des Felds Tag/Comment wird aktualisiert.

Save

Die Kalibrierwert-Datei (mit der Erweiterung .lcf) wird je nach ausgewähltem Pfad gespeichert.

Calibrate

Die Kalibrierung des Pegels wird ausgeführt. Der Kalibrier-Status (wavelength/ND) wird unmittelbar vor der Kalibrierung überprüft; ein dem Status entsprechender Kalibrierwert wird eingestellt und die Kalibrierung beginnt.

Details zur Durchführung der Benutzerkalibrierung finden Sie auf Seite 131. Nachdem die Kalibrierung ausgeführt wurde, wird der Inhalt des Felds Tag/Comment aktualisiert.

Clear

Der Kalibrierwert wird auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

Level Calibration Coefficient Property

Wird ON ausgewählt und die Pegel-Kalibrierung mithilfe der Wellenlänge-Kalibrierung und/oder der ND-Korrektur durchgeführt, werden Informationen zur Wellenlänge-Kalibrierung und/oder ND-Korrektur angezeigt.

2.10.11 Laden von Bezugsdaten in das Messgerät


Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn andere Modelle als das CS-100A am Computer angeschlossen sind.

Dieser Vorgang ist nur freigegeben, wenn Betriebsart Normal bei Lichtquellenfarbe ausgewählt wurde.

1. Öffnen Sie im Listenfenster einen Ordner durch Auswahl von Target – Target(s), wählen Sie die zu überspielenden Bezugsdaten aus und gehen Sie auf *Instrument - Upload/Download - Download Target* in der Menüleiste.


Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bezugsdaten und wählen Sie *Download Target* im angezeigten Kontextmenü.

Die Dialogbox Download Target erscheint. Sie können mehrere Bezüge auswählen und nacheinander laden.

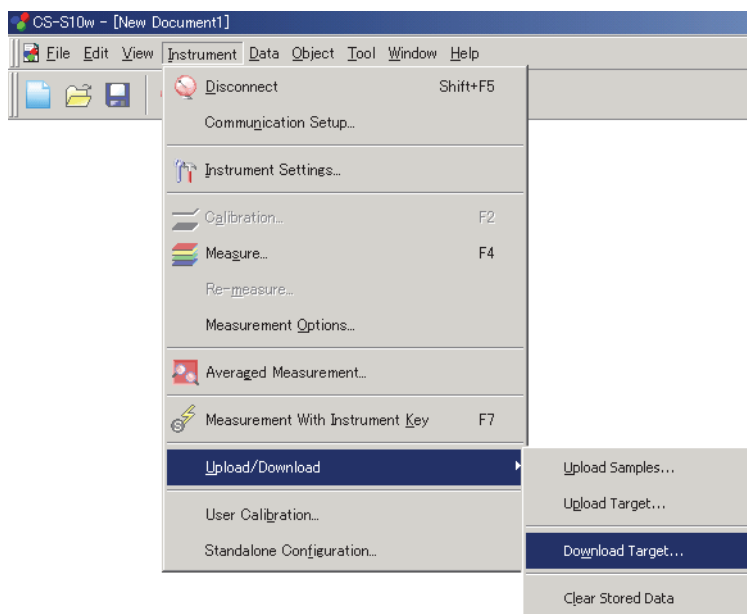

2. Stellen Sie die Details für die in das Messgerät geladenen Bezugsdaten ein.
3. Klicken Sie auf OK, um die Daten in das Messgerät zu laden.

■ Dialogbox Download Target (Wenn das CS-2000/2000A angeschlossen ist)

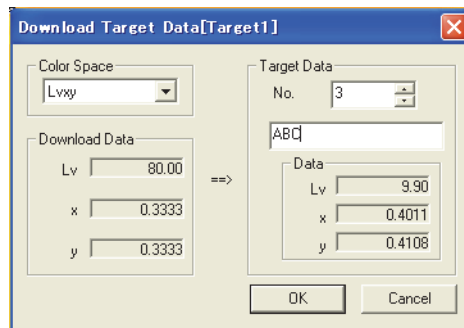

Color Space

Wählen Sie eine Einstellung aus L_vxy , $L_vu'v'$ und XYZ.

Download Data

Die zu schreibenden Daten werden in der in Punkt Farbsystem ausgewählten Betriebsart Color Space angezeigt.

Target Data

Wählen Sie in der Combo-Box No. (Nummer) für die Eintragung einen Wert zwischen 1 und 20. Geben Sie bei Target Data (Bezugsdaten) in das Textfeld unterhalb der Combo-Box No. (Nummer) den Namen der Daten ein, die in das Messgerät geladen werden sollen. Per Standardvorgabe werden in das Messgerät geladene Zeichenketten angezeigt. Sie können bis zu 10 Zeichen verwenden. Es sollten ausschließlich Zahlen und/oder Ziffern verwendet werden, da sonstige Zeichen auf dem Gerät möglicherweise nicht richtig dargestellt werden.

Der eingetragene Wert für die ausgewählte Nummer wird unterhalb des Textfelds bei Data (Daten) im ausgewählten Farbsystem-Modus angezeigt. Wenn für die Nummer kein Wert gespeichert ist, wird „-----“ angezeigt.

■ Dialogbox Download Target (Wenn das CS-200 angeschlossen ist)

Color Space

Wählen Sie eine Einstellung aus L_vxy , $L_vu'v'$ und XYZ.

Download Data

Die zu schreibenden Daten werden in der in Punkt Farbsystem ausgewählten Betriebsart Color Space angezeigt.

Target Data

Die Combo-Box zeigt Kalibrierkanäle in der Form „CH-Nummer : ID Name“. Wählen Sie einen Kalibrierkanal zwischen CH01 und CH20. Die Bezugsfarbe wird in den ausgewählten Kalibrierkanal geschrieben.

Die Text-Box unter der Combo-Box zeigt das Speicherdatum an. Die Datenfelder zeigen die erfassten Daten, wobei sich der ausgewählte Kalibrierkanal im ausgewählten Farbsystem-Modus befindet. Sind keine Daten vorhanden, wird „-----“ angezeigt.

■ Dialogbox Download Target (Wenn das CS-1000 angeschlossen ist)

Alle Werte werden beim Messgerät als Farbwerte eingetragen.

Color Space

Treffen Sie eine Auswahl aus L_vxy , $L_vu'v'$ und XYZ.

Download Data

Die zu schreibenden Daten werden in der in Punkt Farbsystem ausgewählten Betriebsart Color Specification angezeigt.

Target Data

Wählen Sie in der Combo Box Target Data No. für die Eintragung einen Wert zwischen 01 und 20.

Der eingetragene Wert für die ausgewählte Anzahl wird bei Data unter der Combo Box angezeigt. Wird für die Anzahl kein Wert eingetragen, wird „-----“ angezeigt.

2.10.12 Hinzufügen eines Objektivtyps/ND-Korrektur


Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn andere Modelle als das CS-100A am Computer angeschlossen sind.

Um ein Objektiv, wie zum Beispiel ein Nahbereichsobjektiv und einen ND-Filter, aufzusetzen, müssen Sie den Messwert korrigieren. Ist das CS-100 angeschlossen, sind für die optionalen Zubehör-Nahbereichsobjektive Nr. 107 und Nr. 122 die Korrekturfaktoren bereits am Messgerät voreingetragen als „No. 107“ und „No. 122“. Darüber hinaus können Sie Objektivtypen als „User 1“, „User 2“ und „User 3“ hinzufügen. Folgen Sie dem unten angeführten Arbeitsablauf und tragen Sie den Korrekturfaktor ein, der für das gewünschte Objektiv, den optional erhältlichen ND-Filter CS-A6 (1/10) oder CS-A7 (1/100) bzw. für beide, also Nahbereichsobjektiv und ND-Filter, zu verwenden ist.

Wenn das CS-2000/2000A angeschlossen ist

1. Wählen Sie *Instrument - User Calibration* in der Menüleiste.

Die Dialogbox User Calibration erscheint.

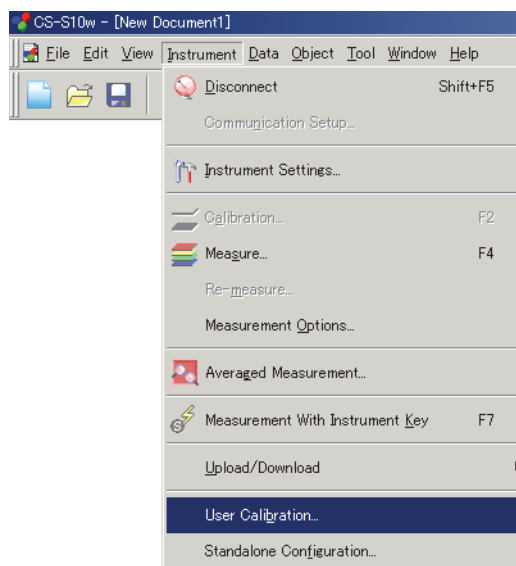


2. Um den Korrekturfaktor für ein Nahbereichsobjektiv zu registrieren, klicken Sie unter Lens Calibration (Objektivkalibrierung) auf die Schaltfläche Write (Schreiben).
Um einen Korrekturfaktor für einen ND-Filter zu registrieren, wählen Sie aus der Combo-Box ND Calibration den ND-Filter aus, den Sie registrieren möchten, und klicken Sie dann unter ND Calibration auf die Schaltfläche Write (Schreiben).
3. Laden Sie eine Datei für einen Korrekturfaktor, der bereits im Speicher abgelegt wurde.
4. Klicken Sie auf OK, um die Daten in das Messgerät zu laden.

Wenn das CS-200 angeschlossen ist

1. Wählen Sie *Instrument - User Calibration* in der Menüleiste.

Die Dialogbox User Calibration erscheint.

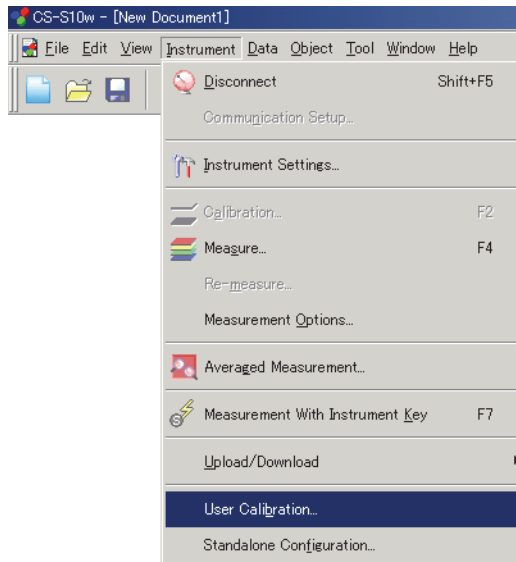

2. Klicken Sie unter Lens/ND correction (Objektiv/ND-Korrektur) rechts vom Textfeld Lens (Objektiv) auf die Schaltfläche Load (Laden) und laden Sie eine bereits gespeicherte Objektivfaktordatei.
3. Legen Sie den Zielpunkt im Bereich Select field fest und klicken Sie auf die Schaltfläche Write. Der Korrekturfaktor wird in das Messgerät überspielt.


Wenn das CS-1000 angeschlossen ist

1. Wählen Sie *Instrument - User Calibration* in der Menüleiste.

Die Dialogbox User Calibration erscheint.

2. Klicken Sie unter ND auf die Schaltfläche „Load“ (Laden), um die Dialogbox Open (Öffnen) anzuzeigen. Laden Sie eine Datei für einen Korrekturfaktor, der bereits im Speicher abgelegt wurde.
3. Wählen Sie unter ND die Einstellung ON (EIN).
4. Klicken Sie auf OK und die Einstellung für ND-Korrektur wird durchgeführt.

■ Dialogbox User Calibration (Wenn das CS-2000/2000A angeschlossen ist)

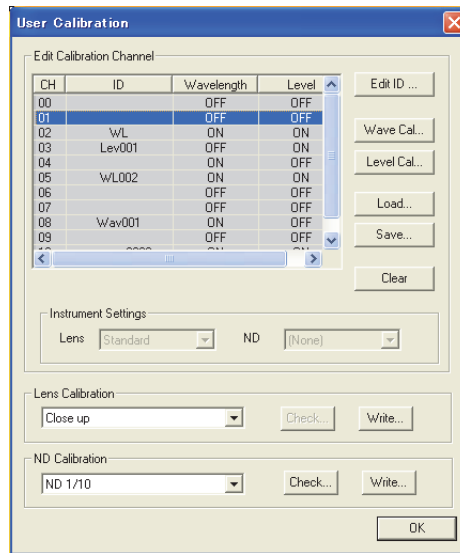

Lens Calibration

Wenn Sie das optional erhältliche Nahbereichsobjektiv CS-A35 verwenden und einen Korrekturfaktor registrieren möchten, wählen Sie in der Combo-Box Close up (Nahbereich).

Check

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Korrekturfaktor anzuzeigen, der für das in der Combo-Box angegebene Objektiv festgelegt ist (d. h. den Korrekturfaktor, der derzeit im Messgerät registriert ist).

Write

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Dialogbox Open (Öffnen) anzuzeigen. Die in dieser Dialogbox angegebene Datei (Dateierweiterung: .lcf) wird zunächst in den PC und anschließend in das Messgerät geladen.

Beim Objektivkorrekturfaktor muss es sich um eine Textdatei mit 401 Datenelementen handeln.

ND Calibration

Wählen Sie in der Combo-Box entweder ND1/10 oder ND1/100.

Wenn Sie Daten für den optional erhältlichen ND-Filter CS-A33 (1/10) registrieren, wählen Sie ND 1/10. Wenn Sie Daten für den optional erhältlichen ND-Filter CS-A34 (1/100) registrieren, wählen Sie ND1/100.

Check

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Korrekturfaktor anzuzeigen, der für den in der Combo-Box angegebenen ND-Filter festgelegt ist (d. h. den Korrekturfaktor, der derzeit im Messgerät registriert ist).

Write

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Dialogbox Open (Öffnen) anzuzeigen. Die in dieser Dialogbox angegebene Datei (Dateierweiterung: .ncf) wird zunächst in den PC und anschließend in das Messgerät geladen.

Beim Korrekturfaktor für den ND-Filter muss es sich um eine Textdatei mit 401 Datenelementen handeln.

■ Dialogbox User Calibration (Wenn das CS-200 angeschlossen ist)

CH	ID	Mode	Observer
00	(DEFAULT)	Default	
01	(DEFAULT)	Default	10 degree
02	(DEFAULT)	Default	10 degree
03	(DEFAULT)	Default	10 degree
04	(DEFAULT)	Default	
05	(DEFAULT)	Default	
06	(DEFAULT)	Default	
07	(DEFAULT)	Default	
08	(DEFAULT)	Default	
09	(DEFAULT)	Default	
10	(DEFAULT)	Default	
11	(DEFAULT)	Default	
12	(DEFAULT)	Default	
13	(DEFAULT)	Default	
14	(DEFAULT)	Default	

Objektiv/ND-Korrektur

Lens/ND

Diese Auswahlkästchen können erst bearbeitet werden, wenn Sie eine Datei durch Verwendung der Schaltfläche Load festlegen. Aktivieren Sie das entsprechende Kästchen, um auszuwählen, ob der Wert als Korrekturfaktor verwendet werden soll.

Load

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Korrekturfaktor-Datei zu laden.

Für ein Objektiv sollte der Korrekturfaktor eine Textdatei mit Daten von 40 Sensoren sein. Für den ND-Filter sollte der Korrekturfaktor eine Textdatei mit 401 Datensätzen sein.

Die Korrekturfaktor-Dateien für die optional erhältlichen Nahbereichs-Objektive Nr. 107 und Nr. 122 werden in der CS-S10w mit den Namen „107.lcf“ und „122.lcf“ gespeichert. (siehe Seite 101).

Clear

Diese Schaltfläche ist aktiv, wenn eine Datei referenziert wird. Die Dateieinstellung wird mit einem Klick auf diese Schaltfläche gelöscht.

Select field

Wählen Sie aus User 1, User 2 oder User 3 einen aus.

Comment

Bis zu 18 Zeichen können verwendet werden.

Lens/ND

Das jeweilige Auswahlkästchen wird aktiviert, um anzuzeigen, ob der Korrekturfaktor für ein Objektiv oder ein ND-Filter verwendet wird.

Write

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche wird der Korrekturfaktor in das Messgerät überspielt.

Clear

Diese Schaltfläche wird aktiv, sobald ein Korrekturfaktor für den in der Combo-Box eingestellten Objektivtyp eingetragen wird. Mit einem Klick auf diese Schaltfläche wird der in das Messgerät überspielte Korrekturfaktor zurückgesetzt.

■ Dialogbox User Calibration (Wenn das CS-1000 angeschlossen ist)

The 'User Calibration' dialog box is organized into several sections:

- Wavelength:** Includes radio buttons for 'OFF' and 'ON'. To the right are fields for 'Tag' and 'Comment', and buttons for 'Load...', 'Save...', 'Calibrate...', and 'Clear'.
- ND:** Includes radio buttons for 'OFF' and 'ON'. To the right is a 'Tag' field and buttons for 'Load...' and 'Clear'.
- Level:** Includes radio buttons for 'OFF' and 'ON'. To the right are fields for 'Tag' and 'Comment', and buttons for 'Load...', 'Save...', 'Calibrate...', and 'Clear'.
- Level Calibration Coefficient Property:** Includes fields for 'Wavelength' and 'Correct ND'.

At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Cancel' buttons.

ND

ON/OFF

Stellen Sie ein, ob die ND-Kalibrierung durchgeführt werden soll oder nicht. Wird kein Korrekturfaktor eingestellt, stellen Sie OFF ein. Sie können ON nicht auswählen.

Tag

Die dem Korrekturfaktor zugewiesene Markierung wird angezeigt.

Load

Die Korrekturfaktor-Datei (mit der Erweiterung .ncf) wird abhängig vom ausgewählten Pfad geladen. Der Inhalt des Felds Tag wird aktualisiert.

Clear

Der Korrekturfaktor-Wert wird auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.


2.10.13 Laden von Konfigurationsdaten in das Messgerät

Dieses Verfahren ist nur dann verfügbar, wenn das Messgerät CS-200 oder CS-2000/2000A angeschlossen ist.

Sie können die CS-S10w-Software verwenden, um das Messgerät für den Standalone-Betrieb (wenn das Gerät nicht mit dem Computer verbunden ist) zu konfigurieren.


1. Wählen Sie *Instrument - Standalone Configuration*.

Die Dialogbox Standalone Configuration erscheint.

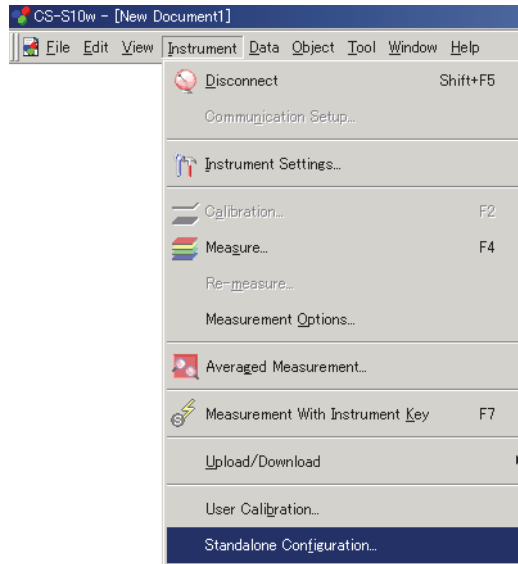

2. Markieren oder geben Sie den passenden Wert für jede Position ein.
3. Klicken Sie auf OK, um die Daten in das Messgerät zu laden.

■ Dialogbox Standalone Configuration (Wenn das CS-2000/2000A angeschlossen ist)

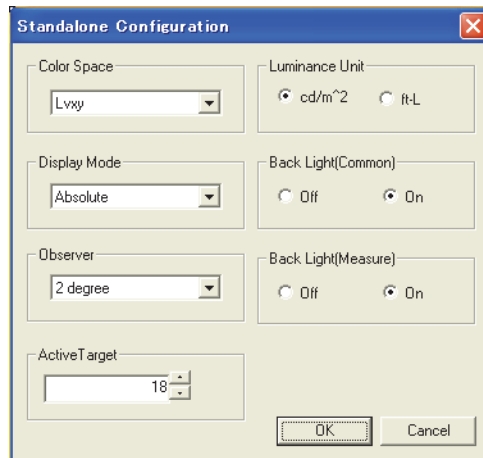

Color Space

Wählen Sie als Einstellung L_{*xy} , $L_{*u}^*v^*$, $L_{*T}\Delta u^*v^*$, XYZ, Dominant Wavelength (Farbtongleiche Wellenlänge) oder Spectral Graph (Spektralkurve).

Display Mode

Wählen Sie als Einstellung Absolute (Absolut) oder Difference (Differenz).

Observer

Wählen Sie entweder 2° oder 10°.

Active Target

Wählen Sie als aktive Bezugseinstellung für das Messgerät 1 bis 20.

Wenn bei eingestelltem aktivem Bezug eine Messung im Modus Difference display (Differenzanzeige) durchgeführt wird, wird die Differenz vom Bezug angezeigt.

Luminance Unit

Stellen Sie entweder cd/m^2 oder ft-L ein.

Back Light(Common)


Wählen Sie entweder On oder Off.

Back Light(Measure)

Wählen Sie entweder On oder Off.

Details zu jedem Punkt finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.

■ Dialogbox Standalone Configuration (Wenn das CS-200 angeschlossen ist)

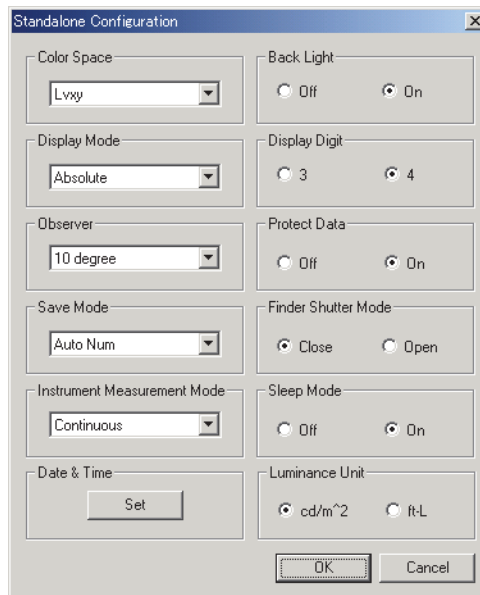

Color Space

Wählen Sie als Farbsystem L_{vxy} , $L_vu'v'$, $L_vT\Delta uv$, XYZ oder Dominant Wavelength. Ist Display Mode auf Ratio eingestellt, wird XYZ angezeigt und kann nicht bearbeitet werden. $L_vT\Delta uv$ kann nur ausgewählt werden, wenn der Beobachter auf 2° eingestellt ist.

Display Mode

Wählen Sie eine Einstellung aus Absolute, Difference und Ratio. Ratio kann nur ausgewählt werden, wenn Color Space auf XYZ eingestellt ist.

Observer

Wählen Sie entweder 2° oder 10° . User 1 und User 2 werden in Abhängigkeit der Auswahl hinzugefügt. Ist Color Space auf $L_vT\Delta uv$ eingestellt, werden 2° angezeigt. Dieser Wert kann nicht bearbeitet werden.

Save Mode

Wählen Sie eine Einstellung aus Auto Num, Manu Num oder Auto Save.

Instrument Measurement Mode

Wählen Sie entweder One shot oder Continuous.

Date & Time

Nach Anklicken der Schaltfläche Einstellen erscheint eine Bestätigungsmeldung. Durch Anklicken der Schaltfläche OK werden Datums- und Uhrzeiteinstellungen des Messgeräts an jene des Systems angepasst.

Back Light

Wählen Sie entweder On oder Off.

Display Digit

Wählen Sie entweder drei oder vier Stellen aus.

Protect Data

Wählen Sie entweder On oder Off.

Finder Shutter Mode

Wählen Sie für den Verschluss des Suchers während der Messung entweder Öffnen oder Schließen

Sleep Mode

Mit der Auswahl von On oder Off können Sie einstellen, ob der Sleep-Modus nach einer bestimmten Zeit aktiviert werden soll, wenn keine Betätigung erfolgt.

Luminance Unit

Stellen Sie entweder cd/m^2 oder ft-L ein.

Details zu jedem Punkt finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.


2.10.14 Durchführung der Benutzerkalibrierung

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn andere Modelle als das CS-100A am Computer angeschlossen sind.

Wenn das CS-2000/2000A angeschlossen ist

1. Wählen Sie *Instrument - User Calibration* in der Menüleiste.

Die Dialogbox User Calibration erscheint.

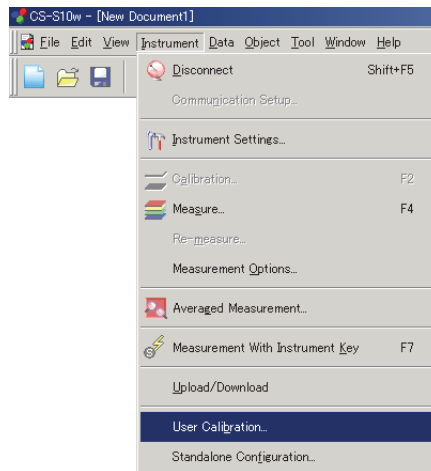


2. Wählen Sie aus der Liste Edit Calibration Channel (Kalibrierkanal bearbeiten) den Kanal aus, den Sie kalibrieren möchten.

Wenn Wavelength und Level auf OFF (AUS) gestellt sind, kann die Wellenlängen-Kalibrierung für die Kalibrierkanäle CH01 bis CH10 durchgeführt werden.

Wenn Level auf OFF (AUS) gestellt ist, kann die Pegel-Kalibrierung für die Kalibrierkanäle CH01 bis CH10 durchgeführt werden.

- 3-1. Um die Kalibrierung der Wellenlänge durchzuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche Wave Cal (Wellenlängen-Kalibrierung).


Die Dialogbox Wavelength Calibration erscheint.

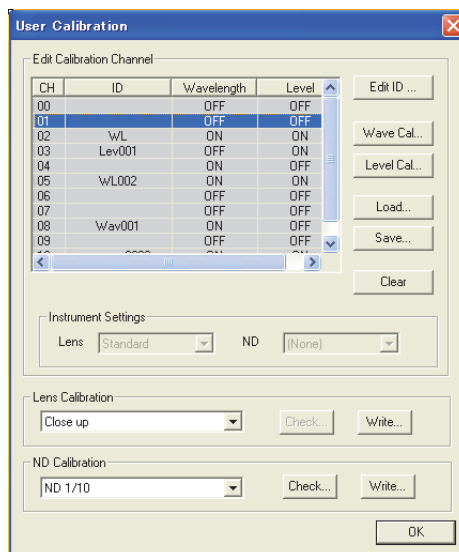

3-2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Measure.

Verwenden Sie das CS-2000/2000A zur Messung der Lichtquelle, die für die Kalibrierung der Wellenlänge verwendet wird.

Die Messung wird durchgeführt und der Wert wird in einer Kurve zur Kalibrierung der Wellenlänge dargestellt.

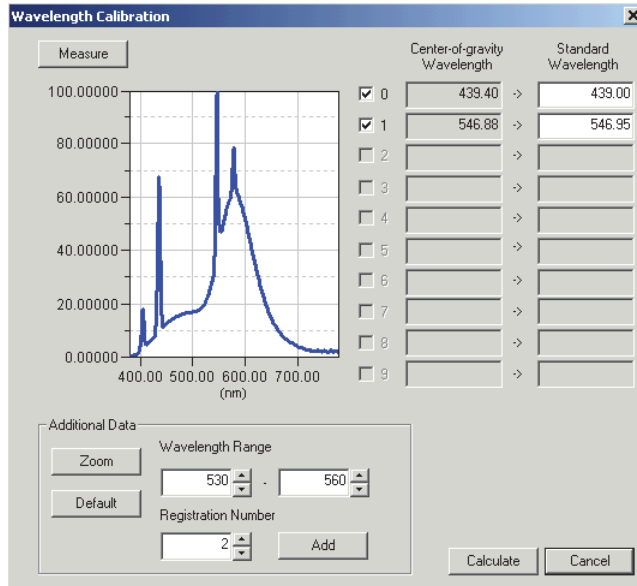

3-3. Stellen Sie unter Additional Data (Zusatzdaten) in den Combo-Boxen zum Wellenlängenbereich (Wavelength Range) den Wellenlängenbereich für die Berechnung der Länge von Schwerewellen ein.

3-4. Stellen Sie unter Additional Data (Zusatzdaten) in der Combo-Box Registration Number (Registrierungsnummer) ein, welche Nummer registriert werden soll.

3-5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Add (Hinzufügen).

Die Berechnung der Länge von Schwerewellen erfolgt innerhalb des eingestellten Bereichs, die Nummer des entsprechenden Eintrags wird in der Tabelle rechts aktiviert und der Wert wird bei Center-of-gravity Wavelength (Schwerpunkt-Wellenlänge) hinzugefügt. Bei Standard Wavelength (Standard-Wellenlänge) wird derselbe Wert angezeigt wie bei Center-of-gravity Wavelength (Schwerpunkt-Wellenlänge).

3-6. Korrigieren Sie den bei Standard Wavelength angezeigten Wert auf den Wert der Wellenlänge, die Sie kalibrieren möchten.

3-7. Wiederholen Sie die Schritte 3-3 bis 3-6, um die erforderliche Anzahl an Bezugswerten für Center-of-gravity / Standard Wavelength einzutragen.

Bis zu 10 Bezugswerte für Center-of-gravity / Standard Wavelength können eingetragen werden.

3-8. Wählen Sie das/die Auswahlkästchen für Center-of-gravity / Standard Wavelength, um die Nummer(n) des Eintrags einzustellen, mit der/denen der Faktor berechnet wird.

Maximal 10 Bezugsdaten für die Länge von Schwerewellen können ausgewählt werden.

3-9. Klicken Sie auf Calculate.


Der Faktor wird anhand der eingestellten Daten berechnet und anschließend ins Messgerät geladen.

Der Inhalt von Wavelength (Wellenlänge) in der Dialogbox User Calibration (Benutzerkalibrierung) wird aktualisiert.

Es wird empfohlen, an diesem Punkt eine Pegel-Kalibrierung durchzuführen.

- 4-1.** Um die Kalibrierung des Pegels durchzuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche Level Cal (Pegel-Kalibrierung).


Die Dialogbox Level Calibration (Pegel-Kalibrierung) erscheint.

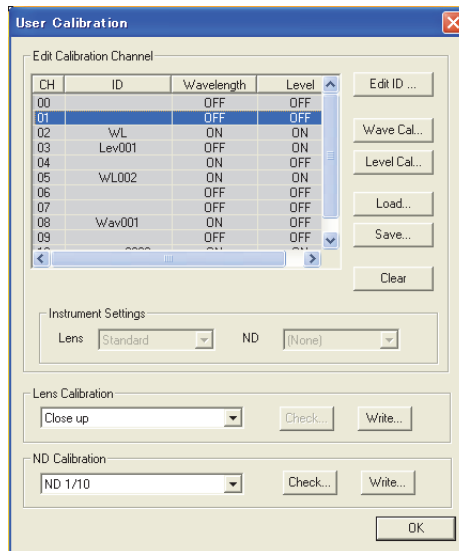

- 4-2.** Klicken Sie auf die Schaltfläche Measure.

Verwenden Sie das CS-2000/2000A für die Messung der Lichtquelle, die für die Kalibrierung des Pegels verwendet wird.

Die Messung wird durchgeführt und der Wert für die Pegel-Kalibrierung wird in der Grafik dargestellt.

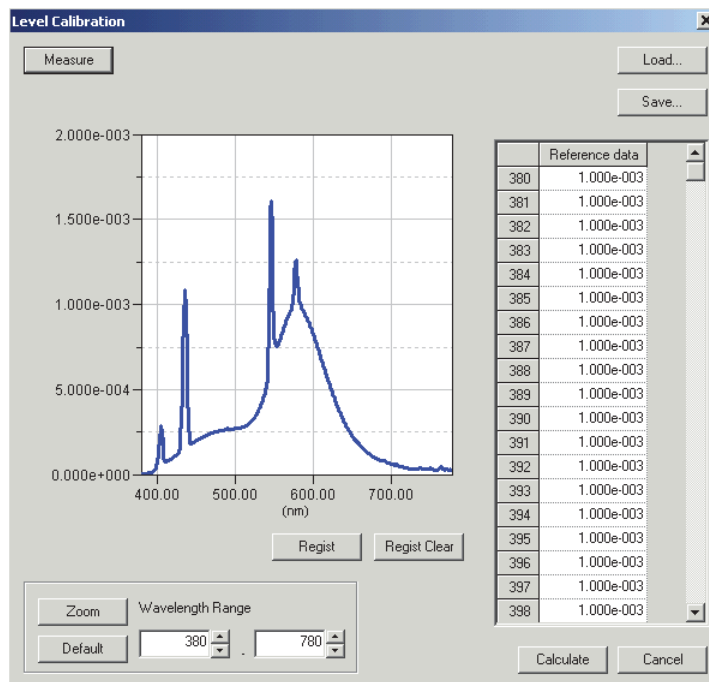

- 4-3.** Geben Sie in der Bezugsdatenliste rechts den Wert ein, auf dem die Kalibrierung basiert, und klicken Sie auf die Schaltfläche Register.

Der eingetragene Bezugswert wird in einer Grafik dargestellt.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Load können Sie den Wert laden, der bereits im Speicher abgelegt wurde (mit der Dateierweiterung .lrv) anstatt ihn einzugeben. Sie können den geladenen Wert auch bearbeiten. Speichern Sie den Wert durch Klicken auf die Schaltfläche Save (Dateierweiterung .lrv).

- 4-4.** Klicken Sie auf Calculate.


Der Faktor wird anhand der eingestellten Daten berechnet und anschließend ins Messgerät geladen.

Der Inhalt von Level (Pegel) in der Dialogbox „User Calibration“ (Benutzerkalibrierung) wird aktualisiert.

Wenn das CS-200 angeschlossen ist

- 1.** Wählen Sie *Instrument - User Calibration* in der Menüleiste.


Die Dialogbox User Calibration erscheint.

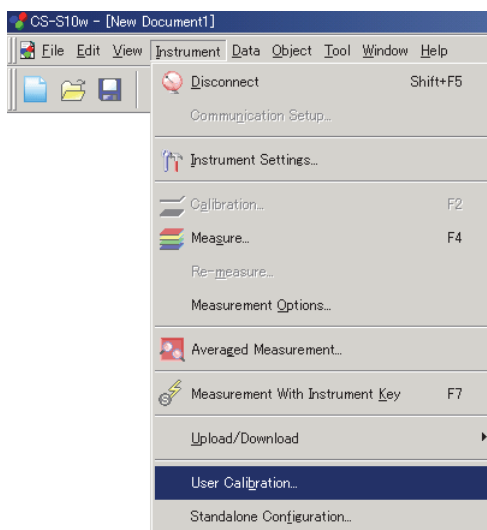

- 2.** Wählen Sie in der Datenliste einen Kalibrierkanal, für den Sie eine Benutzerkalibrierung durchführen wollen.

- 3.** Klicken Sie auf die Schaltfläche Single Cal.

Die Dialogbox Single Calibration erscheint.

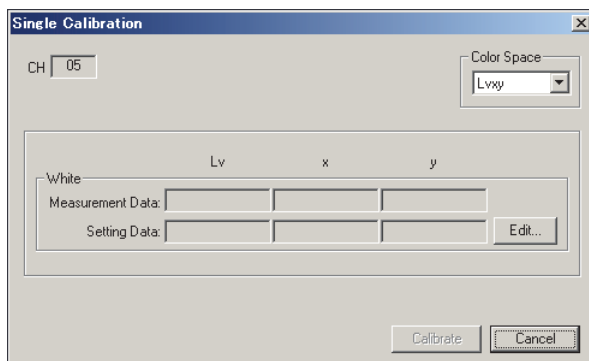

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Edit (Bearbeiten).

Die Dialogbox Edit Calibrated Point erscheint.

The dialog box 'Edit Calibrated Point' has a title bar with a close button. It contains two sections: 'Measurement Data' and 'Setting Data'. Each section has three input fields labeled 'Lv', 'x', and 'y', and a 'Measure' button. The 'OK' button is highlighted with a red rectangle.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Measure.

Die Messung wird durchgeführt und die Daten für den Kalibrierpunkt werden im Feld Measurement Data angezeigt.

6. Geben Sie die Referenzdaten in den Feldern Setting Data ein.

Der verfügbare Eingabebereich umfasst:


X, Y, Z und L_v : 0,01 bis 99999000000,00

x, y, u' und v': 0,0001 bis 1,0000

The dialog box 'Edit Calibrated Point' shows the results of the measurement. The 'Measurement Data' section now displays values: $L_v = 61.26$, $x = 0.4009$, and $y = 0.3857$. The 'Setting Data' section still shows empty input fields for L_v , x , and y .

7. Klicken Sie auf OK.

Die Dialogbox Single Calibration wird wieder geöffnet.

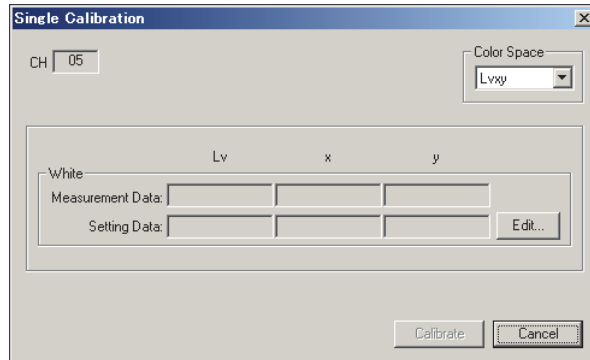

8. Klicken Sie auf Calibrate.


Die Kalibrierung beginnt.

Wenn das CS-1000 angeschlossen ist


- Die Benutzerkalibrierung kann nur durchgeführt werden, wenn sich der Dokumententyp in Betriebsart Lichtquellenfarbe befindet.

1. Wählen Sie *Instrument - User Calibration* in der Menüleiste.


Die Dialogbox User Calibration erscheint.

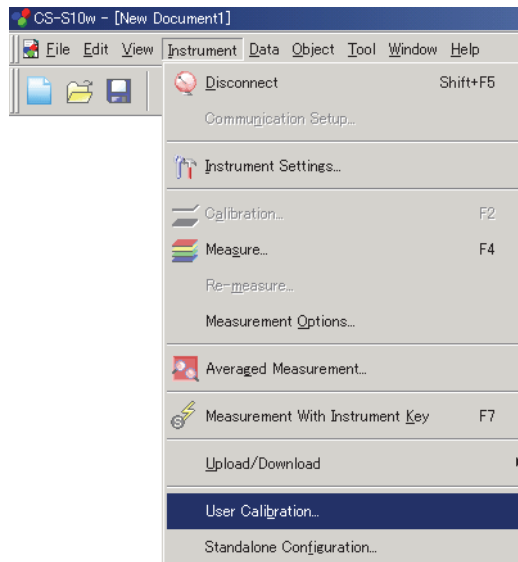

- 2-1.** Um die Kalibrierung der Wellenlänge durchzuführen, klicken Sie bei Wavelength auf die Schaltfläche Calibrate.

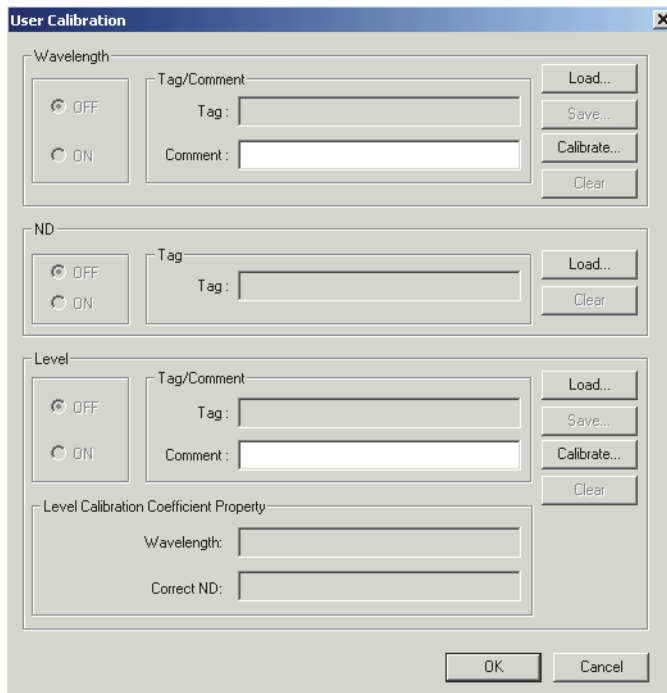

Die Dialogbox Wavelength Calibration erscheint.

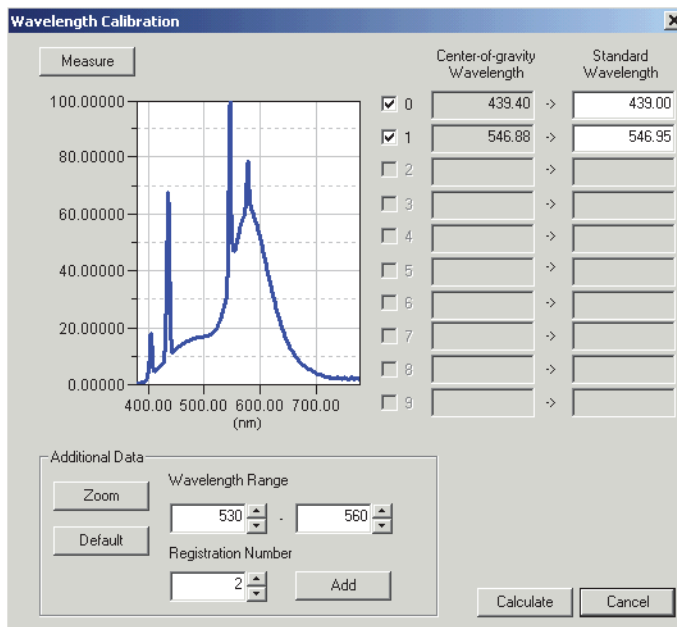

- 2-2.** Klicken Sie auf die Schaltfläche Measure.

Verwenden Sie das CS-1000 für die Messung der Lichtquelle, die für die Kalibrierung der Wellenlänge verwendet wird.

Die Messung wird durchgeführt und der Wert wird in einer Grafik zur Kalibrierung der Wellenlänge dargestellt.

- 2-3.** Stellen Sie für die Berechnung der Form von Schwerewellen, bei Additional Data in der Textbox Wavelength Range, den Bereich der Wellenform ein.
- 2-4.** Stellen Sie bei Additional Data die einzutragende Anzahl in der Textbox Registration Number ein.
- 2-5.** Klicken Sie auf Add.

Die Berechnung der Länge von Schwerewellen erfolgt innerhalb des eingestellten Bereichs, die Nummer des entsprechenden Eintrags wird in der Tabelle rechts aktiviert und der Wert wird bei Center-of-gravity Wavelength hinzugefügt. Bei Standard Wavelength wird derselbe Wert angezeigt wie bei Center-of-gravity Wavelength.

- 2-6.** Korrigieren Sie den bei Standard Wavelength angezeigten Wert auf den Wert der Kalibrier-Wellenform.
- 2-7.** Wiederholen Sie die Schritte 2-3 bis 2-6, um die erforderliche Anzahl an Bezugswerten für Center-of-gravity / Standard Wavelength einzutragen.


Bis zu 10 Bezugswerte für Center-of-gravity / Standard Wavelength können eingetragen werden.

- 2-8.** Wählen Sie das/die Auswahlkästchen für Center-of-gravity / Standard Wavelength, um die Nummer(n) des Eintrags einzustellen, mit der/denen der Faktor berechnet wird.

Maximal 10 Bezugsdaten für die Länge von Schwerewellen können ausgewählt werden.

- 2-9.** Klicken Sie auf Calculate.

Der Faktor wird anhand der eingestellten Daten berechnet.
Die Dialogbox Wavelength Calibration erscheint.

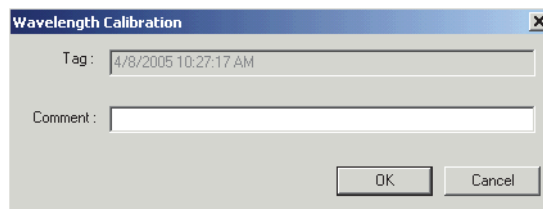


- 2-10.** Geben Sie einen Kommentar ein.

Die Markierung zeigt Datum und Uhrzeit der Kalibrierung an. Eine Bearbeitung ist nicht möglich.
Der Kommentar kann je nach Wunsch eingestellt werden, ist jedoch auf 32 Zeichen beschränkt.


- 2-11.** Klicken Sie auf OK.

Der Inhalt von Wavelength Calibration in der Dialogbox User Calibration wird aktualisiert.

- 3-1.** Um die Kalibrierung des Pegels durchzuführen, klicken Sie bei Level auf die Schaltfläche Calibrate.

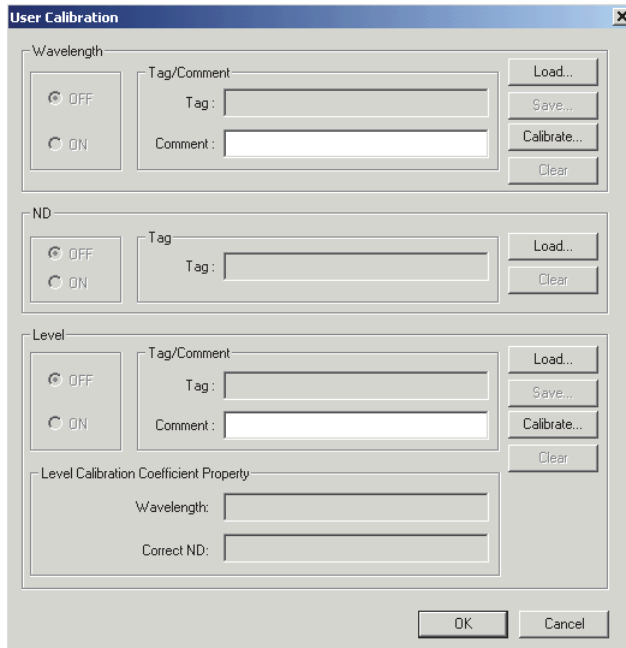

Die Dialogbox Level Calibration erscheint.

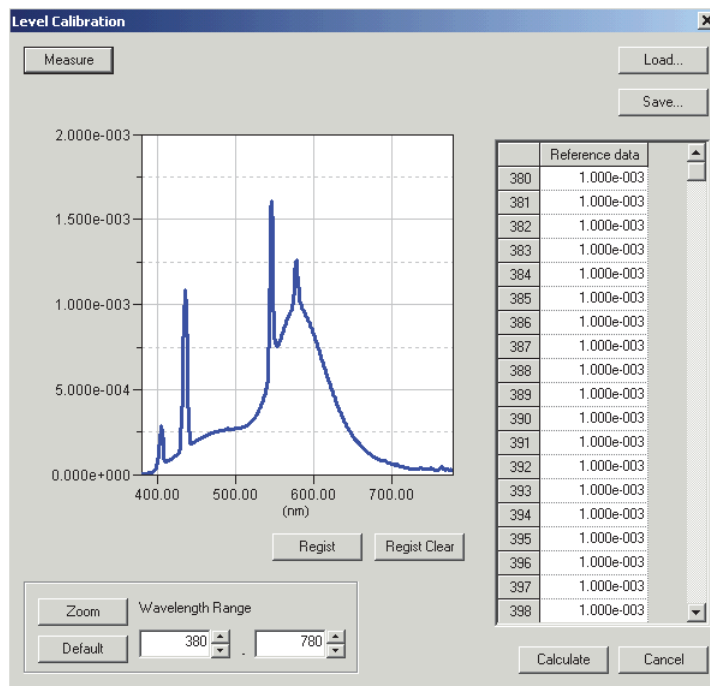

- 3-2.** Klicken Sie auf die Schaltfläche Measure.

Verwenden Sie das CS-1000 für die Messung der Lichtquelle, die für die Kalibrierung des Pegels verwendet wird.

Die Messung wird durchgeführt und der Wert für die Pegel-Kalibrierung wird in der Grafik dargestellt.


- 3-3.** Geben Sie in der Bezugsdatenliste rechts den Wert ein, auf dem die Kalibrierung basiert, und klicken Sie auf die Schaltfläche Register.

Der eingetragene Bezugswert wird in einer Grafik dargestellt.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Load können Sie den Wert laden, der bereits im Speicher abgelegt wurde (mit der Dateierweiterung .lrv) anstatt ihn einzugeben. Sie können den geladenen Wert auch bearbeiten. Speichern Sie den Wert durch Klicken auf die Schaltfläche Save (Dateierweiterung .lrv).

- 3-4.** Klicken Sie auf Calculate.

Der Faktor wird anhand der eingestellten Daten berechnet.

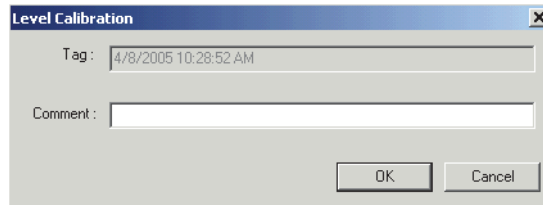

- 3-5.** Geben Sie einen Kommentar ein.

Die Markierung zeigt Datum und Uhrzeit der Kalibrierung an. Eine Bearbeitung ist nicht möglich. Der Kommentar kann je nach Wunsch eingestellt werden, ist jedoch auf 32 Zeichen beschränkt.

- 3-6.** Klicken Sie auf OK.

Der Inhalt von Level Calibration in der Dialogbox User Calibration wird aktualisiert.

2.10.15 Weißkalibrierung für Objektfarbenmessung


Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Messgerät an den Computer angeschlossen ist.
Zur Durchführung der Objektfarbenmessung müssen Sie zuerst eine Weißkalibrierung durchführen.

Wenn das CS-2000/2000A oder das CS-1000 angeschlossen ist

- Der Weißabgleich für die Objektfarbenmessung kann durchgeführt werden, wenn Sie am Computer als Benutzer mit Administratoren-Privilegien angemeldet sind.

1. Wählen Sie *Instrument - Calibration* in der Menüleiste.

Für die Messung der Reflexions-Objektfarben erscheint die Dialogbox White Calibration. Für die Messung der Transmissions-Objektfarben erscheint die Dialogbox 100% Calibration.

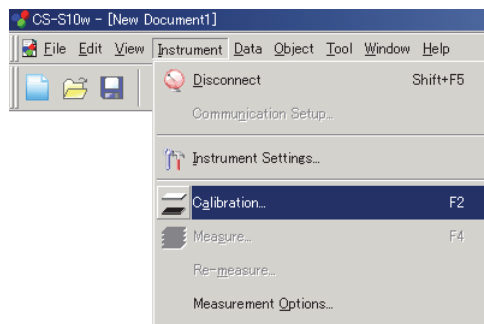

2. Für die Messung der Reflexions-Objektfarben klicken Sie bei Standard Data File auf die Schaltfläche Change und stellen Sie die Datei für Kalibrierdaten ein.

Geben Sie die Kalibrierdaten-Datei ein (Dateierweiterung .wcb, Daten in einem Bereich von 0,0000 bis 2,0000), die im Lieferumfang der Weißkalibrierplatte enthalten ist (optional erhältlich).
Auf der gleichen Ebene wie das Verzeichnis CS-S10w wird ein Verzeichnis mit der Bezeichnung CS2000 bzw. CS1000 erstellt; und die Datei* wird in dieses Verzeichnis kopiert. Der Dateiname wird in der Textbox bei Standard Data File angezeigt.

* Das Standard Data File befindet sich in folgendem Verzeichnis:

C:\UsersSettings\<Name des angemeldeten Benutzers>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\KONICAMINOLTA\CS-S10w

Für die Weißkalibrierung können Sie die gewünschte Weißplatte verwenden. Klicken Sie in diesem Fall bei Optional White Calibration Data auf die Schaltfläche Load, stellen Sie die Kalibrierdaten-Datei ein (Erweiterung .wcb, Daten in einem Bereich von 0,0000 bis 2,0000) und aktivieren Sie das Auswahlkästchen Use Optional White Calibration Data.

In der Datei mit Spektralreflexionsdaten muss die Spektralreflexion für jede Wellenlänge in Schritten von 1 nm, beginnend mit der kürzesten Wellenlänge (380 nm), bis 780 nm eingestellt werden. Daher enthält die Datei dann insgesamt 401 Spektralreflexionsdaten.
Spektralreflexionsdatenwerte müssen wie folgt, jedoch nicht als Prozentwert, eingestellt werden. Beträgt die Reflexion zum Beispiel 35%, muss „0,35“ eingestellt werden.

Geben Sie einen Reflexionswert pro Zeile ein.

(z.B.)

0,1414	Reflexion für 380 nm: 14,14%
0,1732	Reflexion für 381 nm: 17,32%
0,2000	Reflexion für 382 nm: 20,00%


401 Werte insgesamt

0,2236 Reflexion für 779 nm: 22,36%

0,3142 Reflexion für 780 nm: 31,42%

Um Transmissions-Objektfarben zu messen, sind Kalibrierdaten fix (1,0000 für alle Wellenformen) und können nicht bearbeitet werden.


3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Calibration, um mit der Weißkalibrierung zu beginnen.

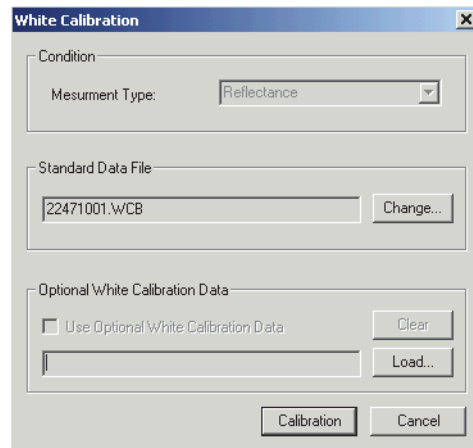


Wenn das CS-200 oder das CS-100A angeschlossen ist

1. Wählen Sie *Instrument - Calibration* in der Menüleiste.

Die Dialogbox White Calibration erscheint.

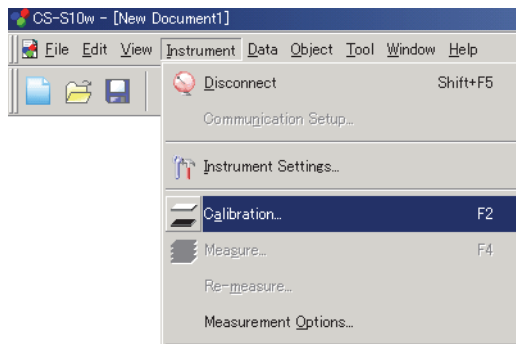

2. Wählen Sie als Farbsystem L_vx_y, L_vu'v' und XYZ.

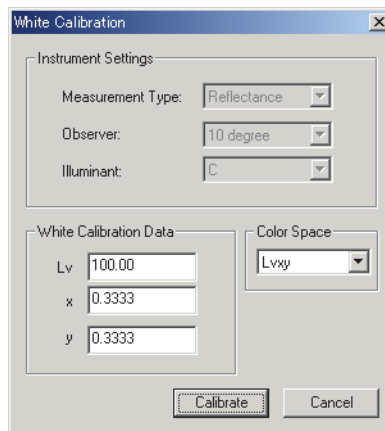

3. Um Reflexions-Objektfarben zu messen, geben Sie die Kalibrierdaten ein.

Der verfügbare Eingabebereich umfasst:

X, Y, Z und L_v: 0,01 bis 200,00

x, y, u' und v': 0,0001 bis 1,0000

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Calibrate, um mit der Weißkalibrierung zu beginnen.


2.10.16 Berechnung von Spektraldaten

Für jede Wellenlänge können verschiedene Berechnungen von Spektraldaten durchgeführt werden. Der berechnete Spektraldatenwert wird im Listenfenster als ein Probenwert angefügt.

Diese Berechnungen sind nur für Spektraldaten anwendbar.


1. Wählen Sie Proben- oder Bezugsdaten aus der Liste im Listenfenster.
2. Wählen Sie *Data – Edit Spectral Data* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Edit Spectral Data erscheint.

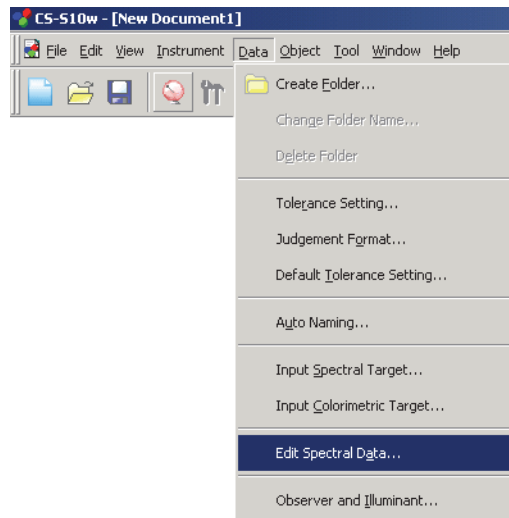

3. Berechnen Sie die Spektraldaten.

Die Dialogbox Edit Spectral Data erscheint.

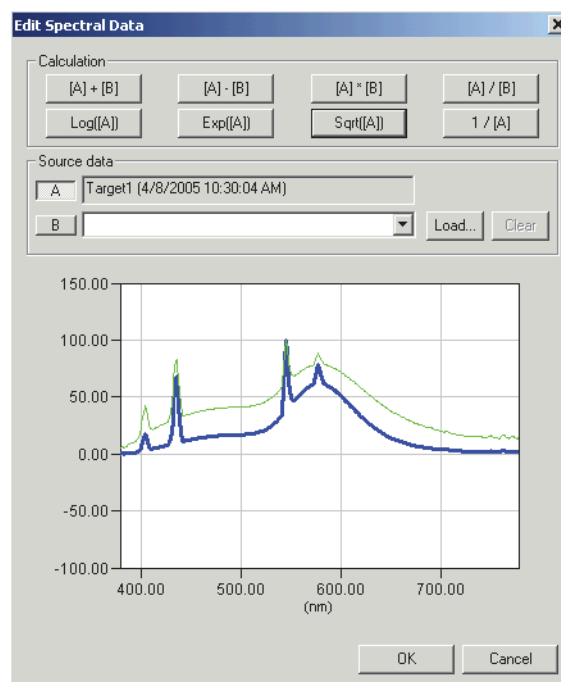

■ Dialogbox Edit Spectral Data (Wenn das CS-1000 angeschlossen ist)

Source data

A

Die ausgewählten Daten werden angezeigt. Die Berechnung erfolgt anhand dieser Daten. [Eine Bearbeitung ist nicht möglich]

B

Stellen Sie die für die Berechnung verwendeten Daten ein. Sie können diese aus den im Dokument gespeicherten Werten auswählen, eine Datei durch Anklicken der Schaltfläche Load laden oder einen Zahlenwert eingeben.

Load

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Datei mit der Erweiterung „.lrv“ zu laden. Die Dateiformate lauten wie folgt.

- Zeile 1:** spektrale Luminanz für 380 nm
- Zeile 2:** spektrale Luminanz für 381 nm
- Zeile 3:** spektrale Luminanz für 382 nm

- Zeile 400:** spektrale Luminanz für 779 nm
- Zeile 401:** spektrale Luminanz für 780 nm

Calculation

Die folgenden acht Operationen sind verfügbar. Wird auf eine der Schaltflächen geklickt, wird das entsprechende Ergebnis der Operation in der Grafik dargestellt.

Rechenoperationen: Eine Rechenoperation kann mit zwei Spektraldaten für jede Wellenlänge durchgeführt werden. Verwenden Sie diese Schaltflächen, um zu einem Ergebnis zu gelangen, wie etwa bei der Berechnung der Spektralreflexion eines Objekts aus den Spektraldaten der Lichtquelle, die das Objekt ausleuchtet, und aus der Reflexion vom Objekt.

[A]+[B]

[A]-[B]

[A]*[B]

[A]/[B]

Funktionsberechnungen: Eine Funktionsberechnung kann mit allen Spektraldaten für jede Wellenlänge durchgeführt werden. Verwenden Sie diese Schaltflächen, um zu einem Ergebnis zu gelangen, wie etwa bei der Berechnung der spektralen Verteilungscharakteristik der Konzentration aus den Spektralreflexionsdaten.

LOG([A])

Für einen Logarithmus der Daten zur Basis 10 für jede Wellenlänge.

EXP([A])

Für einen Exponenten der Daten mit Basis 10 für jede Wellenlänge.

SQRT([A])

Für eine Quadratwurzel der Werte für jede Wellenlänge.

1/[A]

Für einen Reziprokwert der Werte für jede Wellenlänge.

KAPITEL 3

EIGENSCHAFTEN GRAFISCHE OBJEKTE



3.1 xy -Farbtafel und u'v'-Farbtafelobjekt	148
3.1.1 Überblick	148
3.1.2 Merkmale	148
3.1.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	149
3.1.4 Eigenschaften	149



3.2 Spektralkurve	154
3.2.1 Überblick	154
3.2.2 Merkmale	154
3.2.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	155
3.2.4 Einstellung der Eigenschaften	155



3.3 L*a*b*-Grafik	162
3.3.1 Überblick	162
3.3.2 Merkmale	162
3.3.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	163
3.3.4 Einstellung der Eigenschaften	163



3.4 Trend-Darstellung/Histogramm	169
3.4.1 Überblick	169
3.4.2 Merkmale	169
3.4.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	170
3.4.4 Einstellung des Menüpunkts Merkmal	171
3.4.5 Einstellung der Eigenschaften	171



3.5 Bild	177
3.5.1 Überblick	177
3.5.2 Merkmale	177
3.5.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	177
3.5.4 Merkmale einstellen	178
3.5.5 Einstellung der Eigenschaften	179



3.6 Data Label	180
3.6.1 Überblick	180
3.6.2 Merkmale	180
3.6.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	180
3.6.4 Einstellung des Menüpunkts Merkmal	181
3.6.5 Einstellung der Eigenschaften	182



3.7 String Label	183
3.7.1 Einstellung der Eigenschaften	183



3.8 Liniengrafik-Objekt	184
3.8.1 Überblick	184
3.8.2 Merkmale	184
3.8.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	184
3.8.4 Einstellung des Menüpunkts Merkmal	185
3.8.5 Einstellung der Eigenschaften	185




3.9 Linie	191
3.9.1 Einstellung der Eigenschaften	191




3.10 Rechteck	192
3.10.1 Einstellung der Eigenschaften	192
3.11 Arbeiten im Entwurf-Fenster im Modus Bearbeiten	193
3.11.1 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	193
3.11.2 Gruppeneinstellung	194

3.1 xy -Farbtafel und u'v'-Farbtafelobjekt

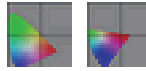

3.1.1 Überblick

Das Farbtafel-Objekt ist eine Grafik, welche entweder xy- oder u'v'-Absolutwerte anzeigt. Die Werte x-y oder u'-v' werden am Objekt grafisch dargestellt.

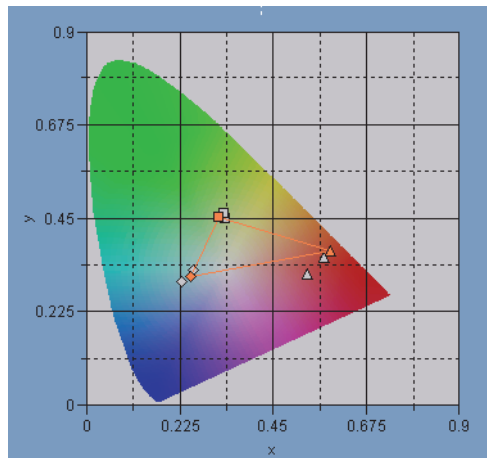

3.1.2 Merkmale

- Zeigt die Absolutwerte von xy oder u'v'
- Zeigt eine hufeisenförmige Farbanzeige des x-y- oder u'-v'-Farbsystems
- Die Grafik kann kopiert werden.
- Die Farbe der Grafik kann eingestellt werden (Hintergrund-, Achsen und Label-Farbe).

3.1.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die verfügbaren Menüpunkte anzeigt.

Tabelle 1 zeigt die Menüpunkte, die für das Farbtafel-Objekt verfügbar sind.

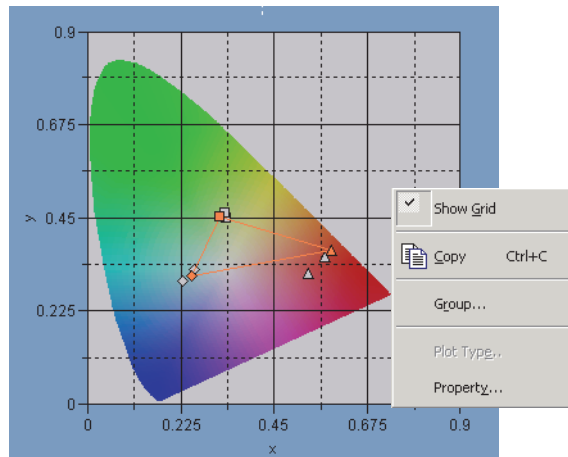


Abb. 1. Farbtafelobjekt

Titel 1: Menü des Farbtafelobjekts mit rechter Maustaste aufrufen

Menüpunkt	Funktion
Show Grid	Die Gitterlinien werden angezeigt oder verborgen.
Kopieren	Kopiert das grafische Objekt in die Zwischenablage.
Group	Zeigt eine Dialogbox zur Einstellung der Datenmerkmale, die grafisch dargestellt werden sollen.
Property	Zeigt die Dialogbox Eigenschaft für die Grafik.

Siehe Seite 194 für die Einstellung der Gruppenmerkmale.

3.1.4 Eigenschaften


Klickt man mit der rechten Maustaste auf Property, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Grafik-Eigenschaften.

Die folgenden Registerkarten sind für die Einstellung der Eigenschaften verfügbar.

- 1) Anzeige
- 2) x - y or u' - v'
- 3) Titel
- 4) Miscellaneous

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Details dieser Registerkarten.

1) Registerkarte Display

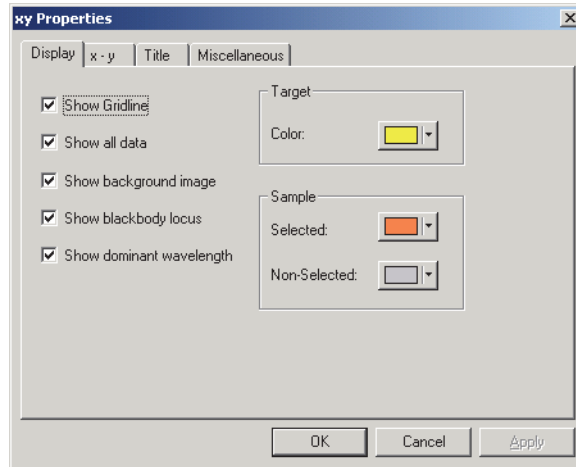

Show Gridline

Hier kann man auswählen, ob Gitterlinien angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Show all data

Wählen Sie aus, ob alle Daten der Liste auf der Farbtafel gezeigt oder verborgen werden sollen.

Show background image

Wählen Sie aus, ob die Pseudo-Farbe des x-y oder u'-v'-Farbsystems angezeigt oder verborgen werden soll.

Show blackbody locus

Wählen Sie aus, ob der Schwarzkörper-Ort auf der Farbtafel angezeigt oder verborgen werden soll.

Show dominant wavelength

Wählen Sie aus, ob Linie und Label der farbtongleichen Wellenlänge auf der Farbtafel angezeigt oder verborgen werden sollen.

Target - Color

Stellen Sie die Farbe der Bezugsdatenansicht ein.

Sample - Selected


Stellen Sie die Farbe der ausgewählten Probandatenansicht ein.

Sample - Non-Selected

Stellen Sie die Farbe der nicht ausgewählten Probandatenansicht ein.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

2) Registerkarte Chromaticity axis (x-y oder u'-v')

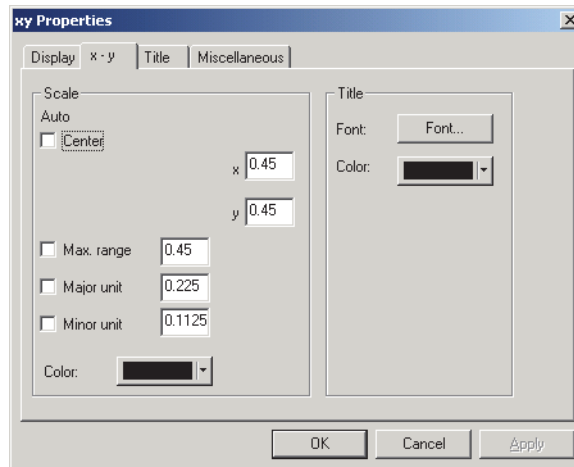

Scale - Auto [Center, Max. range, Major unit, Minor unit]

Legen Sie fest, ob Sie die automatische Einstellung der Skala für die Sättigungsachse verwenden wollen. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Scale - Center

Legen Sie die Koordinaten für die Mitte des Anzeigebereichs im Farbsystem x-y oder u'-v' fest.

Scale - Max. range

Stellen Sie den Abstand (maximalen Bereich) von der Mitte ein, um den Anzeigebereich zu bestimmen.

Scale - Value (Major unit, Minor unit)

Legen Sie die größte und die kleinste Einheit der Skalen fest.

Scale - Color

Legen Sie die Skalenfarbe der Sättigungsachse fest.

Title - Font


Stellen Sie die Schriftart ein, die für den an der Sättigungsachse erscheinenden Label verwendet wird. Vergessen Sie nicht, auch die Type einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Title - Color

Legen Sie die Farbe des Labels für die Sättigungsachse fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

3) Registerkarte Title

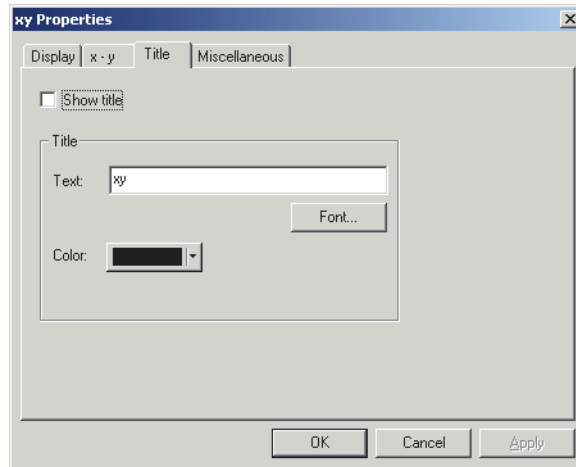

Show title

Wählen Sie aus, ob der Titel der Tabelle angezeigt oder verborgen werden soll.

Title - Text

Legen Sie den Text für den Tabellentitel fest.

Title - Font


Legen Sie die Schriftart für den Tabellentitel fest. Vergessen Sie nicht, auch die Type einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Title - Color

Legen Sie die Farbe des Tabellentitels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

4) Registerkarte Miscellaneous

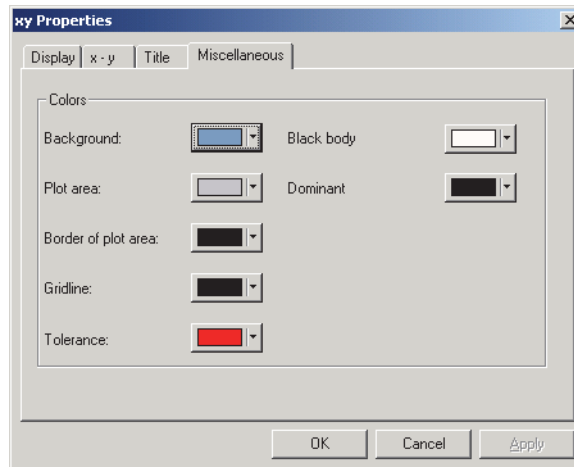

Colors - Background

Hier können Sie die Hintergrundfarbe des grafischen Objekts festlegen.

Colors - Plot area

Legen Sie die Farbe fest, die für die Innenseite der Grafik verwendet werden soll. Die Farbe kann nur dann geändert werden, wenn das Kästchen „Show background image“ im Register „Display“ auf Seite 150 nicht aktiviert ist.

Colors - Border of plot area

Legen Sie die Farbe des Grafikrands fest.

Colors - Gridline

Legen Sie die Gitterlinienfarbe der Grafik fest.

Colors - Tolerance

Hier können Sie die Farbe für die Toleranzdaten festlegen.

Colors - Black body

Legen Sie die Farbe des Schwarzkörpers fest.

Colors- Dominant


Legen Sie die Farbe von Linie und Label der farbtongleichen Wellenlänge fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

3.2 Spektralkurve

3.2.1 Überblick

Die Spektralkurve wird verwendet, um Spektraldaten darzustellen. Die horizontale Achse der Grafik stellt die Wellenlänge (nm), die vertikale Achse die spektrale Strahlendichte dar ($\text{w/sr} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{nm}$) (Spektralreflexion, wenn die Betriebsart Objektfarbe ausgewählt ist).

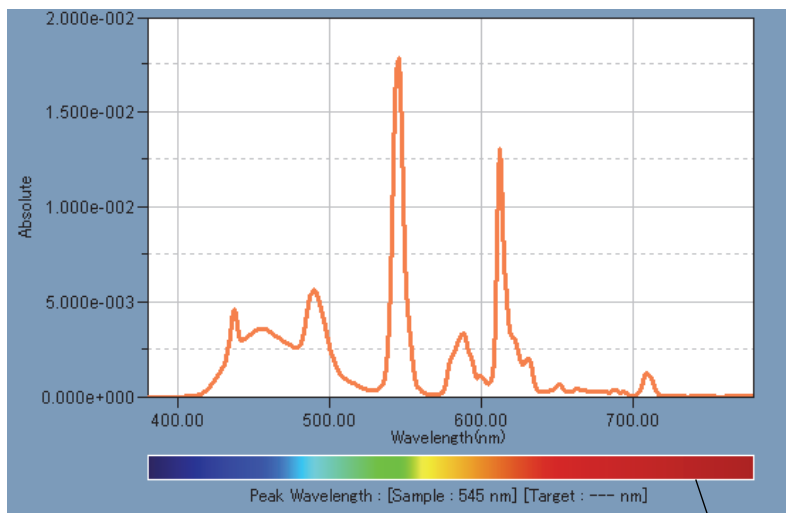

Farbbalken Wellenlänge

3.2.2 Merkmale

- Stellt eine Liniengrafik der Spektraldaten dar (absolute und relative Spektraldaten, Spektraldatenverhältnis).
- Zeigt Unterschiede in den Spektraldaten jeder Wellenlänge.
- Zeigt einen Farbbalken für Wellenlänge.
- Grafiken können kopiert werden.
- Hintergrund-, Achsen- und Label-Farben können ausgewählt werden.

3.2.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die verfügbaren Menüpunkte anzeigt. Tabelle 2 zeigt die Menüpunkte, die für die Spektralkurve verfügbar sind.

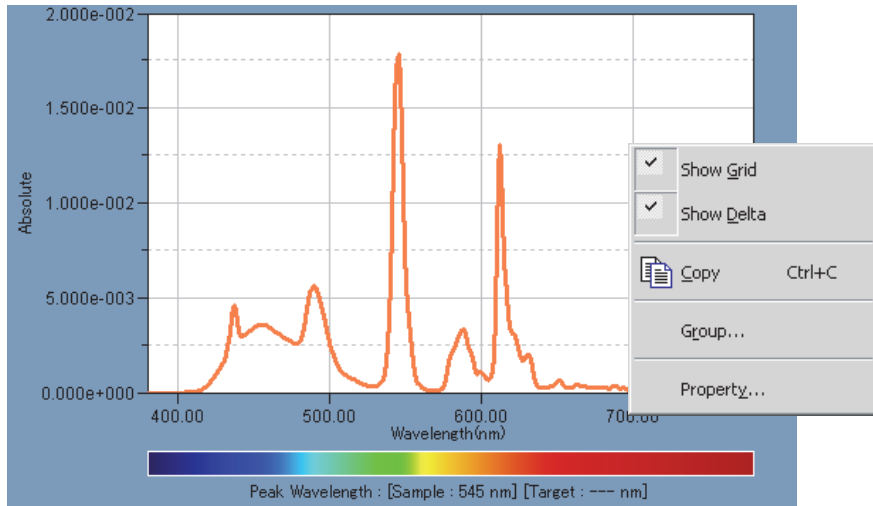


Abb. 2. Spektralkurve

Titel 2: Menü der Spektralkurve mit rechter Maustaste aufrufen

Menüpunkt	Funktion
Show Grid	Die Gitterlinien werden angezeigt oder verborgen.
Show Delta	Zeigt die Unterschiede zwischen Bezugsdaten und Probanddaten für jede Wellenlänge.
Copy	Kopiert das grafische Objekt in die Zwischenablage.
Group	Zeigt eine Dialogbox zur Einstellung der Datenmerkmale, die grafisch dargestellt werden sollen.
Property	Zeigt die Dialogbox Eigenschaft für die Grafik.

Siehe Seite 194 für die Einstellung der Gruppenmerkmale.


3.2.4 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf Property, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Grafik-Eigenschaften. Die folgenden sechs Registerkarten sind für die Einstellung der Spektralgrafik-Eigenschaften verfügbar.

- 1) Display
- 2) Wavelength
- 3) Data
- 4) Delta
- 5) Title
- 6) Miscellaneous

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Details dieser Registerkarten.

1) Registerkarte Display

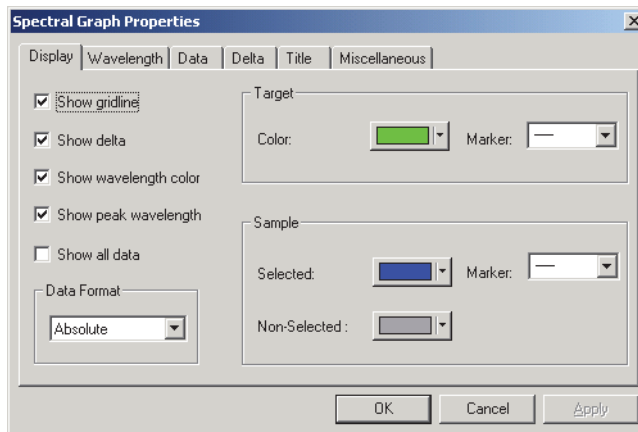

Show gridline

Hier kann man auswählen, ob Gitterlinien angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Show delta

Wählen Sie aus, ob die Reflexionsdifferenz zwischen Bezugs- und Probandaten angezeigt oder verborgen werden soll.

Hinweis: Wenn zwei oder mehr Probenwerte ausgewählt werden, werden die Ergebnisse in der Grafik überlappend dargestellt.

Show wavelength color

Wählen Sie aus, ob der Farbbalken für Wellenlänge unter der Wellenlängenachse angezeigt werden soll.

Show peak wavelength

Hier kann man auswählen, ob die maximale Wellenlänge angezeigt oder verborgen werden soll.

Show all data

Wählen Sie aus, ob neben den ausgewählten Daten alle Daten angezeigt oder verborgen werden sollen.

Data Format

Wählen Sie das gewünschte Datenformat aus.

Auswählbare Punkte: Absolute, Relative, Ratio

Die angezeigten Daten variieren je nach Dokumententyp.

Datenformat	Absolute	Relative	Ratio
Lichtquellenfarbe	Spektrale Luminanz (w/sr·m ² ·nm)	Relative spektrale Luminanz	Verhältnis der spektralen Luminanz
Objektfarbe	Spektrale Reflexion (%)	Relative spektrale Reflexion	Verhältnis der Spektralreflexion

Target - Color

Stellen Sie die Farbe der Bezugsdatenansicht ein.

Target - Marker

Stellen Sie -●-, -■-, X oder --- als Linienart für die Anzeige der Bezugsdaten ein.

Sample - Selected

Legen Sie die Farbe für die dargestellten Probandaten fest, die gerade im Listenfenster ausgewählt sind.


Sample - Non-Selected

Legen Sie die Farbe für die dargestellten Probendaten fest, die nicht im Listenfenster ausgewählt sind.

Sample - Marker

Stellen Sie -●-, -■-, X oder --- als Linienart für die Anzeige der Probendaten ein.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

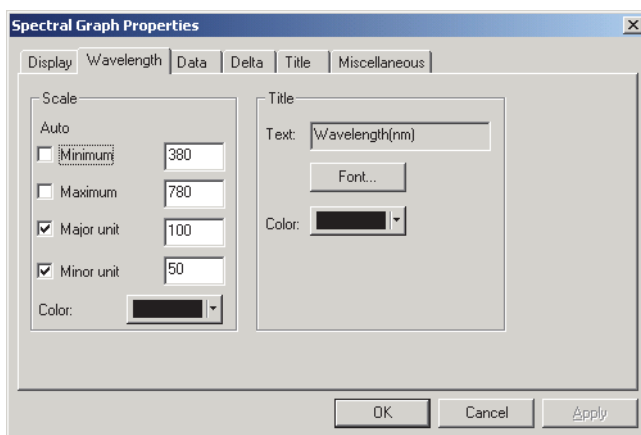2) Registerkarte Wavelength**Scale - Auto [Minimum, Maximum, Major unit, Minor unit]**

Legen Sie fest, ob Sie die automatische Einstellung der Skala für die Datenachse (horizontale Achse) verwenden wollen. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Scale - Value [Minimum, Maximum, Major unit, Minor unit]

Legen Sie den kleinsten und größten Wert sowie die größte und kleinste Einheit der Skala für die Datenachse fest.

Scale - Color

Legen Sie die Skalenfarbe der Datenachse fest.

Title - Text [Kann nicht bearbeitet werden.]

Dies ist der Label-Text, der an der Wellenlängenachse erscheint.

Title - Font


Stellen Sie die Schriftart ein, die für den an der Datenachse erscheinenden Label verwendet wird. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Title - Color

Stellen Sie die Farbe des Labels für die Datenachse ein.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

3) Registerkarte Data

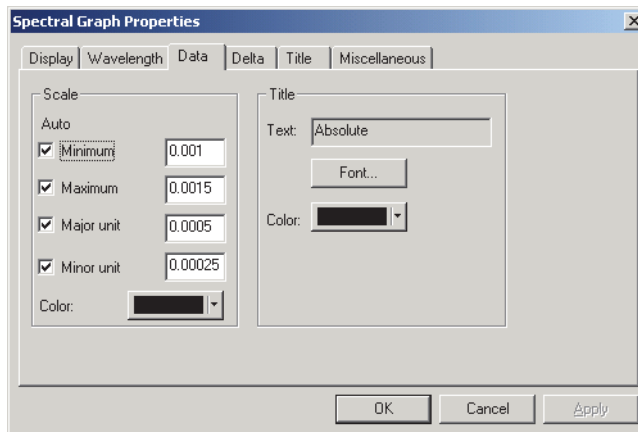

Scale - Auto [Minimum, Maximum, Major unit, Minor unit]

Legen Sie fest, ob Sie die automatische Einstellung der Skala für die Reflexionsachse (horizontale Achse) verwenden wollen. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Scale - Value [Minimum, Maximum, Major unit, Minor unit]

Legen Sie den kleinsten und größten Wert sowie die größte und kleinste Einheit der Skala für die Reflexionsachse fest.

Scale - Color

Legen Sie die Skalenfarbe der Reflexionsachse fest.

Title - Text [Kann nicht bearbeitet werden.]

Dies ist der Label-Text, der an der Datenachse erscheint.

Title - Font


Stellen Sie die Schriftart ein, die für den an der Reflexionsachse erscheinenden Label verwendet wird. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Title - Color

Legen Sie die Farbe des Labels für die Reflexionsachse fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

4) Registerkarte Delta

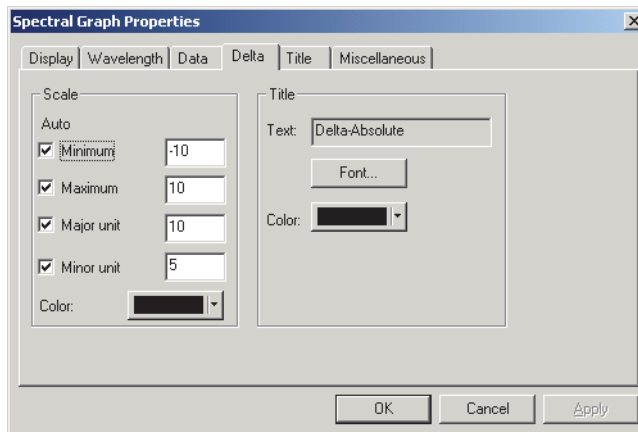

Scale - Auto [Minimum, Maximum, Major unit, Minor unit]

Legen Sie fest, ob Sie die automatische Einstellung der Skala für die Delta-Reflexion (vertikale Achse rechts) verwenden wollen. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Scale - Value [Minimum, Maximum, Major unit, Minor unit]

Legen Sie den kleinsten und größten Wert sowie die größte und kleinste Einheit der Skala für die Delta-Reflexionsachse fest.

Scale - Color

Legen Sie die Skalenfarbe der Delta-Reflexionsachse fest.

Title - Text [Kann nicht bearbeitet werden.]

Dies ist der Label-Text, der an der Delta-Datenachse erscheint.

Title - Font


Stellen Sie die Schriftart ein, die für den an der Delta-Reflexionsachse erscheinenden Label verwendet wird. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Title - Color

Legen Sie die Farbe des Labels für die Delta-Reflexionsachse fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

5) Registerkarte Title

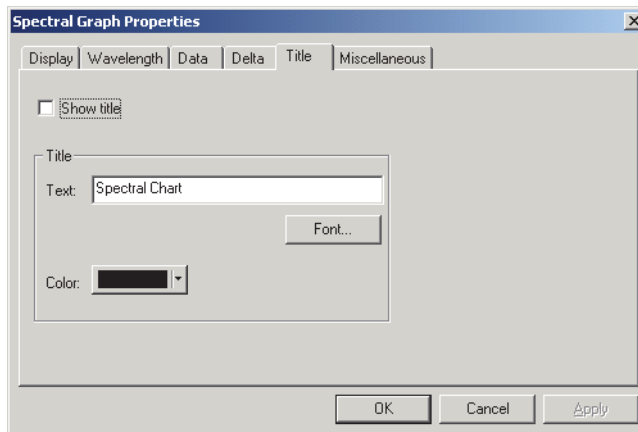

Show title

Wählen Sie aus, ob der Titel der Tabelle angezeigt oder verborgen werden soll.

Title - Text

Legen Sie den Text für den Tabellentitel fest.

Title - Font


Legen Sie die Schriftart für den Tabellentitel fest. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Title - Color

Legen Sie die Farbe des Tabellentitels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

6) Miscellaneous

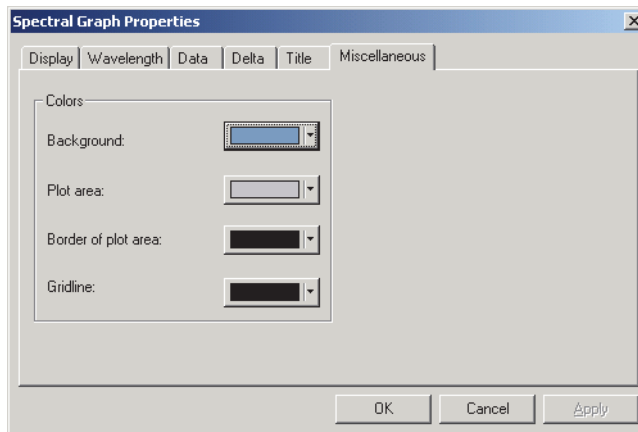

Colors - Background

Hier können Sie die Hintergrundfarbe des grafischen Objekts festlegen.

Colors - Plot area

Legen Sie die Farbe fest, die für die Innenseite der Grafik verwendet werden soll.

Colors - Border of plot area

Legen Sie die Farbe des Grafikrands fest.

Colors - Gridline

Legen Sie die Gitterlinienfarbe der Grafik fest.


Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

3.3 L*a*b*-Grafik

3.3.1 Überblick

Die L*a*b* Grafik wird für die Anzeige von Absolutwerten im L*a*b* Farbsystem verwendet. Der Wert L* wird links vom Objekt, der Wert a*-b* rechts dargestellt.

Je nach dem, welche Darstellungsart ausgewählt wurde, können Sie den Wert L* durch Einstellung der entsprechenden Darstellungsart verbergen.

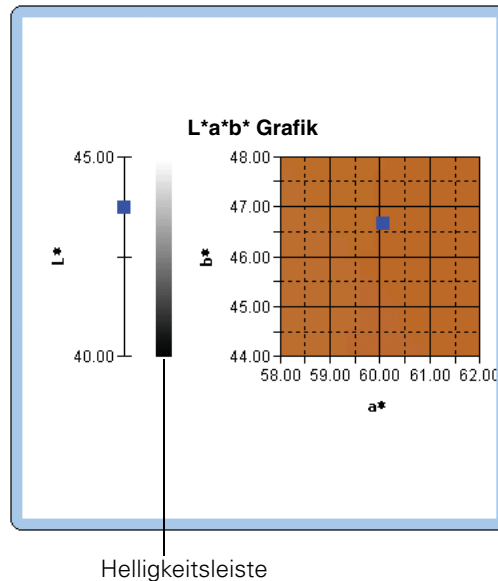

3.3.2 Merkmale

- Stellt eine Absolutgrafik für das L*a*b*-Farbsystem dar.
- Zeigt die Helligkeitsleiste.
- Zeigt die Pseudo-Farbe des a*-b*-Farbsystems.
- Grafiken können kopiert werden.
- Hintergrund-, Achsen- und Label-Farben können ausgewählt werden.

3.3.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die verfügbaren Menüpunkte anzeigt. Tabelle 3 zeigt die Menüpunkte, die für die $L^*a^*b^*$ -Grafik verfügbar sind.

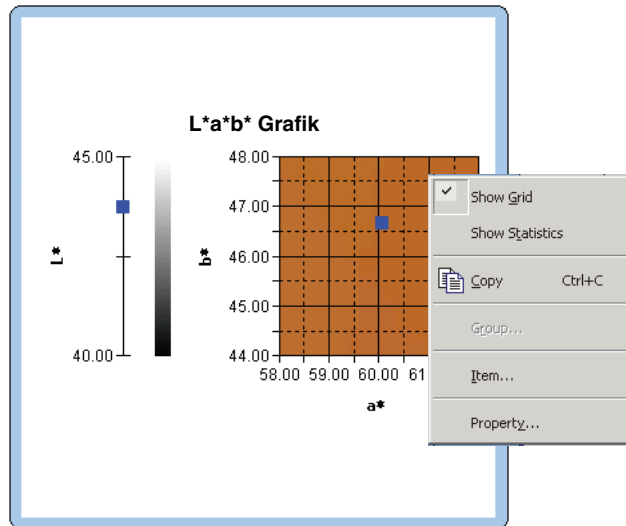


Abb. 3. $L^*a^*b^*$ -Grafik

Titel 3: Menü der $L^*a^*b^*$ -Grafik mit rechter Maustaste aufrufen

Menüpunkt	Funktion
Show Grid	Die Gitterlinien werden angezeigt oder verborgen.
Copy	Kopiert das grafische Objekt in die Zwischenablage.
Group	Zeigt eine Dialogbox zur Einstellung der Datenmerkmale, die grafisch dargestellt werden sollen.
Plot Type	Zeigt eine Dialogbox für die Einstellung eines Bereichs, der gezeichnet werden soll. Wählen Sie aus „ L^* , a^*-b^{**} “, „ a^*-b^{**} “, „ a^*-L^{**} “ oder „ b^*-L^{**} “ eine aus.
Property	Zeigt die Dialogbox Eigenschaft für die Grafik.

Siehe Seite 194 für die Einstellung der Gruppenmerkmale.


3.3.4 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf Property, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Grafik-Eigenschaften. Die folgenden fünf Registerkarten sind für die Einstellung der Eigenschaften der $L^*a^*b^*$ -Grafik verfügbar.

- 1) Display
- 2) L^*
- 3) a^*-b^* , a^*-L^* or b^*-L^*
- 4) Title
- 5) Miscellaneous

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Details dieser Registerkarten.

1) Registerkarte Display

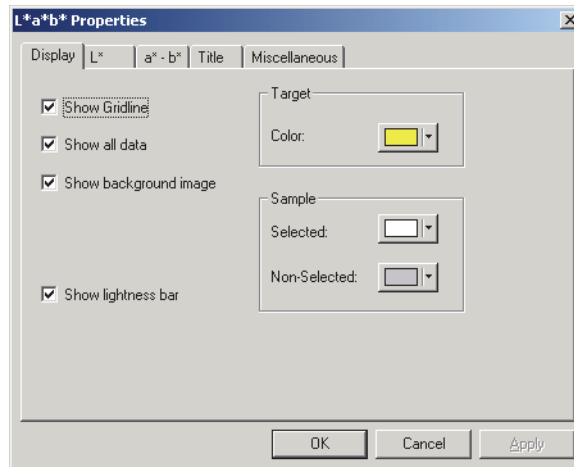

Show Gridline

Hier kann man auswählen, ob Gitterlinien angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Show all data

Wählen Sie aus, ob alle Daten der Liste in der Grafik gezeigt oder verborgen werden sollen.

Show background image

Wählen Sie aus, ob die Pseudo-Farbe des a*-b*-Farbsystems angezeigt oder verborgen werden soll.

Show lightness bar

Wählen Sie aus, ob die Helligkeitsleiste für die L*-Achse angezeigt werden soll.

Target - Color

Stellen Sie die Farbe der Bezugsdatenansicht ein.

Sample - Selected


Stellen Sie die Farbe der ausgewählten Probandatenansicht ein.

Sample - Non-Selected

Stellen Sie die Farbe der nicht ausgewählten Probandatenansicht ein.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

2) Registerkarte Lightness axis (L*)

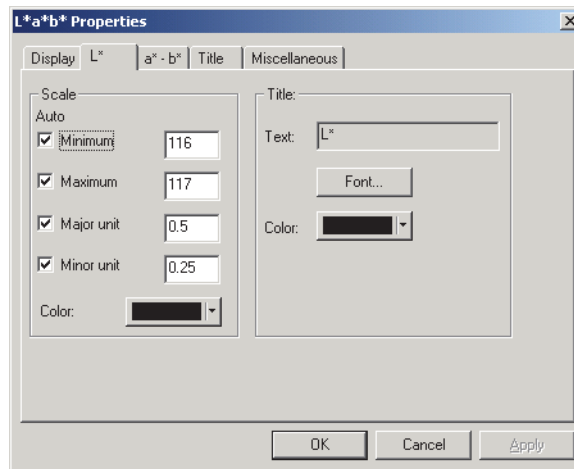

Scale - Auto [Minimum, Maximum, Major unit, Minor unit]

Legen Sie fest, ob Sie die automatische Einstellung der Skala für die Helligkeitsachse verwenden wollen. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Scale - Value [Minimum, Maximum, Major unit, Minor unit]

Legen Sie den kleinsten und größten Wert sowie die größte und kleinste Einheit der Skala für die Helligkeitsachse fest.

Scale - Color

Legen Sie die Skalenfarbe der Helligkeitsachse fest.

Title - Text [Kann nicht bearbeitet werden.]

Dies ist der Label-Text, der an der Helligkeitsachse erscheint.

Title - Font


Stellen Sie die Schriftart ein, die für den an der Helligkeitsachse erscheinenden Label verwendet wird. Vergessen Sie nicht, auch die Type einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Title - Color

Legen Sie die Farbe des Labels für die Helligkeitsachse fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

3) Registerkarte Chromaticity axis (a^* - b^*)

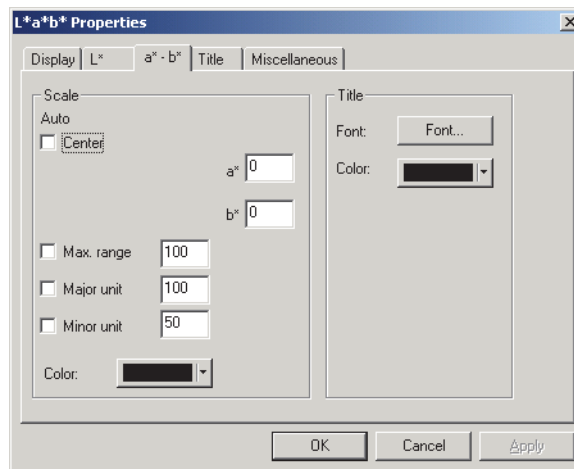

Scale - Auto [Center, Max. range, Major unit, Minor unit]

Legen Sie fest, ob die automatische Einstellung der Skala verwendet werden soll. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Scale - Center

Stellen Sie die Koordinaten der Mitte des Anzeigebereichs im Farbsystem ein.

Scale - Max. range

Legen Sie den Abstand (maximalen Bereich) von der Mitte fest, um den Anzeigebereich einzugrenzen.

Scale - Value [Major unit, Minor unit]

Legen Sie die größte und die kleinste Einheit der Skala fest.

Scale - Color

Legen Sie die Farbe der Skala fest.

Title - Font


Legen Sie die Schriftart für den Text des Labels fest. Vergessen Sie nicht, auch die Type einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Title - Color

Legen Sie die Farbe des Labels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

4) Registerkarte Title

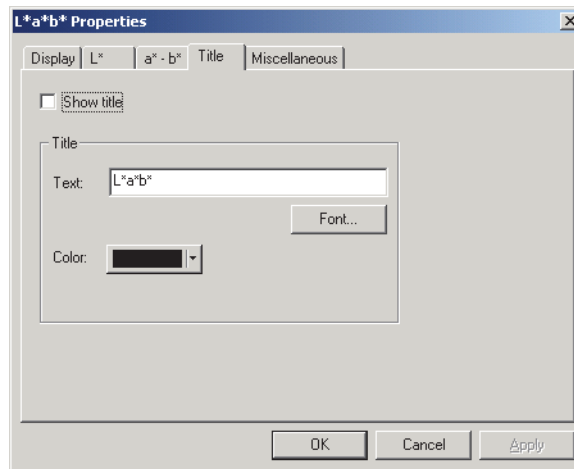**Show title**

Wählen Sie aus, ob der Titel der Grafik angezeigt oder verborgen werden soll.

Title - Text

Legen Sie den Text für den Grafiktitel fest.

Title - Font


Legen Sie die Schriftart für den Grafiktitel fest. Vergessen Sie nicht, auch die Type einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Title - Color

Legen Sie die Farbe des Grafiktitels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

5) Registerkarte Miscellaneous

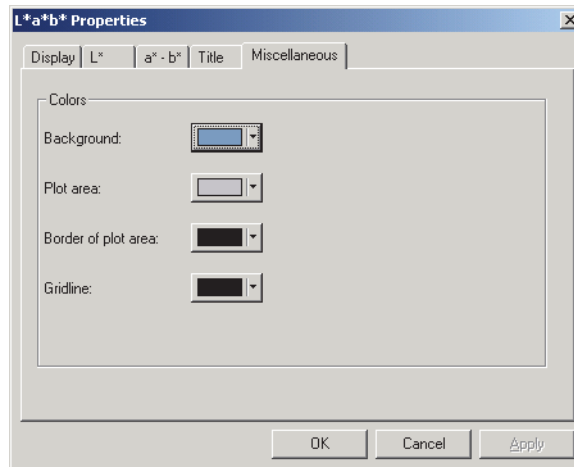

Colors - Background

Hier können Sie die Hintergrundfarbe des grafischen Objekts festlegen.

Colors - Plot area

Legen Sie die Farbe fest, die für die Innenseite der Grafik verwendet werden soll. Die Farbe kann nur dann geändert werden, wenn das Kästchen „Show background image“ im Register „Display“ auf Seite 164 nicht aktiviert ist.

Colors - Border of plot area

Legen Sie die Farbe des Grafikrands fest.

Colors - Gridline

Legen Sie die Gitterlinienfarbe der Grafik fest.


Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

3.4 Trend-Darstellung/Histogramm



3.4.1 Überblick

Mit diesem grafischen Objekt wird der Trend des spezifischen Farbwerts und des Farbdifferenzwerts dargestellt. Die Daten der Trend-Darstellung können auch als Histogramm oder Normalverteilung angezeigt werden.

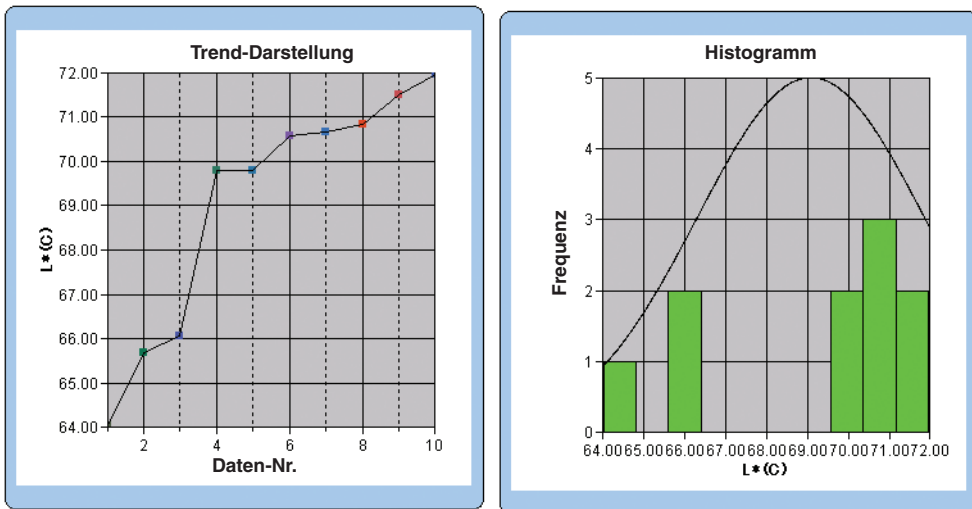

Trend-Darstellung/Histogramm

3.4.2 Merkmale

- Zeigt eine Trend-Darstellung.
- Zeichnet ein Histogramm.
- Zeichnet die Normalverteilung.
- Zeigt die Statistik (Mittelwert, Standardabweichung, größter Wert und kleinster Wert).

3.4.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die verfügbaren Menüpunkte anzeigt. Tabelle 4 zeigt die Menüpunkte, die für Trend-Darstellung/Histogramm verfügbar sind.

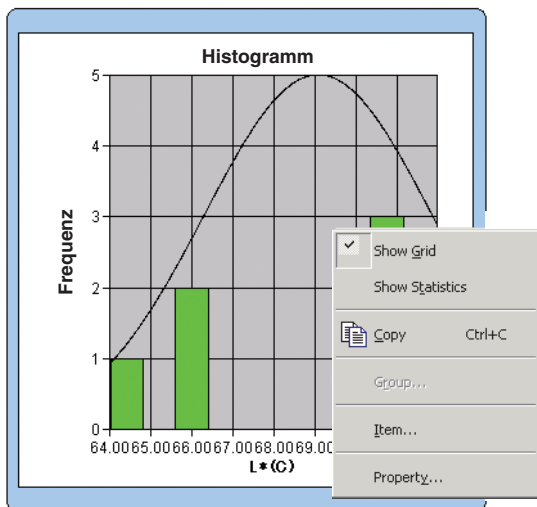


Abb. 4. Trend-Darstellung/Histogramm

Tabelle 4. Menü für Trend-Darstellung/Histogramm mit rechter Maustaste aufrufen


Menüpunkt	Funktion
Show Grid	Die Gitterlinien werden angezeigt oder verborgen.
Show Statistics	Die Statistik wird angezeigt oder verborgen.
Copy	Kopiert das grafische Objekt in die Zwischenablage.
Group	Zeigt eine Dialogbox zur Einstellung der Datenmerkmale, die grafisch dargestellt werden sollen.
Item	Zeigt eine Dialogbox für die Festlegung der Bezugsdaten, die für die Beurteilung und die Anzeigeform verwendet werden.
Property	Zeigt die Dialogbox Eigenschaften.

Siehe Seite 194 für die Einstellung der Gruppenmerkmale.

3.4.4 Einstellung des Menüpunkts Merkmal

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Items im Kontextmenü, um für das Objekt Trend-Darstellung/Histogramm sowie für die Anzeigeform die Dialogbox zur Einstellung des für die Bewertung verwendeten Bezugswerts anzuzeigen.


1) Registerkarte Display Contents

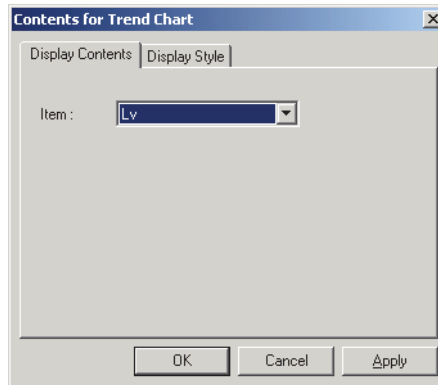

Item:

Wählen Sie die für die Bewertung verwendeten Farbmessdaten.

2) Registerkarte Display Style

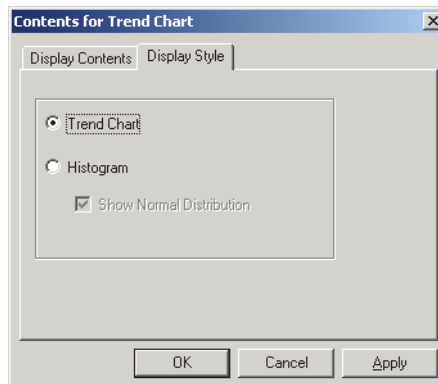

Anzeigeart

Wählen Sie entweder Trend Chart oder Histogram.

Ist Histogram ausgewählt, können Sie einstellen, ob die Normalverteilung angezeigt werden soll.


3.4.5 Einstellung der Eigenschaften

Die folgenden fünf Registerkarten sind für die Einstellung der Eigenschaften für Trend-Darstellung/Histogramm verfügbar.

- 1) Anzeige
- 2) Judgement data axis (Beispiel: ΔE)
- 3) Category axis
- 4) Titel
- 5) Miscellaneous

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Details dieser Registerkarten.

1) Registerkarte Display

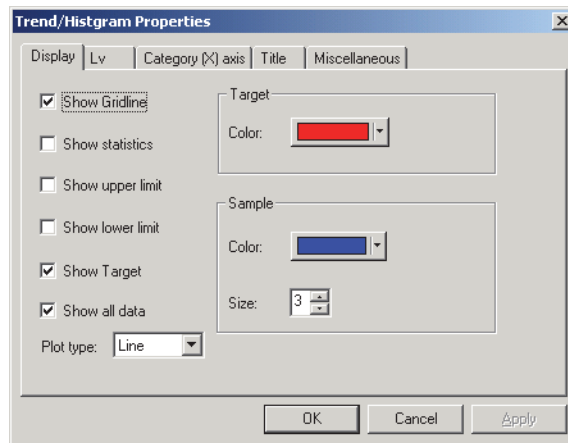

Show Gridline

Hier kann man auswählen, ob Gitterlinien angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Show statistics

Wählen Sie aus, ob eine Statistik angezeigt oder verborgen werden soll (Mittelwert, Standardabweichung, höchster Wert, kleinster Wert).

Show upper limit

Wählen Sie aus, ob die obere Grenze in der Trend-Darstellung angezeigt oder verborgen werden soll.

Show lower limit

Wählen Sie aus, ob die untere Grenze in der Trend-Darstellung angezeigt oder verborgen werden soll.

Show Target

Wählen Sie aus, ob die Bezugsdaten in der Trend-Darstellung angezeigt oder verborgen werden sollen.

Show all data

Wählen Sie aus, ob alle Daten angezeigt werden sollen, wenn ein Liniendiagramm in der Trend-Darstellung verwendet wird.

Ist diese Option nicht ausgewählt, werden einige Daten mit den momentan ausgewählten Messdaten angezeigt.

Plot type

Wählen Sie hier den Grafik-Typ aus, der in der Trend-Darstellung verwendet werden soll, wie z.B. Leiste oder Linie.

Target - Color

Legen Sie eine Farbe für die Anzeige der Bezugsdaten fest.

Sample - Color

Legen Sie die Farbe für die dargestellten Probendaten fest, die gerade in der Trend-Darstellung ausgewählt sind.

Sample - Size


Legen Sie die Größe (0 bis 5) der Markierung für die Darstellung der Probendaten in der Trend-Darstellung fest. (Wird 0 ausgewählt, wird die Markierung nicht dargestellt.)

- Handelt es sich bei den ausgewählten Listeninhalten um Absolutwerte (z.B. L_v , x , y , L^* , a^* , b^*), werden die oberen und unteren Grenzen in der Trend-Darstellung nicht angezeigt. Sogar wenn diese Option aktiviert ist, wird dieser Punkt ignoriert.
- Handelt es sich bei den ausgewählten Listeninhalten um Farbdifferenzwerte (z.B. ΔL_v , Δx , Δy , ΔL^* , Δa^* , Δb^*), ist der Bezugswert immer 0. Folglich werden die Bezugsdaten nicht in der Trend-Darstellung ausgegeben, auch wenn diese Option aktiviert ist.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

2) Registerkarte Judgement data axis

Legen Sie die Eigenschaften der Farbmessdaten-Achse fest, die im Register Display Contents unter Item properties ausgewählt wurde. Die ausgewählten Farbmessdaten werden als Name des Registers angezeigt.

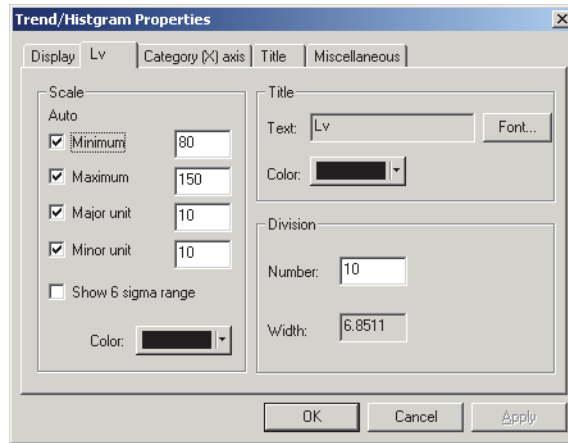

Scale - Auto [Minimum, Maximum, Major unit, Minor unit]

Legen Sie fest, ob Sie die automatische Einstellung der Skala für die Farbmessdaten-Achse (vertikale Achse) verwenden wollen, die im Register Display Contents unter Item properties ausgewählt wurde. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Scale - Value [Minimum, Maximum, Major unit, Minor unit]

Legen Sie den kleinsten und größten Wert sowie die größte und kleinste Einheit der Skala für die Farbmessdaten-Achse fest, die im Register Display Contents unter Item properties ausgewählt wurde.

Scale - Show 6 sigma range

Schalten Sie die Anzeige des Bereichs zwischen -3σ und $+3\sigma$ ein.

* „ σ “ steht für Standardabweichung.

Scale - Color

Legen Sie die Skalenfarbe der Bewertungsdaten-Achse fest.

Title - Text [Kann nicht bearbeitet werden.]

Die im Register Display Contents unter Item properties ausgewählten Farbmessdaten werden angezeigt.

Title - Font

Wählen Sie die Schriftart für den Label aus, der an der Farbmessdaten-Achse erscheint, die im Register Display Contents unter Item properties ausgewählte wurde. Vergessen Sie nicht, auch die Type einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Title - Color

Legen Sie die Label-Farbe der Farbmessdaten-Achse fest, die im Register Display Contents unter Item properties ausgewählte wurde.

Division - Number

Legen Sie die Nummer der Teilungen zwischen den kleinsten und den größten Werten fest, die für Daten-Sampling im Histogramm verwendet werden.


Division - Width [Kann nicht bearbeitet werden.]

Angezeigt wird die Weite einer Teilung, die für Daten-Sampling im Histogramm verwendet wird.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

3) Registerkarte Category

Stellen Sie die Eigenschaften der Datennummern und -achsen ein, um eine Trend-Darstellung anzuzeigen, und legen Sie die Eigenschaften der Frequenzachse fest, um ein Histogramm anzuzeigen.

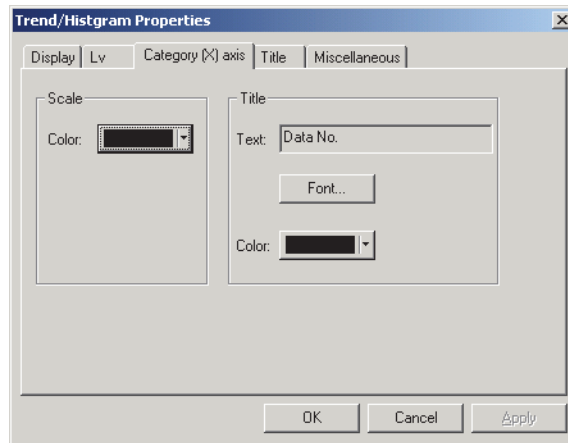

Scale - Color

Legen Sie die Farbe der Skala fest.

Title - Text [Kann nicht bearbeitet werden.]

Der Label-Text wird angezeigt.

Title - Font


Legen Sie die Schriftart für den Text des Labels fest. Vergessen Sie nicht, auch die Type einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Title - Color

Legen Sie die Farbe des Labels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

4) Registerkarte Title

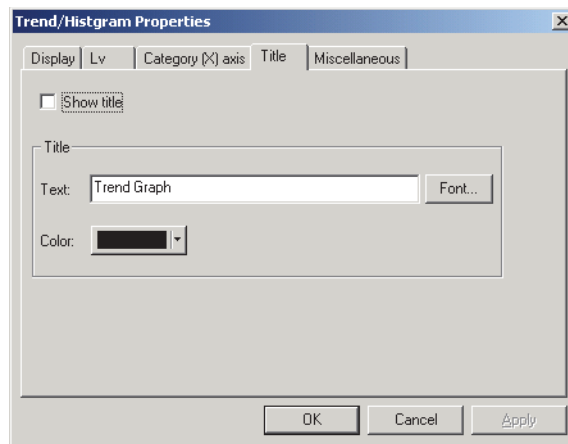**Show title**

Wählen Sie aus, ob der Titel der Tabelle angezeigt oder verborgen werden soll.

Title - Text

Legen Sie den Text für den Tabellentitel fest.

Title - Font


Legen Sie die Schriftart für den Tabellentitel fest. Vergessen Sie nicht, auch die Type einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Title - Color

Legen Sie die Farbe des Tabellentitels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

5) Registerkarte Miscellaneous

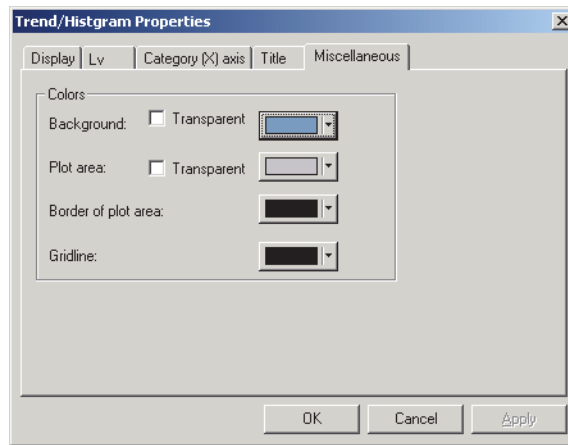

Colors - Background

Hier können Sie die Hintergrundfarbe des grafischen Objekts festlegen.

Colors - Background - Transparent

Stellen Sie den Hintergrund auf Transparent ein.

Colors - Plot area

Legen Sie die Farbe fest, die für die Innenseite der Darstellung verwendet werden soll.

Colors - Plot area - Transparent

Stellen Sie den Grafikbereich auf Transparent ein.

Colors - Border of plot area

Legen Sie die Farbe der Randlinie der Darstellung fest.

Colors - Gridline

Legen Sie die Farbe der Gitterlinien der Darstellung fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

3.5 Bild

3.5.1 Überblick

Bild wird verwendet, um eine Bilddatei im JPEG- oder BMP-Format darzustellen. Der Messpunkt kann am Bild markiert werden. (Siehe Abb. 5).

3.5.2 Merkmale

- Zeigt ein eingestelltes Bild an (JPEG- oder BMP-Format).
- Zeigt eine Markierung an einem Messpunkt.
- Grafiken können kopiert werden.

3.5.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt, um, wie in Abb. 5 beschrieben, ein Kontextmenü zu öffnen. Tabelle 5 zeigt die Menüpunkte, die für das Bild angezeigt werden.



Abb. 5. Bild


Tabelle 5. Bildmenü mit rechter Maustaste aufrufen

Menüpunkt	Funktion
Copy	Kopiert das grafische Objekt in die Zwischenablage.
Item	Zeigt eine Dialogbox für die Einstellung der Daten, die angezeigt werden sollen.
Property	Zeigt die Dialogbox Eigenschaften.

3.5.4 Merkmale einstellen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Items im Kontextmenü, um eine Dialogbox für die Einstellung des darzustellenden Datentyps anzuzeigen.

1) Registerkarte Content Settings

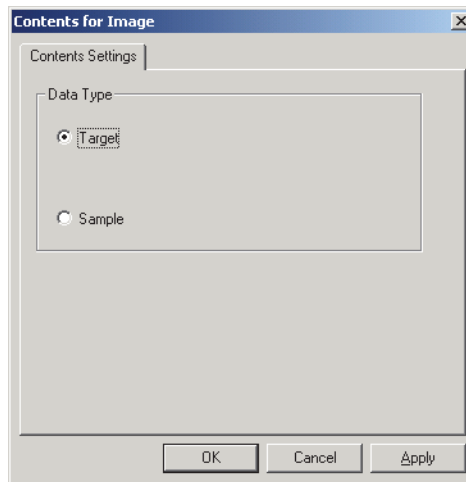


Data Type

Wählen Sie aus, ob Bezugs- oder Probanddaten angezeigt werden sollen.

3.5.5 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf Property, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Eigenschaften. Die folgende Registerkarte ist für die Einstellung der Eigenschaften des Bildes verfügbar.

1) Registerkarte Property

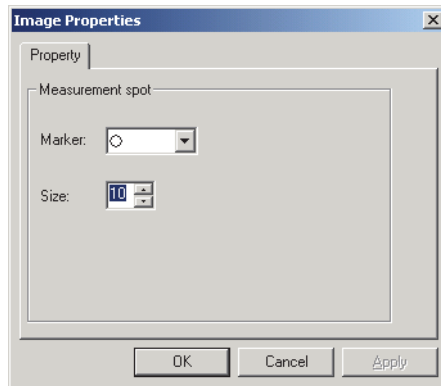

Measurement spot - Marker

Stellen Sie $\times$, $\circ$ oder $\oplus$ als Markierungstyp ein.

Measurement spot - Size

Legen Sie die Größe der Markierung fest.

3.6 Data Label

3.6.1 Überblick

Das Objekt Data Label wird verwendet, um Farbmessdaten oder Bewertungsmerkmale, wie etwa „Pass/Fail“ anzuzeigen. Ist beispielsweise Lv als anzuzeigender Wert markiert, wird das Objekt wie in Abb. 6 dargestellt.

3.6.2 Merkmale

- Zeigt Farbmessdaten
- Zeigt Bewertungsmerkmale (wie etwa „Pass/Fail“).

3.6.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Daten-Label, um, wie in Abb. 6 beschrieben, ein Kontextmenü zu öffnen. Tabelle 6 zeigt die Menüpunkte, die für den Daten-Label angezeigt werden.

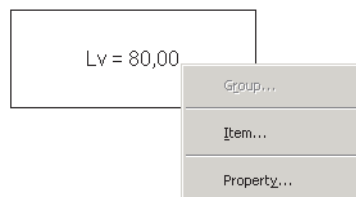


Abb. 6. Daten-Label

Tabelle 6. Menü des Daten-Labels mit rechter Maustaste aufrufen


Menüpunkt	Funktion
Group	Zeigt eine Dialogbox zur Einstellung der Datenmerkmale, die grafisch dargestellt werden sollen.
Item	Zeigt eine Dialogbox für die Einstellung der Daten, die angezeigt werden sollen.
Property	Zeigt die Dialogbox Eigenschaften.

Siehe Seite 194 für die Einstellung der Gruppenmerkmale.

3.6.4 Einstellung des Menüpunkts Merkmal

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Items im Kontextmenü, um eine Dialogbox für die Einstellung des darzustellenden Datentyps und -formats anzuzeigen.

1) Registerkarte Contents Settings

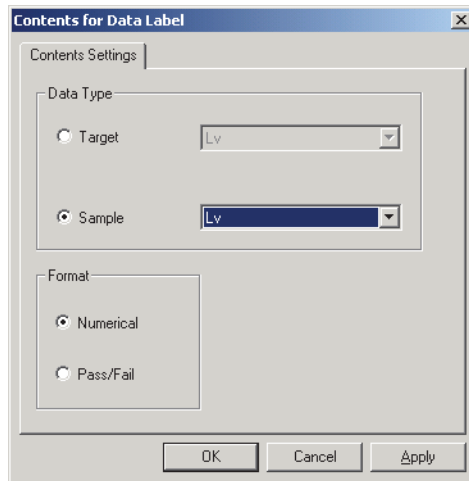

Data Type

Wählen Sie aus, ob Bezugs- oder Probendaten angezeigt werden sollen und wählen Sie die Inhalte der ausgewählten Daten aus.


Format

Wählen Sie das Format der angezeigten Punkte, wenn Probe als Data Type markiert ist.
Auswählbare Punkte: Zahlenwert, Beurteilung (Ergebnis der Pass-/Fail-Bewertung).

3.6.5 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf Property, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Eigenschaften. Die folgende Registerkarte ist für die Einstellung der Eigenschaften des Daten-Labels verfügbar.

1) Registerkarte Property

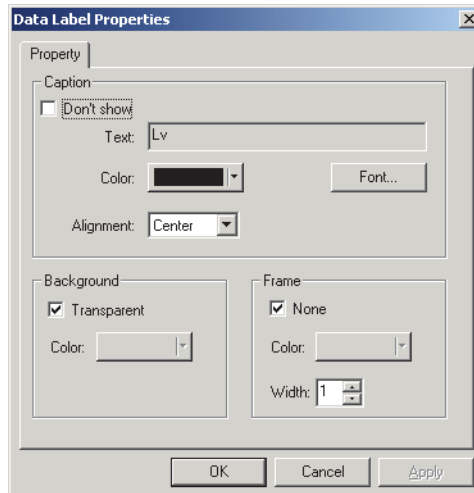

Caption - Don't show

Hier kann man auswählen, ob der Überschriftentext angezeigt oder verborgen werden soll.

Caption - Text [Kann nicht bearbeitet werden.]

Angezeigt wird ein Text, der die Daten beschreibt.

Caption - Color

Legen Sie die Textfarbe fest.

Caption - Font

Legen Sie die Schriftart für den Text fest. Vergessen Sie nicht, auch die Type einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Caption - Alignment

Stellen Sie ein, ob der Text im Label linksbündig, zentriert oder rechtsbündig ausgerichtet sein soll.

Background - Transparent

Legen Sie fest, ob der Hintergrund farblich hinterlegt werden soll. Wenn Pseudo-Farbe als anzuzeigender Wert ausgewählt ist, wird mit Auswahl der Funktion Fill the background der Hintergrund des Labels mit Pseudo-Farbe hinterlegt.

Background - Color

Legen Sie die Hintergrundfarbe des Labels fest.

Wenn Pseudo-Farbe als anzuzeigender Wert ausgewählt ist, wird der Hintergrund mit der Pseudo-Farbe hinterlegt. Selbst wenn die Hintergrundfarbe hier geändert wird, wird wieder Pseudo-Farbe eingestellt.

Frame - None

Wählen Sie aus, ob ein Rahmen um den Label gezeichnet werden soll.

Frame - Color

Legen Sie die Farbe für den Rahmen um den Label fest.

Frame - Width

Legen Sie die Breite für den Rahmen um den Label fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.


3.7 String Label

Das Objekt String- (Text-) Label wird verwendet, um den Namen der Daten anzuzeigen, die dargestellt werden sollen.

3.7.1 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf Property, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Eigenschaften. Die folgende Registerkarte ist für die Einstellung der Eigenschaften des String-Labels verfügbar.

1) Registerkarte Property

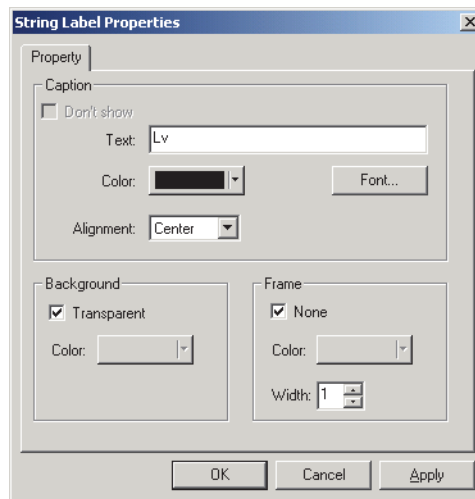

Caption - Text

Geben Sie den Namen der Daten ein, die angezeigt werden sollen.

Caption - Color

Legen Sie die Textfarbe fest.

Caption - Font

Legen Sie die Schriftart für den Text fest. Vergessen Sie nicht, auch die Type einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Caption - Alignment

Stellen Sie ein, ob der Text im Label linksbündig, zentriert oder rechtsbündig ausgerichtet sein soll.

Background - Transparent

Legen Sie fest, ob der Hintergrund farblich hinterlegt werden soll.

Background - Color

Legen Sie die Hintergrundfarbe des Labels fest.

Frame - None

Wählen Sie aus, ob ein Rahmen um den Label gezeichnet werden soll.

Frame - Color

Legen Sie die Farbe für den Rahmen um den Label fest.

Frame - Width

Legen Sie die Breite für den Rahmen um den Label fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

3.8 Liniengrafik-Objekt

3.8.1 Überblick

Das Liniengrafik-Objekt wird zur Bewertung von Daten zwischen unterschiedlichen Attributen verwendet. Die Gruppenattribute werden auf der horizontalen Achse gezeichnet, die Farbmessdatenwert auf der vertikalen Achse.

Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB eingestellt, werden die Daten für Rot, Grün und Blau durch eine Linie dargestellt.

3.8.2 Merkmale

- Zeigt Daten mit zwei oder mehreren Attributen.
- Zeigt den Toleranzwert der einzelnen Attribute

3.8.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die in Abb. 8 dargestellten verfügbaren Menüpunkte anzeigt.

Tabelle 8 zeigt die Menüpunkte, die für das Liniengrafik-Objekt verfügbar sind.

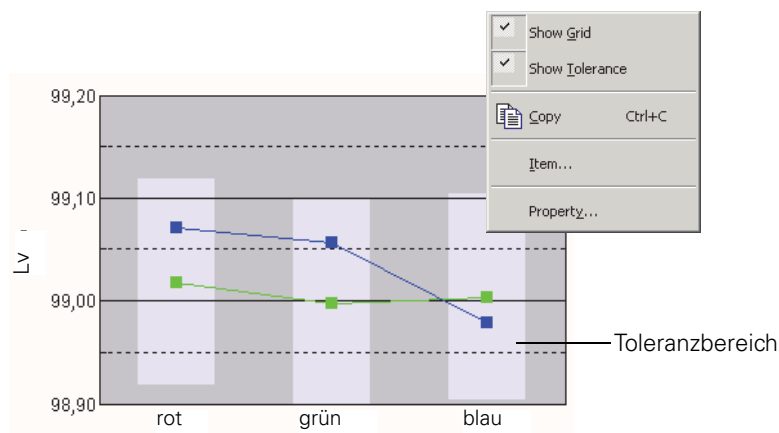



Abb. 8. Liniengrafik-Objekt

Tabelle 8: Menü des Liniengrafik-Objekts, mit rechter Maustaste aufgerufen

Menüpunkt	Funktion
Show Grid	Die Gitterlinien werden angezeigt oder verborgen.
Show Tolerance	Die Toleranzwerte werden angezeigt oder verborgen
Copy	Kopiert das grafische Objekt in die Zwischenablage
Item	Zeigt eine Dialogbox für die Auswahl eines zu bewertenden Datenmerkmals.
Property	Zeigt die Dialogbox Eigenschaften

3.8.4 Einstellung des Menüpunkts Merkmal

Wenn die Option Merkmal aus dem mit der rechten Maustaste geöffneten Kontextmenü ausgewählt wird, erscheint eine Dialogbox, in welcher die Art der anzuzeigenden Daten festgelegt werden kann.

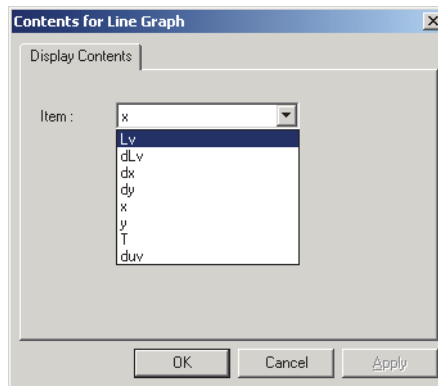

Item

Wählen Sie die zu bewertenden Farbmessdaten aus.

Verfügbares Merkmal: Die in den Listenmerkmalen ausgewählten Farbmessdaten

3.8.5 Einstellung der Eigenschaften


Klickt man mit der rechten Maustaste auf Property, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Grafik-Eigenschaften.

Die folgenden fünf Registerkarten sind für die Einstellung der Eigenschaften des Liniengrafik-Objekts verfügbar.

- 1) Display
- 2) Judgement data axis (Beispiel: Lv)
- 3) Column Axis
- 4) Title
- 5) Miscellaneous

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Details dieser Registerkarten.

1) Registerkarte Display

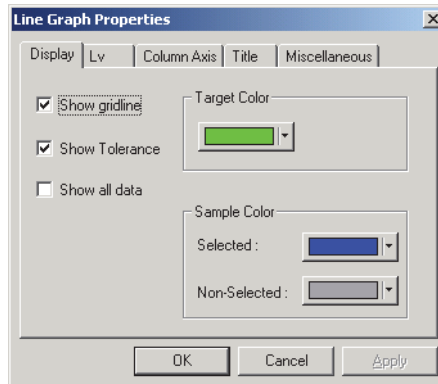

Show gridline

Hier kann man auswählen, ob Gitterlinien angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Show Tolerance

Hier kann man auswählen, ob Toleranzwerte angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Show all data

Hier kann man auswählen, ob alle Daten angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Target Color

Hier können Sie die Farbe für die Anzeige der Bezugsdaten festlegen.

Sample Color - Selected


Stellen Sie die Farbe der momentan ausgewählten Probanddaten ein.

Sample Color - Non- Selected

Hier können Sie die Farbe der momentan nicht ausgewählten Probanddaten festlegen.

2) Registerkarte Judgement data axis (Beispiel: ΔL_v)

Hier können Sie die Eigenschaften der mit Item ausgewählten Farbmessdaten-Achse festlegen. Die ausgewählten Farbmessdaten werden als Name der Registerkarte angezeigt.

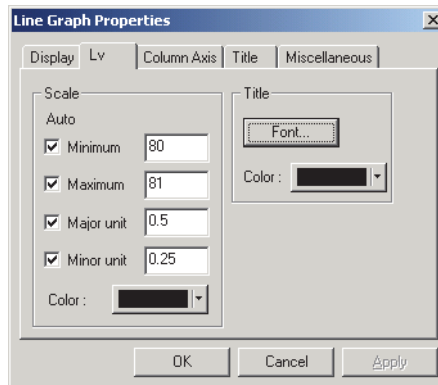

Scale - Auto [Minimum, Maximum, Major unit, Minor unit]

Legen Sie fest, ob Sie die automatische Einstellung der Skala für die Farbmessdaten-Achse (vertikale Achse) verwenden wollen, die im Register Display Contents unter Item properties ausgewählt wurde. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Scale - Value [Minimum, Maximum, Major unit, Minor unit]

Legen Sie den kleinsten und größten Wert sowie die größte und kleinste Einheit der Skala für die Farbmessdaten-Achse fest, die im Register Display Contents unter Item properties ausgewählt wurde.

Scale - Color

Legen Sie die Skalenfarbe der Bewertungsdaten-Achse fest.

Title - Font


Wählen Sie die Schriftart für den Label aus, der an der Farbmessdaten-Achse erscheint, die im Register Display Contents unter Item properties ausgewählt wurde. Vergessen Sie nicht, auch die Type einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Title - Color

Legen Sie die Label-Farbe der Farbmessdaten-Achse fest, die im Register Display Contents unter Item properties ausgewählt wurde.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

3) Registerkarte Column Axis (attribute)

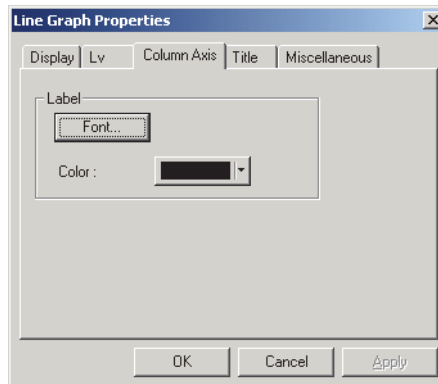

Label - Font


Legen Sie die Schriftart für den Text des Labels fest. Vergessen Sie nicht, auch die Type einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Label - Color

Legen Sie die Farbe des Labels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

4) Registerkarte Title

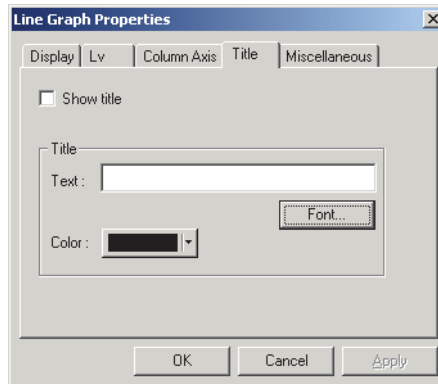**Show title**

Wählen Sie aus, ob der Titel der Tabelle angezeigt oder verborgen werden soll.

Title - Text

Legen Sie den Text für den Tabellentitel fest.

Title - Font


Legen Sie die Schriftart für den Tabellentitel fest. Vergessen Sie nicht, auch die Type einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox Font festlegen.

Title - Color

Legen Sie die Farbe des Tabellentitels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

5) Miscellaneous

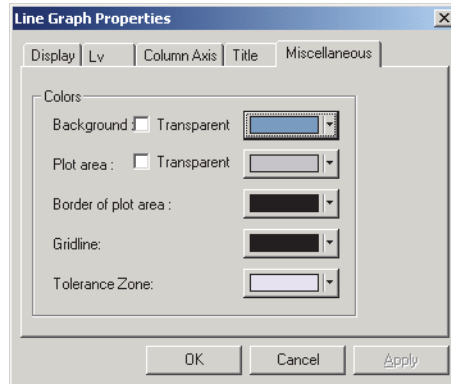

Colors - Background

Hier können Sie die Hintergrundfarbe des grafischen Objekts festlegen.

Colors - Background - Transparent

Stellen Sie den Hintergrund auf Transparent ein.

Colors - Plot area

Legen Sie die Farbe fest, die für die Innenseite der Darstellung verwendet werden soll.

Colors - Plot area - Transparent

Stellen Sie den Grafikbereich auf Transparent ein.

Colors - Border of plot area

Legen Sie die Farbe der Randlinie der Darstellung fest.

Colors - Gridline

Legen Sie die Farbe der Gitterlinien der Darstellung fest.

Color - Tolerance

Hier können Sie die Farbe für den Toleranzbereich festlegen.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.


3.9 Linie

Das Objekt Linie wird verwendet, um Linien zu zeichnen.

3.9.1 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf Property, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Eigenschaften. Die folgende Registerkarte ist für die Einstellung der Eigenschaften des Objekts Linie verfügbar.

1) Registerkarte Property

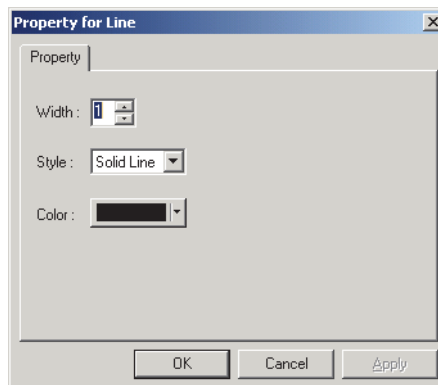

Width

Legen Sie die Breite der Linie fest.

Style

Wählen Sie Durchgehende Linie, Gestrichelte Linie oder Punktierte Linie als Linienart.

Color

Legen Sie die Linienfarbe fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.


3.10 Rechteck

Das Objekt Rechteck wird verwendet, um Rechtecke zu zeichnen.

3.10.1 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf Property, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Eigenschaften. Die folgende Registerkarte ist für die Einstellung der Eigenschaften des Objekts Rechteck verfügbar.

1) Registerkarte Property

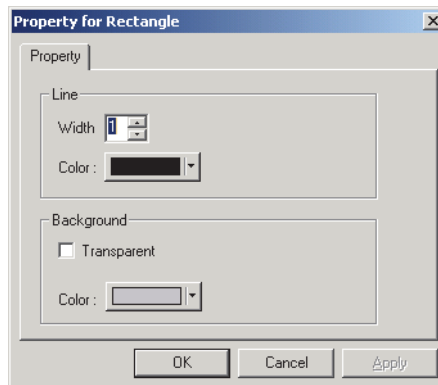

Line - Width

Legen Sie die Breite des Rahmens fest.

Line - Color

Legen Sie die Rahmenfarbe fest.

Background - Transparent

Legen Sie fest, ob der Hintergrund farblich hinterlegt werden soll.

Background - Color

Legen Sie die Hintergrundfarbe fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 108.

3.11 Arbeiten im Entwurf-Fenster im Modus Bearbeiten

3.11.1 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Tabelle 10 listet das Kontextmenü auf, das für jedes grafische Objekt angezeigt wird, um Bildschirme im Entwurf-Fenster zu bearbeiten (Platzieren von grafischen Objekten).

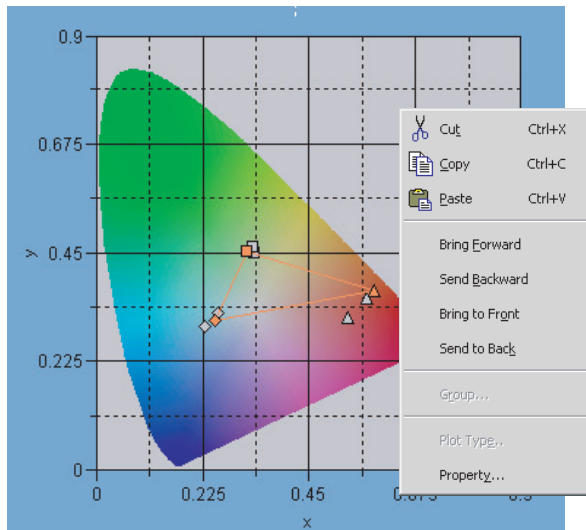


Tabelle 10. Menü zum Bearbeiten grafischer Objekte mit rechter Maustaste aufrufen

Menüpunkt	Funktion
Cut*	Schneidet das grafische Objekt aus.
Copy*	Kopiert das grafische Objekt.
Paste*	Fügt das grafische Objekt ein.
Bring Forward*	Holt das grafische Objekt nach vorne.
Send Backward*	Schiebt das grafische Objekt nach hinten.
Bring to Front*	Holt das grafische Objekt in den Vordergrund.
Send to Back*	Schiebt das grafische Objekt in den Hintergrund.
Group	Zeigt eine Dialogbox für die Einstellung der Gruppe.
Plot Type	Zeigt die Dialogbox Darstellungsart. (Nur für die L*a*b* Grafik).
Property	Zeigt die Dialogbox Eigenschaften.


Die mit einem Sternchen versehenen Menüpunkte können unter *Edit* in der Menüleiste ausgewählt werden.

3.11.2 Gruppeneinstellung

Ist der Dokumententyp auf Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Kontrast, Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB oder Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast eingestellt, müssen Sie die Gruppeneigenschaften der anzuzeigenden Daten einstellen.

Für das xy-Farbtafelobjekt, u'v'-Farbtafelobjekt oder L*a*b* Grafikobjekt

Sie können die gewünschten Daten in einem grafischen Objekt darstellen, indem Sie aus Folgendem auswählen: White und Black für Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart Kontrast; Red, Green und Blue für Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB; oder White, Black, Red, Green oder Blue für Lichtquellenfarbenmessung in Betriebsart RGB & Kontrast.

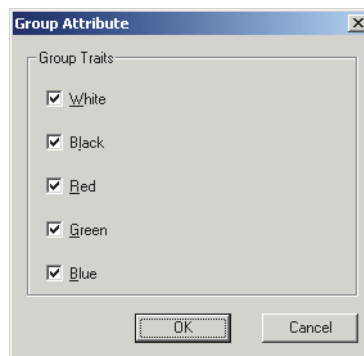

Group Traits - White

Hier kann man auswählen, ob der Wert für Weiß angezeigt oder verborgen werden soll.
Form des Darstellungspunkts bei Anzeige: ●

Group Traits - Black

Hier kann man auswählen, ob der Wert für Schwarz angezeigt oder verborgen werden soll.
Form des Darstellungspunkts bei Anzeige: ×

Group Traits - Red

Hier kann man auswählen, ob der Wert für Rot angezeigt oder verborgen werden soll.
Form des Darstellungspunkts bei Anzeige: ▲

Group Traits - Green


Hier kann man auswählen, ob der Wert für Grün angezeigt oder verborgen werden soll.
Form des Darstellungspunkts bei Anzeige: ■

Group Traits - Blue

Hier kann man auswählen, ob der Wert für Blau angezeigt oder verborgen werden soll.
Form des Darstellungspunkts bei Anzeige: ◆


Sind alle der folgenden drei Bedingungen erfüllt, wird ein Dreieck, das die Daten für Rot, Grün und Blau verbindet, in der Farbtafel (oder im a*-b*-System) angezeigt.

- Alle Gruppeneigenschaften für Rot, Grün und Blau sind aktiviert.
- Alle Gruppeneigenschaften für Rot, Grün und Blau verfügen über Daten.
- Der Wert ist ausgewählt.

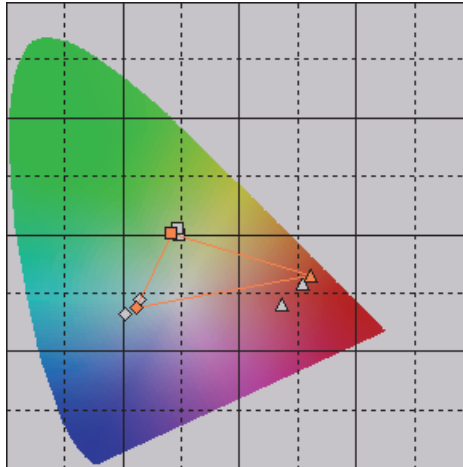

Für das Objekt Trend-Darstellung/Histogramm oder das Objekt Daten-Label

Sie können eines der Datenmerkmale für Weiß, Schwarz, Rot, Grün und Blau anzeigen. Wählen Sie eine Gruppeneigenschaft für die Anzeige.

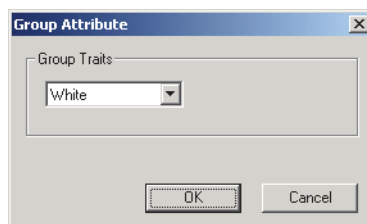

INDEX

A

About CS-S10w	21
Anfangstoleranz	74
Anpassen der Standard-Symbolleiste	10
Arbeiten im Entwurf-Fenster im Modus	
Bearbeiten	193
Arbeitsfenster	7
Ausschneiden von Listendaten	86
Auswahl der Listendaten	86
Auswahlwerkzeug	16
Auto Naming	43
Average	88
Averaged Measurement	48
Averaging Measurement	42, 46

B

Baumdiagramm	81
Bearbeitung der Listendaten	86
Beobachter	4, 32
Berechneter Mittelwert	44
Betriebsart Farbsystem	4
Betriebsart Lichtquellenfarbe	4
Betriebsart Objektfarbe	4
Bezug	5
Bezugsdaten	64
Bezugsdaten von den bestehenden Daten	
kopieren	64, 71
Bild	177

C

Cascade	105
ces	99
Change Target	73
Color Setting	108
COM-Anschluss	23
Communication Setup	23
Connect	24
Cont.ctp	100
Contrast Measurement	56
Contrast Mode	22
Copy	86, 94
Create Folder	72
ctp	100
Cut	86, 94

D

Darstellung von Bildern	4
Data Label	180
Data Property	53, 55
Datenliste	5
Decimal Places	41
Default Tolerance Setting	74
Delete	87, 94
Disconnect	24
Display Settings	91, 105
Display View	97
Display-Ansicht	15
Document Type	22
Download Target	119, 120, 121
Druckansicht	15
Drucken	96, 98

E

Edit Mode	91, 94
Edit Spectral Data	144
Einfügen der Listendaten	86
Eintragen des Bezugs durch Manuelle	
Dateneingabe	65
Eintragung von Bezugsdaten mittels	
Durchführung einer Messung	64
E-Mail	111
Entwurf-Fenster	7, 15
Externe E/A	5

G

Gleichzeitiges Ausschneiden und Einfügen/	
Kopieren und Einfügen der Listendaten	87
Grafische Darstellung	4
Grafisches Objekt	92

I

Image	55
Information zur Version	21
Input Colorimetric Target	68
Input Spectral Target	65
Instrument Settings	26
Interval Measurement	42, 46
Intervallmessung	44

J

Judgement Format 79

K

Kalibrierung 112

Kontrast-Modus 44

Kopieren der Listendaten 86

L

L*a*b* Grafik 162

Laden von Bezugsdaten in das Messgerät ... 119

Lichtart 4, 32

Lichtquellenfarbenmessung 22

Light-source Color 22

Linie 191

Liniengrafik-Objekt 184

Liste 82

Liste verkleinern 90

Listenfenster 7, 14, 81

Load Template 101

Löschen der Listendaten 87

M

Manuelle Dateneingabe 64

Measure 45, 56, 58, 60, 62

Measurement Options 42, 46

Measurement with Instrument Key 50

Mehrpunkt-Messung 22, 62

Menüleiste 7, 8

Messablauf 4

Messgerät Kontroll Funktionen 4

Messung mittels Taste am Messgerät 44

Mittelwertmessung 44

N

ND-Korrektur 122

New 31

Normal Mode 22

Normal.ctp 100

Normale Messung 44, 45

O

Object 92

Object Color 22

Objekt Daten-Label 195

Objektfarbenmessung 22

Objektivtyp 122

Observer and Illuminant 32

Open 104, 109

Option 109

P

Page Setup 97

Paste 86, 94

Print Preview 98

Printing View 97

R

Rechteck 192

Ref.ctp 100

Re-measure 89

Restore List Size 90

RGB- & Kontrast-Modus 44

RGB Measurement 58

RGB Mode 22

RGB&Contrast Measurement 60

RGB&Contrast Mode 22

RGB.ctp 100

RGBCont.ctp 100

RGB-Modus 44

S

Save As 99

Save as Template 100

Save Selection As Text 87

Send Mail 111

Serial Port Settings 23

Single Calibration 134

Sort 87

Sound Setting 109

Speicherung der Listendaten im Textformat 87

Spektraldaten 65

Spektralkurve 154

Standalone Configuration 127

Standard-Symbolleiste 7, 10

Startup Options 102

Statistischer Wert 84

Status-Fenster 7, 17, 18

Statusleiste 7, 18

String Label 183

T

Target Data to upload 70

Template 100

Tile 105

Tolerance Setting 77

Toleranz 74

Toolbar setup 10, 95

Trend-Darstellung/Histogramm 16, 169

U

u'v'-Farbtafel	148
Überspielen der Bezugsdaten vom Messgerät	64, 70
Überspielen der Probanden vom Messgerät	51
Upload Target	70
User Calibration	113, 115, 116, 117, 122, 123, 131, 134, 136

V

View Settings	91, 105
Vorlagendatei	100, 101

W

Welcome to CS-S10w	22
Werkzeugleiste	7, 16
White Calibration	143

X

xy-Farbtafel	148
--------------------	-----

Z

Zoom In List	90
Zoom Out List	90



KONICA MINOLTA